

Une technologie optimisée et un design ergonomique.



macro

Auxiliaire de pipetage

FIRST CLASS · BRAND

L'auxiliaire de pipetage macro de BRAND – un pipetage confortable et simple.

- **Aspiration rapide de liquides**
- **Réglage précis et aisé du ménisque** avec le levier sur ressort
- **Un design perfectionné** pour un pipetage agréable, même dans le cas de longues séries
- **Quatre couleurs différentes sont disponibles:**
Grâce à la possibilité de choisir entre du gris neutre, du magenta voyant, du vert frais et du bleu sympathique, il devient plus facile de distinguer les différentes applications.

Vous trouverez à présent un vaste assortiment de pipettes jaugées et graduées conformes aux exigences USP, sur www.brand.de




Utilisation confortable sans effort

Grâce au système de soupape spécialement mis au point, le soufflet peut être aisément comprimé. Ce dernier permet d'aspirer jusqu'à 50 ml de liquide en seulement 11 secondes. Avec le levier sur ressort, l'aspiration et l'évacuation de liquides peuvent être contrôlées avec plus de précision. Ajuster le ménisque est un jeu d'enfant.

Forme ergonomique

Le design optimisé, la disposition pratique des fonctions et le poids réduit à 125 g facilitent le travail en toute sécurité lors des pipetages en série, même pour l'utilisateur débutant.

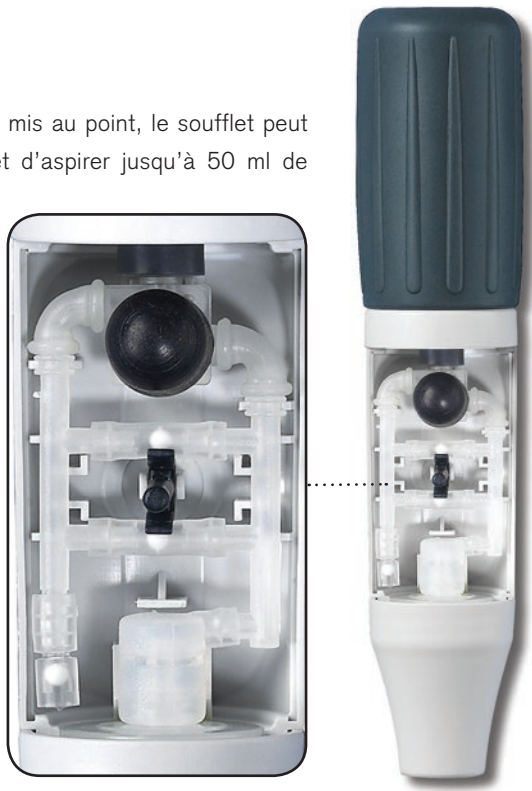

Large champ d'application

Pour toutes les pipettes jaugées et graduées de 0,1 à 200 ml vous n'avez besoin que d'un seul auxiliaire de pipetage. L'adaptateur en silicone de forme conique garantit une fixation ferme et sûre. L'appareil complet est autoclavable à 121 °C (2 bar) selon DIN EN 285. Une membrane hydrophobe protège le système contre les remontées de liquide.

Une touche de couleur au laboratoire

Les quatre couleurs disponibles – gris, magenta, vert et bleu – aident à maintenir de l'ordre au laboratoire.

Pipetter sans effort



Aspiration

Par une pression unique du soufflet d'aspiration, vous pourrez aspirer 50 ml d'un coup! Plus le levier est actionné, plus vite la pipette sera remplie.



Evacuation

Simplement actionner le levier vers le bas. Même pour un écoulement libre, la précision du volume de la pipette n'est pas entravée.



Soufflage (fonction blow-out)

Dans le cas de pipettes à évacuation par soufflage, laisser le liquide s'écouler jusqu'à ce que le ménisque s'immobilise dans la pointe. Pour évacuer par soufflage, simplement appuyer une seule fois brièvement sur le petit soufflet de caoutchouc.

Données de commande

Auxiliaire de pipetage macro, incl. membrane filtrante de rechange, 3 µm. Emballage standard 1 unité.

Couleur	Réf.
gris	262 00
vert	262 03
bleu	262 01
magenta	262 02

Pièces de rechange

Description	Emballage standard	Réf.
Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée	1	260 52
Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée	10	260 56
Adaptateur (silicone), 44 mm de long	1	261 46
Bûte de l'adaptateur (PP), gris, 49 mm de long	1	262 20
Soufflet d'aspiration (silicone) avec anneau à vis (PP)	1	262 25
Système de soupapes (PP, PTFE, silicone)	1	261 28

BLAUBRAND® Pack de pipetage



Emballage standard:

- 1 auxiliaire de pipetage macro, gris
- 6 pipettes graduées BLAUBRAND®, type 2 respectivement 3 unités de 5 ml et 10 ml, classe AS, marquage DE-M, avec certificat de lot
- Informations produit utiles appareils de volumétrie BLAUBRAND®, utilisation des pipettes
- Étui pratique en plastique idéal pour ranger des pipettes mesurant jusqu'à 360 mm.

Réf.	260 08
------	--------

BRAND® et BLAUBRAND® sont des marques de BRAND GMBH + CO KG, R.F.A.

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l'aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions. Cette transposition doit donc faire l'objet d'une vérification très attentive de votre part dans chaque cas de figure.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

