

OPASTER'ANIOS

Désinfectant
de haut niveau



- Solution prête à l'emploi
- Large spectre antimicrobien
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette spécifique
- Sans odeur
- Stabilité du bain de trempage : 7 jours

INDICATIONS

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

CARACTERISTIQUES

- Solution limpide bleue
- Solution à 0,55% d'orthophtalaldéhyde tamponnée à pH 7
- Large compatibilité avec tous types de matériaux
- Actif sur Clostridium difficile O27
- Péréemption : 3 ans à partir de la date de production
- S'utilise en association à tout type de produit nettoyant pré-désinfectant


PRÊT A
L'EMPLOI



OPASTER'ANIOS

Désinfectant de Haut Niveau


MODE D'EMPLOI

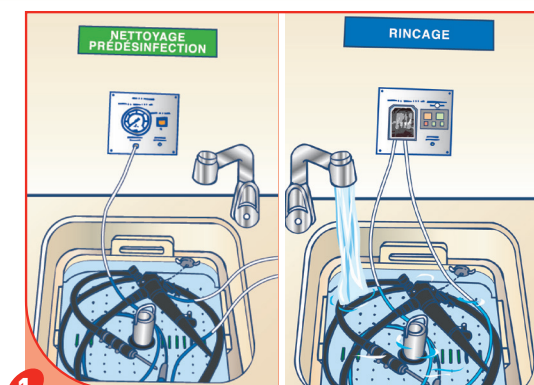


Etape de pré-désinfection : Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME X3, ANIOS'CLEAN EXCEL D, ou SALVANIOS Premium. Rincer soigneusement. Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.



Etape de désinfection : verser la solution. Couvrir le bac. **Temps de contact : 5 min.*** Temps de conservation maximum du bain de trempage : 7 jours.

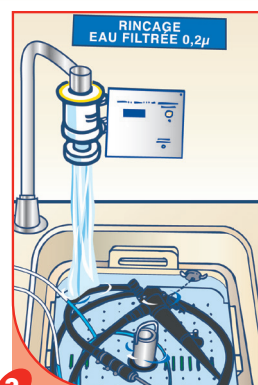

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm). Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.

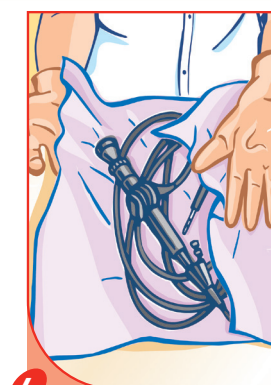

Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

*Activité sur Clostridium difficile en 30 minutes.

COMPOSITION

Solution d'ortho-Phtalaldéhyde (0.55%) en milieu tamponné, colorant, parfum.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage entre +5°C et +35°C. Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727+A1, EN 14561	5 minutes
Mycobactéries	EN 14348, EN 14563	5 minutes
Levures/ Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 minutes
Virus	EN 14476	5 minutes
	PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus	5 minutes
Spores de bactéries	Clostridium difficile 027 (EN 14347, EN 13704)	30 minutes

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

CONDITIONNEMENTS

- 1 4 bidons de 5L..... Ref 2504.028
2 Bandelettes de contrôle (boîte de 50)..... Ref 100.110 100110FG

