

Your **Power** for Health


greiner bio-one



MiniCollect® Complete System

Cada gota é importante!

www.gbo.com/preanalytics



MiniCollect® Complete System

A nova linha de produtos **MiniCollect®** Complete System é ideal para a coleta de pequenos volumes de amostras de sangue, sendo indicada, principalmente, para pacientes com acesso difícil, como crianças, geriátricos, oncológicos ou com queimaduras.

Tubo MiniCollect® acoplado ao tubo de transporte: a combinação perfeita

Os tubos **MiniCollect®** acoplados ao tubo de transporte Premium correspondem às dimensões do tubo padrão, 13 x 75 mm. Dessa forma:

- Os tubos encaixam nas racks, sem dificuldades;
- Podem ser processados em qualquer centrífuga padrão;
- Facilitam o manuseio durante todo processo de coleta.

O tubo de citrato está disponível desacoplado; é possível adquirir o conjunto tubo + tubo de transporte.

O tubo de Sorologia está disponível acoplado ao tubo de transporte transparente ou pode ser adquirido o conjunto tubo + tubo de transporte âmbar.



Máxima abertura do tubo para mínima adesão

O tubo **MiniCollect**[®] possui um funil integrado, permitindo que as gotas de sangue sejam coletadas de forma fácil e segura.

A ampla abertura do tubo garante um fluxo sanguíneo eficiente enquanto o diâmetro ampliado minimiza a adesão à parede do tubo e facilita a mistura da amostra.

Tampas para transporte seguro

As tampas são à prova de vazamentos e as amostras podem ser transportadas via pneumático ou outro sistema de transporte sem perdas.

Fácil identificação devido às etiquetas e tampas com código de cores

As tampas e as etiquetas correspondem ao código de cor internacional, de acordo com a ISO 6710.

Por serem transparentes, as etiquetas facilitam a inspeção visual da amostra. E, para fácil identificação, mesmo quando destampados, a inscrição da marca é da cor da tampa.

Volume de sangue reduzido e ampla variedade de análises

Quando a coleta de sangue venoso não for possível, as amostras de sangue podem ser obtidas por coleta capilar.

Em crianças e pacientes que necessitam de coletas frequentes, é essencial que o volume de sangue coletado seja minimizado para evitar a espoliação.

NOTA: O tubo de Coagulação **MiniCollect**[®] exige sangue venoso, não sendo indicado para coleta de sangue capilar.

Um tubo - dois volumes de preenchimento

Os tubos de EDTA e de Sorologia possuem duas marcas de preenchimento, tornando a coleta de amostras ainda mais simples e permitindo maior flexibilidade de utilização.



Eficiência e praticidade

Devido ao funil integrado, acessórios e capilares tornam-se obsoletos, aumentando a eficácia em comparação aos sistemas convencionais de coleta de sangue capilar, além de contribuir para um gerenciamento e planejamento de estoque mais prático, dada a ausência de acessórios.

Como realizar o Procedimento de Coleta



1 Recomenda-se aquecer o local da punção e, logo após, realizar antissepsia do local.



2 Na tampa do **MiniCollect®** existe um triângulo que indica a posição oposta do funil. Para abrir o tubo, basta pressionar o triângulo suavemente para cima.



3 Posicione a Lanceta de Segurança (a) ou a Lanceta de Segurança Lancelino (b) sobre a epiderme e realize a punção.




4 Pressione suavemente o tecido ao redor e descarte a primeira gota de sangue.



5 A gota de sangue deve fluir facilmente do funil para a parede do tubo. O local da punção deve ser mantido em uma posição descendente.



6 Feche o tubo com a tampa original até ouvir um “click” indicando o fechamento correto.

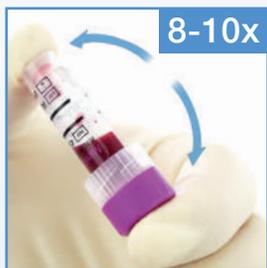

7 Após a coleta, realize a homogeneização das amostras por inversão, de 8 a 10 vezes.



8 Aplique compressão no local da punção.

Tubo de Coagulação MiniCollect®

Indicado apenas para uso com sangue venoso.



1 Remova a tampa do tubo.

Transfira o sangue venoso para o tubo.

2



3 Feche o tubo com a tampa original.

Imediatamente após a transferência, realize a homogeneização das amostras por inversão.

4



Lancetas de Segurança

As Lancetas de Segurança e Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® estão disponíveis com lâminas ou agulhas, em diversos calibres de profundidade e tamanhos, permitindo uma punção eficaz.

O mecanismo de segurança evita que a lâmina/agulha fique visível antes ou após a punção. Uma vez acionada a lanceta, ao final da punção, a lâmina/agulha é automaticamente retraída para dentro do dispositivo plástico com total segurança.



As Lancetas são codificadas por cores para facilitar a identificação da profundidade da punção e a aplicação.



Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® *

Lâmina: Amarela 2 mm

Agulhas: Verde Claro 1.2mm, Verde 2.4mm

Lavanda 1.5mm, Azul 1.8mm

Fácil ativação: posicione no local da punção e pressione (lanceta de segurança ativada por contato).

Design arredondado garante fácil manuseio.



Lancetas de Segurança **MiniCollect**® *

Lâminas: Rosa 1mm, Verde 1.5mm, Azul 2mm

Agulhas: Lavanda 1.25mm, Laranja 2.25mm

É ativada pressionando o botão em direção ao local da punção.

Posição padronizada da lâmina/agulha para o direcionamento eficaz da punção.

Disponível também para punção no calcanhar.

* verificar disponibilidade

Your **Power** for Health


greiner bio-one

Áustria (Matriz)

Greiner Bio-One GmbH
Fone +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-Mail office@at.gbo.com

Para mais informações, visite nosso *website*
www.gbo.com ou entre em contato:

Brasil

Greiner Bio-One Brasil
Fone +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-Mail info@br.gbo.com

Hungria

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Fone +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

Holanda

Greiner Bio-One B.V.
Fone +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Tailândia

Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Fone +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail office@th.gbo.com

China

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Fone +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

Índia

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Fone +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Portugal

VACUETTE Portugal S.A.
Fone +351 252 647 721
Fax +351 252 647 722
E-Mail info@vacuette.pt

Turquia

Greiner Bio-One Turkey
Fone +90 216 576 6004
Fax +90 216 576 6005
E-Mail office@tr.gbo.com

França

Greiner Bio-One SAS
Fone +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-Mail office@fr.gbo.com

Itália

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Fone +39 02 9438 3340
Fax +39 02 9438 3366
E-Mail office@it.gbo.com

Espanha

VACUETTE España S.A.
Fone +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

Reino Unido

Greiner Bio-One Ltd.
Fone +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Alemanha

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Fone +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

Japão

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Fone +81 3 3505 8875
Fax +81 3 3505 8945
E-Mail info@jp.gbo.com

Suíça

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Fone +41 7 12 28 55 22
Fax +41 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Estados Unidos

Greiner Bio-One North America Inc.
Fone +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-Mail info@us.gbo.com