

making a difference

HASSAS BİR DOKUNUŞ

Güvenlikte bir sonraki adım.

VACUETTE® EVOPROTECT

GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti




greiner
BIO-ONE

VACUETTE® EVOPROTECT

GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti


EVOPROTECT, kan almada bir sonraki adımdır. Yarı otomatik kilitleme mekanizması, kullanıcıyı iğne batması yaralanmaları riskinden korur ve rutin kan alma işini kolaylaştırır. **VACUETTE®** EVOPROTECT, hassas şekilde kan almayı ve yaralanmalara karşı güvenlik sağlar. Çünkü inanıyoruz ki; her bir iğne-batması yaralanması aslında çoktur.

Güvenlikli kan alma seti, mevcut güvenlik önerilerini ve gereksinimlerini karşılar ve aynı setle güvenli kan alma ve infüzyonu için önemli destek sağlar.

Gelişmiş tasarımlı Kullanıcı-Dostu cihaz

VACUETTE® EVOPROTECT ergonomik ve kolay kullanımlı olarak tasarlanmıştır. Tek elle kullanım için özel olarak geliştirilmiş kanatlı iğneye sahiptir. İğne hala damar içindeyken güvenlik mekanizmasının devreye girmesi ile olası iğne batma yaralanmaları en aza indirilir.

VACUETTE® EVOPROTECT, aynı setle kan alma ve onu takip eden infüzyon işlemleri için uygundur.

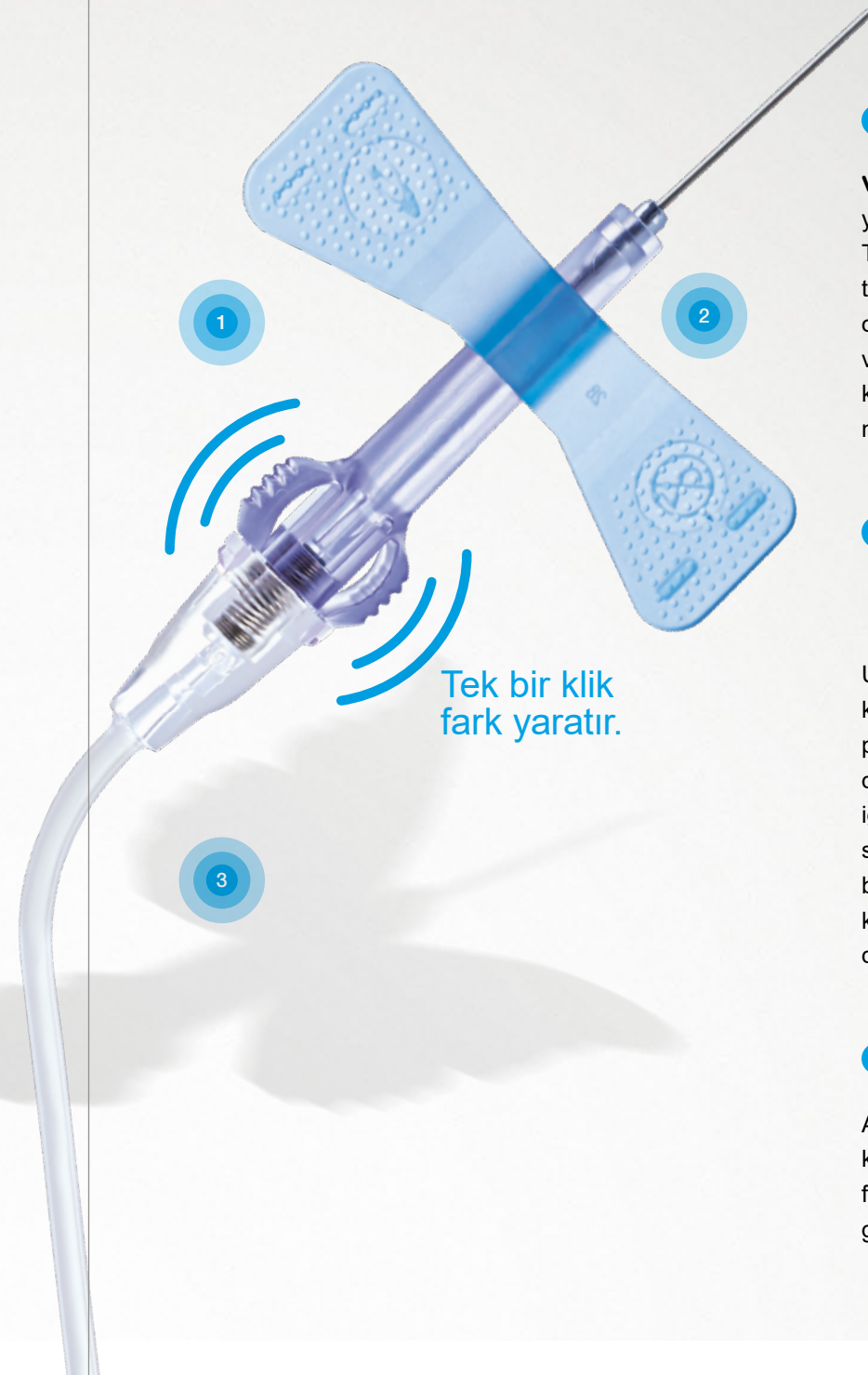

1 MAKSİMUM GÜVENLİK

VACUETTE® EVOPROTECT Güvenli Kan Alma Seti, yarı otomatik bir güvenlik mekanizmasına sahiptir. Tetikleyici butonlar, ürünün yan tarafında bulunur ve tek elle aktifleştirmeyi kolaylaştırır. İğne daha sonra otomatik olarak geri çekilir ve aynı zamanda güvenli ve geri döndürülemez bir şekilde güvenlik kılıfına kapatılır. Net şekilde duyulan klik sesi, güvenlik mekanizmasının başarıyla aktifleştirildiğini doğrular.

2 HASTA KONFORU DÜŞÜNÜLEREK TASARLANMIŞTIR

Ultra keskin, üç kesitli iğne ucu, optimum hasta konforu sağlar. İğne ve hortum arasındaki bir görüş penceresi, damara girişimin başarılı olduğuna dair anında görsel bir gösterge sağlar. Hortum, iğnenin damarda olabildiğince hareketsiz kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Cihazın yan tarafında bulunan güvenlik mekanizması tetikleyici butonlarının konumu, aktivasyon sırasında iğnenin hastanın damarında hareket etme riskini en aza indirir.

3 ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Aynı cihaz, kan almak ve hemen ardından bir sonraki infüzyon işlemi için kullanılabilir. Kan alma ve infüzyon için aynı setin kullanılması ikinci bir girişime gerek olmadığı anlamına gelir.

DÖRT ADIMDA HASSAS BİR DOKUNUŞ

KELEBEK SETİN KANAT YAPISI

Kanatların yapısı ve yüzey tasarımı, girişim sırasında kolay, güvenli bir tutuş ve optimum kavrama sağlar.

GÜVENLİK MEKANİZMASI


Güvenlik mekanizması hastanın damarındayken aktifleştirilir ve kullanıcıya daha da yüksek bir güvenlik seviyesi sunar. Güvenlik mekanizmasının tasarımı, iğnenin damardan düz bir şekilde çıkarılmasını destekler, bu nedenle daha fazla hasta konforu sunar.

HORTUM YAPISI

Hortum, minimum hafıza etkisi ile oldukça esnek.


İĞNE YAPISI

21G ve 23G iğnelerinin ekstra-ince duvarlı yapıları, akış hızı ve dolayısıyla kan alma/infüzyon süresi üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahiptir.

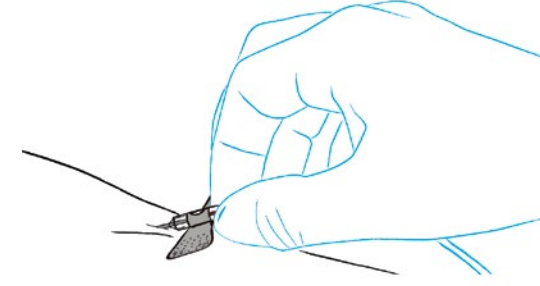

ADIM 2

Kurumunuzun prosedürüne göre kan alımı yapınız. Tamamlandıktan sonra gazlı bezi kan alımı yapılan yerin üzerine baskı uygulamadan yerleştirin.

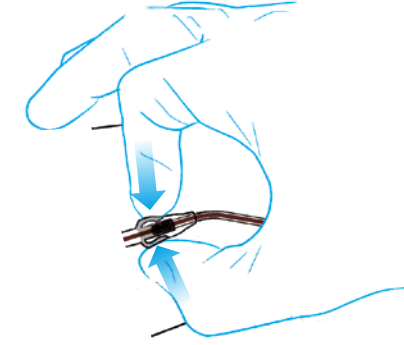


ADIM 4

Güvenlik mekanizması, net bir klik sesi duyulana kadar otomatik olarak geriye doğru kayar. Klik sesi, güvenlik mekanizmasının doğru şekilde aktifleştirildiğinin bir işaretidir. Cihazı kurum prosedürüne göre kesici-delici atık kabına atın.


ADIM 1

Damar girişim yapın (hastanın kolu aşağı konumdayken). Kanın pencerede görülmesi, hastanın venöz basıncına bağlı olarak başarılı damar girişimini doğrulamaktadır.

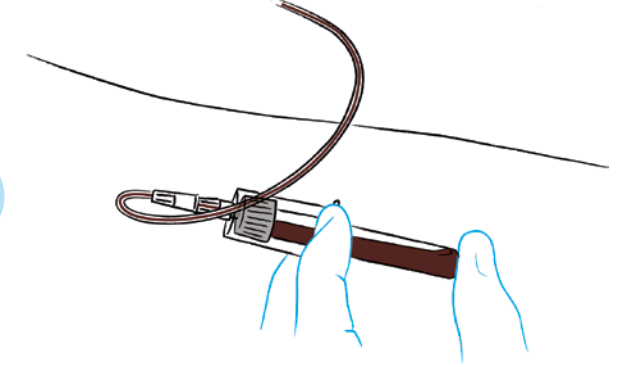

ADIM 3

Ürün damar- içi aktivasyon için tasarlanmıştır. Bir elinizle mavi renkli serbest bırakma butonlarına basarak güvenlik mekanizmasını aktifleştirin. Otomatik geri çekilmeyi engellemeye dikkat edin.

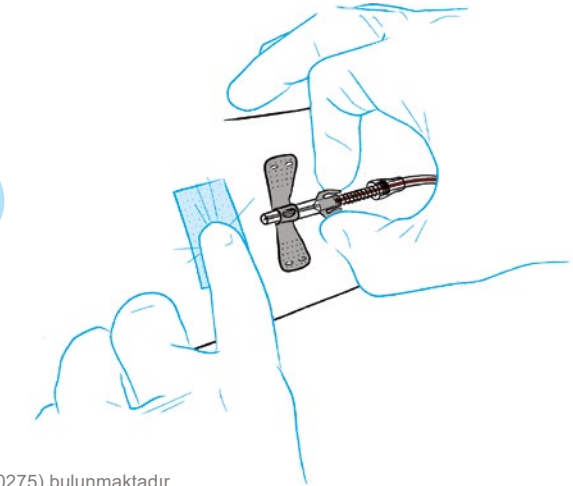



GÜVENLİKLİ Kan Alma/İnfüzyon Seti




GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör



GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti +Tüp Tutucusu

Luer adaptörü, **VACUETTE®** EVOPROTECT'i tüp tutucusu gibi uyumlu kan alma aksesuarlarıyla bağlantı sağlamak için kullanılır. **VACUETTE®** EVOPROTECT'i alternatif olarak kısa-süreli infüzyon amaçlı kullanmak için adaptör çıkarılabilir.

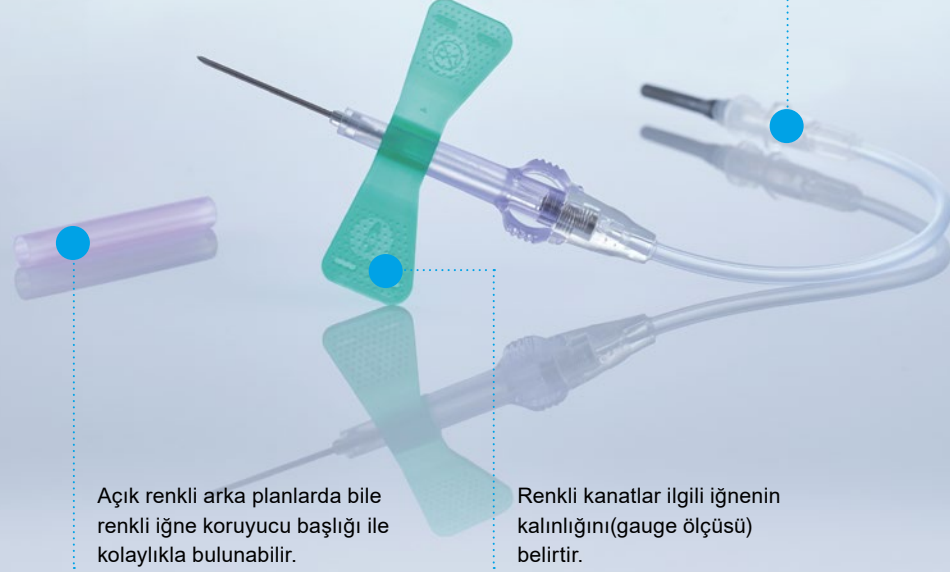

Açık renkli arka planlarda bile renkli iğne koruyucu başlığı ile kolaylıkla bulunabilir.

Renkli kanatlar ilgili iğnenin kalınlığını(gauge ölçüsü) belirtir.

SAKLAMA

4-25°C

(güneş ışığına maruz bırakmayınız)

RAF ÖMRÜ

36 ay

(üretim gününden itibaren)

AMBALAJ

tekli-paketli ve steril

KOLAY-KULLAN AT

VACUETTE® EVOPROTECT Güvenli Kan Alma Seti ambalajı tek bir malzeme kullanılarak üretilmiştir. Bu nedenle kağıt ve plastik ayrımına gerek olmadan ürün atığa atılabilir. Yumuşak poşetli ambalajın sıkıştırılması kolaydır, böylece atık hacmi ve miktarı da azalır.

ÜRÜNE BAKIŞ

KATALOG NO	ÜRÜN AÇIKLAMASI	İĞNE KALINLIĞI	İĞNE UZUNLUĞU	HORTUM UZUNLUĞU	İÇ AMBALAJ (ADET)	DIŞ AMBALAJ (ADET)
------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma / İnfüzyon Seti

450120	VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma / İnfüzyon Seti	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	7 1/2" 19cm	60	1080
450121	VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma / İnfüzyon Seti	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	7 1/2" 19cm	60	1080

VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör

450127	VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	7 1/2" 19cm	60	1080
450128	VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	60	1080
450129	VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	7 1/2" 19cm	60	1080
450130	VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	60	1080
450132	VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör	25G (0.50mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	60	1080

VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Tüp Tutucusu

450122	VACUETTE® EVOPROTECT EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Tüp Tutucusu	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	7 1/2" 19cm	30	540
450123	VACUETTE® EVOPROTECT EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Tüp Tutucusu	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	30	540
450125	VACUETTE® EVOPROTECT EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Tüp Tutucusu	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	7 1/2" 19cm	30	540
450126	VACUETTE® EVOPROTECT EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Tüp Tutucusu	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	30	540

Bu ürünler doğal kauçuk lateks veya DEHP ile üretilmemiştir.

Austria (Main Office)

Greiner Bio-One GmbH
Phone +43 7583 6791-0
E-Mail office@at.gbo.com

Brazil

Greiner Bio-One Brasil
Phone +55 19 3468-9600
E-Mail office@br.gbo.com

China

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Phone +86 10 83 55 19 91
E-Mail office@cn.gbo.com

France

Greiner Bio-One SAS
Phone +33 1 69 86 25 25
E-Mail accueil@gbo.com

Germany

Greiner Bio-One GmbH/
Preanalytics
Phone +49 7022 948-0
E-Mail office@de.gbo.com

Hungary

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Phone +36 96 213 088
E-Mail office@hu.gbo.com

India

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Phone +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Indonesia

Greiner Bio One Indonesia KPPA
Phone +62 812 1391 3900
E-Mail office@id.gbo.com

Italy

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Phone +39 02 9438 3340
E-Mail office@it.gbo.com

Japan

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Phone +81 3 3505 8875
E-Mail info@jp.gbo.com

Netherlands

Greiner Bio-One B.V.
Phone +31 172 4209 00
E-Mail info@nl.gbo.com

Portugal

VACUETTE Portugal S.A.
Phone +351 252 647 721
E-Mail info@vacuette.pt

Spain

Greiner Bio One España, S.A.U.
Phone +34 91 652 77 07
E-Mail info@es.gbo.com

Switzerland

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Phone +41 7 12 28 55 22
E-Mail office@ch.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Phone +66 38 4656 33
E-Mail office@th.gbo.com

Turkey

Greiner Bio-One Turkey
Phone +90 216 576 6004
E-Mail office@tr.gbo.com

United Kingdom

Greiner Bio-One Ltd.
Phone +44 1453 8252 55
E-Mail info@uk.gbo.com

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Phone +1 704 261-7800
E-Mail info@us.gbo.com