

Kullanım Amacı

MiniCollect® K2EDTA Tüpler, şu hematoloji parametreleri için kapiler kan numuneleri toplamak, taşımak, saklamak ve değerlendirmek için kullanılan vakumsuz kan alma cihazlarıdır: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, Trombositler, RDW, Lenfositler, Nötrofiller, Monositler, Eozinofiller ve Bazofiller.

Ürün Tanımı

MiniCollect® Tüpleri, entegre numune alma cihazına sahip plastik, vakumsuz, steril olmayan düşük numune hacimli tüplerdir. Tüp tipi ve belirtilen hacimlere bağlı olarak çeşitli yoğunluklarda mevcut katkı maddelerini tespit etmek için renk kodlu bir kapağa sahiptir.

MiniCollect® Tüplerin kapakları, kapak delme işlevlerine sahip otomatik cihazlar için delinebilir.

Tüp duvarının iç kısmı dipotasyum EDTA (K2EDTA) ile kaplıdır. EDTA kalsiyum iyonlarını bağlar ve böylece koagülasyon kaskadını bloke eder. Ürün, bu talimatlar uyarınca uygun eğitimi almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

Tüp Tipi	Matris	Kapak rengi
MiniCollect® K2E K2EDTA Tüpler	Kapiler kan	Mor

Ürün sürümleri

MiniCollect® Tüpler, isteğe bağlı 13x75 mm taşıyıcı tüplerle (renksiz, kehribar rengi)

MiniCollect® Komple Tüpler, 13x75 mm taşıyıcı tüpler önceden monte edilmiş

Kullanım öncesi saklama

Tüpleri 4-25°C'de (40-77°F) saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. *Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması tüp kalitesinin bozulmasına neden olabilir (yani renklenme, vb.)*

Numunenin Kararlılığı ve Saklanması

Sonuçlarda farklılıkları önlemek için, K2EDTA numunelerini analizden hemen önce yeniden karıştırın.

Doğru numune maddesi, doğru saklama yöntemi ve stabilite hakkında bilgi için cihazın tahlil kullanım talimatlarına veya literatüre bakın.

Önlemler/Dikkat Edilecek Konular

- Katkı maddesi bulunan tüplerde yetersiz veya geç karıştırma trombosit birikimine, pıhtılaşmaya ve/veya hatalı test sonuçlarına yol açabilir.
- Tüp içinde yabancı madde varsa tüpü kullanmayın.
- Tüm biyolojik numuneleri ve kan alma aletlerini tesisinizin ilke ve prosedürlerine göre kullanın.
- Biyolojik numunelere maruz kalmanız durumunda uygun tıbbi önlemleri alın.
- Tüpleri kullanmadan önce tüm tüplerin uygun ürün ve raf ömrü bilgilerini doğrulayın. Tüpleri son kullanma tarihlerinden sonra kullanmayın.
- Bir tüpten diğerine yapılan bir değişikliğin hasta numunelerinden alınan analiz sonuçlarını önemli oranda etkilemediğinin doğrulanması nihai olarak laboratuvarın sorumluluğundadır.
- Tek kullanımlıdır.
- Kontaminasyonu veya sızıntıyı önlemek için, tüpleri kapatmadan önce üst tüp kenarındaki kepçenin etrafındaki girintide kan olmadığından emin olun. Girintide kan olması durumunda tüpü kapatmadan önce temizlenmesi önerilir.

Sadece Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerlidir: Ürünle ilgili olarak herhangi bir ciddi olay meydana gelirse üreticiye ve kullanıcının/hastanın bulunduğu üye ülkedeki yetkili makama bildirilmelidir.

Numune Alma ve İşleme**Gerekli olan, ancak ürünle birlikte verilmeyen ekipmanlar**

- Numunelerin pozitif hasta tanımı için etiketler
- Kanla bulaşan patojenlere karşı koruma için eldiven ve uygun giysiler
- Alkollü bez
- Kuru gazlı bez
- Gereken kan hacmine ve gerçekleştirilecek teste/testlere bağlı olarak uygun olması durumunda ısıtma cihazı
- Yapışkanlı plaster veya bandaj
- Biyolojik tehlike atık konteyneri
- Güvenli lanset

Tavsiye Edilen Sıvı Çekme Sırası (CLSI GP42-A6 uyarınca)

EDTA numuneleri dahil olmak üzere birden fazla numunenin alınacak olması durumunda, yeterli miktar ve doğru hematoloji testi sonuçları elde etmek için önce EDTA numunesi alınır. Ardından başka katkı maddeleri içeren numuneler ve son olarak serum numuneleri alınır.

- EDTA
- Heparin / Heparin Ayırıcı
- Glikolitik inhibitör tüpleri
- Serum/Serum Ayırıcı

Kapağın Çıkarılması

Tüpün çevresindeki tırtıklı alan, kapağı açma yerini gösterir. Kapak üzerine hafifçe bastırarak, kapağı yukarı yönde çıkarın. Üçgen gösterge, toplama kepçesinin karşısında kalır.

Numune Alma

Deri delme yöntemiyle kan almak için lütfen kullanılan lanset cihazının kullanım talimatlarını inceleyin.

Derinin delinen bölgesinin aşağı doğru tutulmasıyla, derideki delikten kan akışı hızlandırılır. Aşırı miktarda doku sıvısı içerebileceğinden, test yöntemi için uygun olması durumunda ilk kan damlasının gazlı bezle silinmesi gerekir. Çevredeki dokuya (veya parmak kullanılması durumunda delinen bölgenin yakınına) hafif, aralıklı baskı uygulayın. Üst üste kuvvetli baskı (sağma) uygulanmamalıdır. Aksi takdirde, numunede hemoliz meydana gelebilir veya numuneye doku sıvısı karışabilir ve bu da test sonuçlarını olumsuz etkiler.

Kan damlalarının tüpün içine ve **MiniCollect®** Tüpünün duvarlarından aşağı serbestçe akması sağlanmalıdır. Kapağın içinde damla kalması durumunda veya numune alımı sırasında içeriği karıştırmak için tüpü sert bir yüzeye hafifçe vurun. Tüpü çalkalamayın ve parmağınızla açık tüpe vurmayın. Tüpleri doğru şekilde doldurmak için dolun işaretine dikkat edin. Kan aldıktan sonra, tüpü orijinal kapağıyla kapatın. Kapağın doğru bir biçimde kapandığını gösteren bir tıklama sesi duyulacaktır. Kan katkı maddesiyle tamamen karışana kadar (yaklaşık 8-10 kez) ters çevirin. Kuvvetli bir şekilde çalkalama hareketi, köpürmeye ya da hemolize neden olabilir. Numune alma sırasında hasta pozitif tanımlanmalı ve hastanın kan numunesi doğru etiketlenmelidir. Numune, alma ve karıştırma sonrasında hemen etiketlenmelidir.

Atma



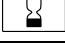

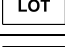
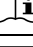
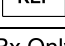
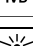
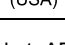

- Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır.
- Kanı alırken ve atarken mutlaka eldiven giyin.
- Kontamine olmuş ya da dolu kan alma tüpleri, daha sonra otoklavlanarak yakılacak olan uygun biyolojik tehlike atık konteynerlerine atılmalıdır.

Sınırlamalar

Test şu cihazda gerçekleştirildi: Sysmex XE-5000™ (sadece manuel aspirasyon modunda), Beckman Coulter DxH 800 ve Abbott CELL-DYN Sapphire.

NOT: Ayrıntılı performans verileri için lütfen www.gbo.com adresinden Resmî Raporlara/Klinik Belgelere bakın.


Etiket Bilgileri

	Üretici		Sıcaklık limiti
	Son kullanım tarihi		Yeniden kullanmayın
	Parti kodu		Kullanım talimatlarına başvurun
	Katalog numarası		İn vitro tıbbi tanı cihazı
	Bu cihaz reçete ile verilir (ABD)		Güneş ışığından uzak tutunuz

Dikkat: ABD Federal Yasaları, bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından veya bir hekimin talimatı üzerine satılmasına izin verir.

Literatür:

CLSI. *Kapiller Kan Numunelerinin Alınması*. 7. baskı CLSI standardı GP42. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü; 2020.

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

Ek - Son revizyondan bu yana yapılan değişikliklerin kaydı

Belgedeki konumu

Önlemler/Dikkat Edilecek Konular
Önlemler/Dikkat Edilecek Konular
Etiket Bilgileri
Etiket Bilgileri
Literatür

Değişiklik açıklaması

Tüpün kepçesinin etrafındaki girintideki kanla ilgili bir önlem eklendi.
Avrupa Birliği'nde ciddi olayların raporlanmasına ilişkin bir not eklendi.
Yalnızca Rx sembolü Yalnızca Rx'e (ABD) uyarlandı ve ürünü reçeteli cihaz olarak gösteren bir uyarının eklendi.
Güneş ışığından uzak tutun sembolü eklendi.
CLSI referansı güncellendi.