

Tiltenkt bruk

MiniCollect® sikkerhetslansetter er utviklet for bruk i daglig prøvetaking av kapillærblod når denne oppgaven delegeres av kvalifisert helsepersonell. Nålene er kun beregnet til engangsbruk og skal kun brukes av helsepersonell med tilstrekkelig opplæring i samsvar med disse instruksjonene.

Produktbeskrivelse

MiniCollect® sikkerhetslansetter er sterile, knappaktiverede enheter til engangsbruk for hudpunksjon, noe som gir kontrollert snittlengde og -dybde. Enheten består av en nål / et blad av rustfritt stål i et plasthus, og den trekkes automatisk og permanent tilbake etter punksjon.

Forholdsregler/forsiktighetsregler

- Se institusjonens retningslinjer og rutiner med hensyn til håndtering av **MiniCollect®** sikkerhetslansetter.
- HBV, HCV, HIV og andre smittsomme sykdommer kan overføres gjennom kontakt med biologiske prøver. Ved eksponering for biologiske prøver må det gis egnet medisinsk hjelp.
- Kast alle **MiniCollect®** sikkerhetslansetter i godkjente beholdere for biologisk avfall.
- Bruk engangshansker under hudpunksjon og ved håndtering av blodprøverør for å redusere eksponeringsfaren.
- Ikke bruk **MiniCollect®** sikkerhetslansetter etter utløpsdatoen.
- Beskyttelseshetten er et enkelt sterilt barriersystem. Må ikke brukes hvis beskyttelsesfliken er skadet eller fjernet utilsiktet.
- **MiniCollect®** sikkerhetslansetter må ikke gjenbrukes. Gjentatt bruk av produktet kan føre til skadelige infeksjoner eller annen skade.
- Lansetter med en punksjonsdybde over 2 mm anbefales ikke til bruk på barn under ett år.
- Gjelder kun for EU-land: Skulle det oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den relevante myndigheten i landet der brukeren/pasienten holder til.
- Gjelder kun Saudi-Arabia: Hvis det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, skal disse rapporteres til produsenten og Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

Oppbevaring

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 4-36 °C (40-97 °F). Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte eller sterk varme.
OBS: Må ikke utsettes for direkte sollys.

Håndtering


LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU UTFØRER HUDPUNKSJON

Nødvendig utstyr for prøvetaking.

Pass på at følgende materialer er lett tilgjengelig før du utfører hudpunksjon:

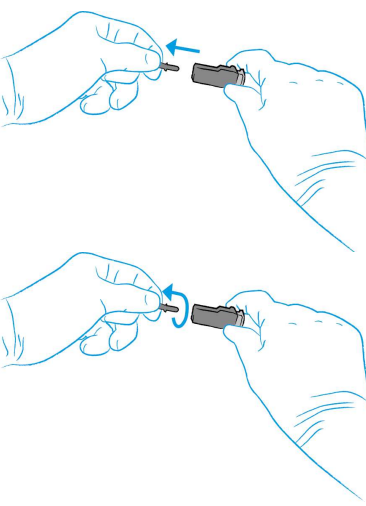
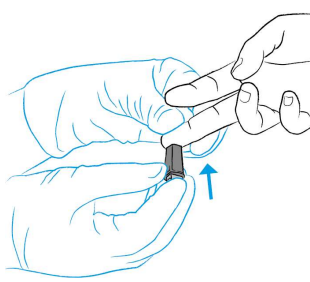
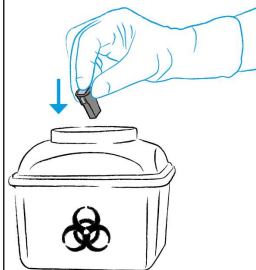
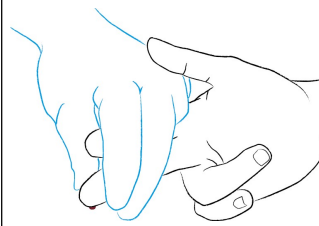
- Alle nødvendige **MiniCollect®** -rør, identifisert i forhold til størrelse, trekkvolum og additiv eller andre nødvendige prøvetakingsbeholdere. **OBS:** **MiniCollect®** 9NC Coagulation brukes kun til venøs blodprøvetaking.
- Engangshansker og personlig verneutstyr.
- Etiketter for positiv pasientidentifikasjon av prøver.
- Sprintserviett til rensing.
- Selvklebende plaster eller bandasje.
- Beholder for kassering av skarpt utstyr for sikker kassering av brukte materialer.

MiniCollect® sikkerhetslansettversjonen skal velges ut fra pasientens vevstykkelser og blodvolumet som skal tas.

MiniCollect® sikkerhetslansetter		
Farge	Størrelse/lengde på nål eller blad	Oppnåelig blodvolum
Lavendel (nål)	28 G / 1,25 mm	
Oransje (nål)	23 G / 2,25 mm	
Rosa (blad)	1,50 mm/1,00 mm	
Grønn (blad)	1,50 mm/1,50 mm	
Blå (blad)	1,50 mm/2,00 mm	

Et varmt, fuktig håndkle (eller andre oppvarmingsanordninger) ved en temperatur på maks. 42 °C (108 °F) kan anvendes for å tildekke området i 3 til 5 minutter.

1 Klargjør punksjonsstedet med et egnet antiseptisk middel. Etter rensing av hudpunksjonsstedet lufttørkes området, slik at den antiseptiske virkningen av alkoholen kan gjøre seg gjeldende. Resterende alkohol forårsaker hurtig hemolyse, kan ha negative effekter på testresultatene og vil føre til ubehag (sviing) hos pasienten.

			
<p>2 Hold lansetten godt fast mellom fingrene, og fjern beskyttelsestappen ved å trekke (blad) eller vri (nål).</p>	<p>3 Hold punksjonsstedet støtt for å unngå plutselige bevegelser, og plasser lansetten over det. Trykk deretter forsiktig på knappen for å aktivere lansetten.</p> <p>OBS: Ikke trykk på punksjonsstedet mens MiniCollect® sikkerhetslansett aktiveres.</p>	<p>4 Fjern lansetten umiddelbart etter punksjon i en oppadgående bevegelse. Kast den i en egnet beholder for skarpe gjenstander.</p>	<p>5 Det anbefales å tørke bort den første blodråpen med en kompress, ettersom den første dråpen sannsynligvis inneholder overskytende vevsvæske. Trykk forsiktig flere ganger mot det omkringliggende vevet. Kraftig, gjentatt trykk («melking») må unngås, da begge prosedyrer kan føre til hemolyse eller at vevsvæske forurenses prøven.</p>


OBS: Bruk om nødvendig disse instruksjonene sammen med bruksanvisningen for MiniCollect® kapillærblodprøvetakingsrør.

Etikettinformasjon

	Produsent		Sterilisert ved stråling		Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende utvendig emballasje
	Utløpsdato		Må ikke brukes på nytt		Medisinsk utstyr
	Batchkode		Se bruksanvisningen		Beskyttes mot sollys
	Katalognummer		Produksjonsdato		Autorisert representant i Sveits
	Temperaturgrense		Forsiktig		

Litteratur:


CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Østerrike

Produksjonssted:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japan
Produsert i Japan

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tlf.: +43 7583 6791

Distribuert av Greiner Bio-One GmbH, Østerrike

 Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen
Sveits