

### Indicação de Uso

As Lancetas de Segurança **MiniCollect®** são projetadas para uso na rotina diária de coleta de sangue capilar quando realizada por profissional qualificado. São de uso único e devem ser utilizadas apenas por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com as instruções de uso.

### Descrição do Produto

As Lancetas de Segurança **MiniCollect®** são dispositivos ativados por botão, são estéreis, de uso único para punção cutânea, permitindo o controle do comprimento e da profundidade da incisão. O dispositivo consiste em uma agulha/lâmina de aço inoxidável em um invólucro de plástico e se retrai automaticamente e permanentemente após a punção.

### Cuidados/Precauções

- Consulte as políticas e procedimentos da instituição com relação ao manuseio das Lancetas de Segurança **MiniCollect®**.
- HBV, HCV, HIV e outras doenças infecciosas podem ser transmitidas através do contato com amostras biológicas. No caso de exposição a amostras biológicas, seguir o protocolo da instituição.
- Descartar todas as Lancetas de Segurança **MiniCollect®** em recipientes apropriados para descarte de materiais perfurocortantes.
- Use luvas descartáveis durante a punção cutânea e ao manusear tubos para coleta de sangue, para minimizar os riscos de exposição.
- Não utilizar as Lancetas de Segurança **MiniCollect®** após a data de validade.
- A tampa de proteção é um sistema de barreira estéril única. Não utilize se a aba de proteção tiver sido danificada ou removida acidentalmente.
- Não reutilize as Lancetas de Segurança **MiniCollect®**. A reutilização do produto pode causar infecções ou ferimentos.
- Lancetas com profundidade de punção superior a 2 mm não são recomendadas para uso em crianças com menos de um ano de idade.
- Aplicável apenas a Estados-Membros da União Europeia: Caso ocorram incidentes graves relacionados ao produto, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade nacional responsável do Estado-Membro em que o usuário/paciente está estabelecido.
- Aplicável apenas à Arábia Saudita: Caso ocorram incidentes graves relacionados ao produto, estes devem ser relatados ao fabricante e à Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (SFDA).

### Armazenamento

Temperatura de armazenamento recomendada: 4-36 °C (40-97 °F). Armazene em local seco, longe de calor direto ou excessivo.

**NOTA:** Evitar a exposição direta à luz solar.

### Manuseio

LEIA TODO ESTE DOCUMENTO ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO CUTÂNEA

#### Materiais Necessários para Coleta da Amostra.

Certifique-se de que os seguintes materiais estejam prontamente acessíveis antes de realizar a punção cutânea:


- Todos os tubos **MiniCollect®** necessários, identificados por tamanho, volume de aspiração e aditivo ou outros recipientes de coleta necessários. **NOTA:** Os Tubos para Coagulação 9NC **MiniCollect®** são utilizados apenas para coleta de sangue venoso.
- Luvas descartáveis e equipamento de proteção individual.
- Etiquetas para identificação das amostras do paciente.
- Material para antisepsia do local da punção venosa conforme protocolo da instituição.
- Curativo.
- Recipiente adequado para descarte de materiais perfurocortantes.

A versão da Lanceta de Segurança **MiniCollect®** deve ser selecionada com base na espessura do tecido do paciente e no volume de sangue necessário.

Lancetas de Segurança <b>MiniCollect®</b>		
Cor	Tamanho da agulha ou lâmina / comprimento	Volume de sangue alcançável
Roxa (agulha)	28G / 1,25 mm	
Laranja (agulha)	23G / 2,25 mm	
Rosa (lâmina)	1,50 mm / 1,00 mm	
Verde (lâmina)	1,50 mm / 1,50 mm	
Azul (lâmina)	1,50 mm / 2,00 mm	

Uma toalha morna e úmida (ou outros dispositivos de aquecimento) a uma temperatura não superior a 42 °C (108 °F) pode ser usada para cobrir o local por 3 a 5 minutos.

**1** Prepare o local da punção com antisséptico adequado. Após a antissepsia, aguarde até que a área seque adequadamente, para que o antisséptico tenha o efeito desejado. Resíduos do antisséptico podem causar hemólise da amostra, resultados de testes imprecisos e desconforto (ardência) ao paciente.

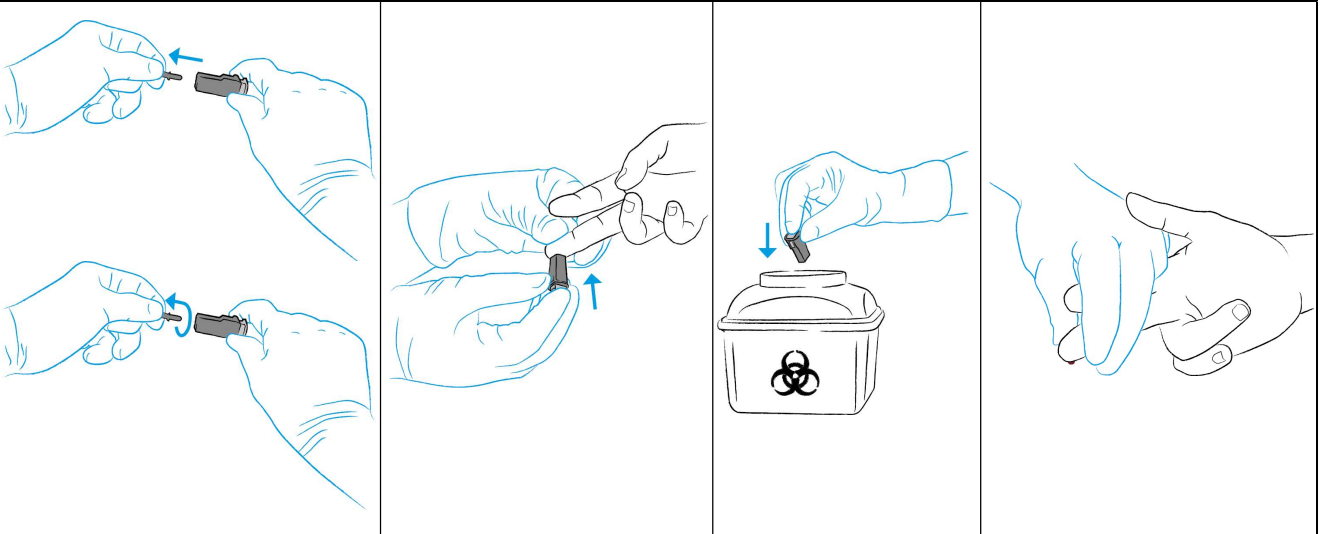

**2** Segure a lanceta firmemente entre os dedos e remova a aba de proteção puxando (lâmina) ou girando (agulha).

**3** Segure o local da punção com firmeza para evitar movimentos repentinos, e posicione a lanceta no local selecionado. Em seguida, pressione suavemente o botão para ativar a lanceta.

**NOTA:** Não exerça pressão no local da punção ao ativar a Lanceta de Segurança MiniCollect®.

**4** Imediatamente após a punção, remova a lanceta com um movimento para cima e descarte-a em um recipiente apropriado para descarte de materiais perfurocortantes.

**5** Recomenda-se limpar a primeira gota de sangue com uma compressa de gaze, pois essa primeira gota provavelmente contém excesso de fluido tecidual. Aplique suavemente pressão intermitente no tecido circundante. Pressão forte e repetitiva (ordenha) **deve** ser evitada, pois pode resultar em hemólise ou contaminação da amostra com fluido tecidual.

**NOTA:** Utilize estas instruções em conjunto com as Instruções de Uso do Tubo para Coleta de Sangue Capilar MiniCollect®, se necessário.

### Informações da Etiqueta

	Fabricante		Esterilizado por irradiação		Sistema de barreira estéril única com embalagem de proteção externa
	Prazo de validade		Não reutilizar		Dispositivo médico
	Número de lote		Consultar as Instruções de Uso		Manter protegido da luz solar
	Número do item		Data de fabricação		Representante autorizado na Suíça
	Limite de temperatura		Cuidados		

#### Literatura:

CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7<sup>th</sup> ed. CLSI standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.

Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Áustria

Local de produção:  
ASAHI Polyslider Company, Limited  
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,  
719-3226 Japão  
Fabricado no Japão

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Telefone: +43 7583 6791

Distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria

Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH  
St. Leonhardstraße 39  
9000 St. Gallen  
Suíça

**Importador e Distribuidor:**

Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  
Av. Affonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP.13.473-620 - Americana - SP  
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601  
CNPJ 71.957.310 / 0001-47 – site: [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**Produto de Uso Médico**

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

**ANVISA / MS 10290319004**

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: [suporte@gbo.com](mailto:suporte@gbo.com)