

Účel použitia

Bezpečnostné lancety **MiniCollect®** sú určené na denné odbery kapilárnej krvi na príkaz kvalifikovaného lekára. Sú určené len na jedno použitie a smie ich používať len vhodne zaškolený zdravotnícky personál v súlade s týmto návodom.

Popis produktu

Bezpečnostné lancety **MiniCollect®** sú sterilné, jednorazové, tlačidlom aktivované pomôcky na prepichnutie kože, ktoré umožňujú regulovať dĺžku a hĺbku rezu. Pomôcku tvorí ihla/čepeľ z nehrdzavejúcej ocele v plastovom kryte, ktorá sa po vpichu automaticky a natrvalo zatiahne.

Bezpečnostné opatrenia/upozornenia

- Pri manipulácii s bezpečnostnými lancetami **MiniCollect®** sa riadte zásadami a postupmi svojho zariadenia.
- Kontaktom s biologickými vzorkami sa môžu prenášať HBV, HCV, HIV a iné infekčné choroby. V prípade vystavenia biologickým vzorkám zabezpečte vhodnú lekársku pomoc.
- Všetky bezpečnostné lancety **MiniCollect®** zlikvidujte v nádobách na biologicky nebezpečný odpad schválených na likvidáciu lanciet.
- Pri prepichovaní kože a manipulácii so skúmavkami s krvou používajte jednorazové rukavice, aby sa minimalizovalo riziko expozície.
- Nepoužívajte bezpečnostné lancety **MiniCollect®** po dátume expirácie.
- Ochranný uzáver je systém jednej sterilnej bariéry. Nepoužívajte, ak je ochranné viečko poškodené alebo neúmyselne odstránené.
- Bezpečnostné lancety **MiniCollect®** nepoužívajte opakovane. Opakované použitie produktu môže spôsobiť škodlivé infekcie alebo poranenie.
- Lancety s hĺbkou vpichu viac ako 2 mm sa neodporúčajú na použitie u detí do 1 roku veku.
- Platí len pre členské štáty Európskej únie: Ak by sa v súvislosti s výrobkom vyskytli akékoľvek závažné udalosti, musia sa nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom používateľ alebo pacient žije.
- Platí len pre Saudskú Arábiu: Ak by sa v súvislosti s výrobkom vyskytli akékoľvek závažné udalosti, musia sa nahlásiť výrobcovi a saudskému úradu pre potraviny a lieky (SFDA).

Skladovanie

Odporúčaná teplota skladovania: 4 – 36 °C (40 – 97 °F). Skladujte na suchom mieste mimo priameho alebo nadmerného tepla.
POZNÁMKA: *Chráňte pred priamym slnečným svetlom.*

Manipulácia


PRED VPICHOM DO KOŽE SI PREČÍTAJTE CELÝ TENTO DOKUMENT

Materiál potrebný na odber vzorky:

Pred vykonaním vpichu do kože skontrolujte, či máte poruke tieto materiály:


- Všetky potrebné skúmavky **MiniCollect®** označené podľa veľkosti, odberu a aditíva alebo iné potrebné odberné nádoby. **POZNÁMKA:** Koagulačné skúmavky **MiniCollect®** 9NC sa používajú len na odber žilovej krvi.
- jednorazové rukavice a osobné ochranné pomôcky;
- štítky na označenie vzoriek menom pacienta;
- alkoholové tampóny na očistenie miesta vpichu;
- náplasť alebo obväz;
- nádoba na likvidáciu ostrých predmetov na bezpečnú likvidáciu použitého materiálu.

Verziu bezpečnostnej lancety **MiniCollect®** vyberte podľa hrúbky tkaniva pacienta a požadovaného objemu krvi.

Bezpečnostné lancety MiniCollect®		
Farba	Veľkosť ihly alebo čepele / dĺžka	Dosiahnuteľný objem krvi
Fialová (ihla)	28G / 1,25 mm	
Oranžová (ihla)	23G / 2,25 mm	
Ružová (čepeľ)	1,50 mm / 1,00 mm	
Zelená (čepeľ)	1,50 mm / 1,50 mm	
Modrá (čepeľ)	1,50 mm / 2,00 mm	

Miesto odberu môžete na 3 až 5 minút prekryť teplým vlhkým uterákom (alebo inými pomôckami na zohriatie) s teplotou maximálne 42 °C (108 °F).

1 Miesto vpichu pripravte vhodným antiseptickým prostriedkom. Po očistení miesta prepichnutia kože nechajte oblasť prirodzene vyschnúť, aby mohol pôsobiť antiseptický účinok alkoholu. Zvyškový alkohol spôsobuje rýchlu hemolýzu, môže negatívne ovplyvniť výsledky vyšetrenia a pacientovi spôsobí diskomfort (štipanie).

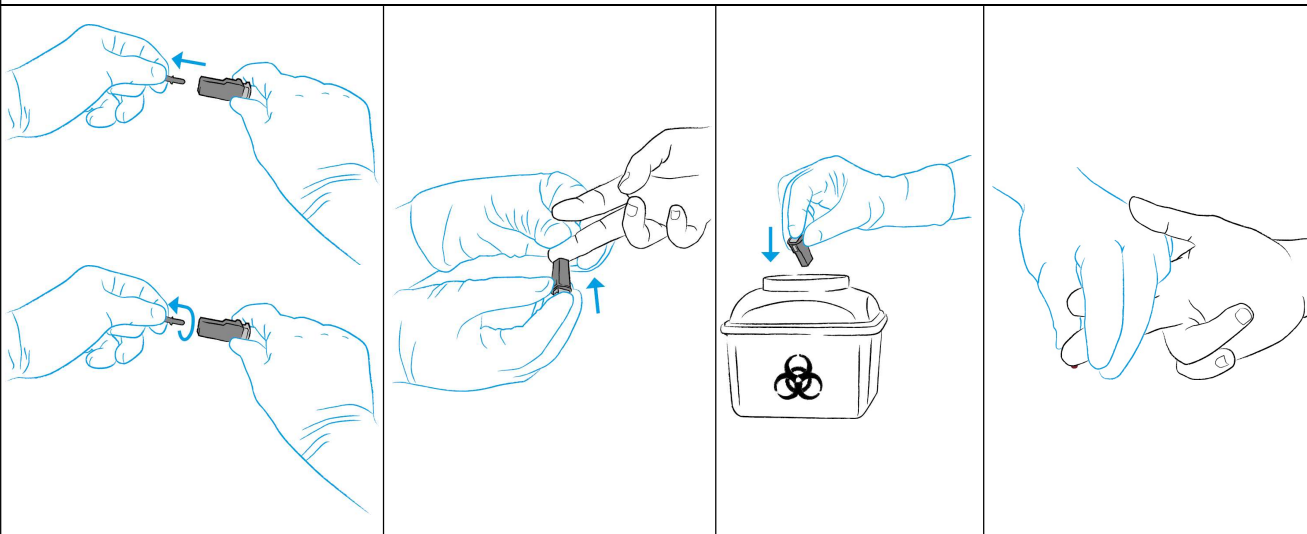

2 Lancetu pevne uchopte medzi prstami a potiahnutím (čepeľ) a otáčaním (ihla) odstráňte ochranné viečko.

3 Miesto vpichu pevne pridržte, aby nedošlo k náhlemu pohybu a lancetu priložte nad miesto vpichu. Následne jemným stlačením tlačidla aktivujte lancetu.

POZNÁMKA: Pri aktivácii bezpečnostnej lancety **MiniCollect®** nevyvíjajte tlak na miesto vpichu.

4 Lancetu okamžite po vpichu odstráňte pohybom nahor a zlikvidujte vo vhodnej nádobe na ostré predmety.

5 Odporúčame prvú kvapku krvi utrieť gázovým tampónom, pretože s najvyššou pravdepodobnosťou bude prvá kvapka obsahovať priveľa tkanivového moku. Na okolité tkanivo striedavo vyvíjajte tlak. Opakovanému tlaku (hnieteniu) sa **musí** zabrániť, pretože oba postupy môžu viesť k hemolýze alebo kontaminácii vzorky tkanivovým mokom.

POZNÁMKA: Tento návod v prípade potreby používajte spolu s návodom na použitie skúmavky na odber kapilárnej krvi **MiniCollect®**.

Údaje na štítku

	Výrobca		Sterilizované ožiarением		Systém jednej sterilnej bariéry s vonkajším ochranným balením
	Dátum použiteľnosti		Nepoužívajte opakovane		Zdravotnícka pomôcka
	Kód šarže		Pozrite si návod na použitie		Chráňte pred slnečným svetlom
	Katalógové číslo		Dátum výroby		Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku
	Teplotný limit		Upozornenie		

Literatúra:

CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremstünster
Rakúsko

Adresa výrobcu:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japonsko
Vyrobené v Japonsku

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tel. +43 7583 6791

Distribuuje spoločnosť Greiner Bio-One GmbH, Rakúsko



Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen
Švajčiarsko