

VACUETTE® Super-T

Jednorázové škrtidlo
Návod k použití

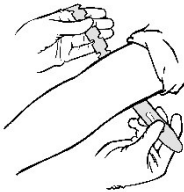
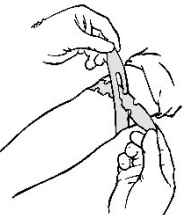

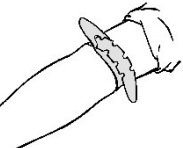
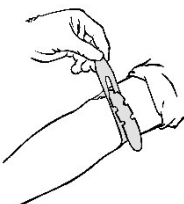
Použití

VACUETTE® Super-T se používá při rutinním odběru krve, kdy vyvíjí tlak na paži, aby se žíly více zvýraznily a byly lépe cítit a daly se snadněji najít. Výrobek je určen řádně vyškoleným zdravotnickým pracovníkům a smí být používán pouze v souladu s těmito pokyny.

Popis výrobku

VACUETTE® Super-T je jednorázové škrtidlo na jedno použití vyrobené ze silikonu a potažené pudrem. Neobsahuje žádné součásti vyrobené ze suchého přírodního kaučuku a neobsahuje bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP).

Manipulace

				
<p>1 Škrtidlo umístěte 7,5–10 cm nad místem vpichu.</p>	<p>2 Jednoduše obtočte VACUETTE® Super-T kolem paže a protáhněte jeden konec prostřihnutým otvorem.</p>	<p>3 Vroubkovaný konec stahujte zpět přes sebe, dokud nedosáhnete požadovaného napnutí a pak lehce povolte.</p>	<p>4 Škrtidlo se zafixuje v poloze.</p>	<p>5 Když krev nateče do první zkumavky, jednoduše vytáhněte konec s prostřihnutým otvorem a škrtidlo se okamžitě uvolní.</p>

Pokud se škrtidlo používá déle než 1 minutu, mělo by se povolit a znovu použít za 2 minuty.¹

Bezpečnostní opatření/Varování

- Nezaškrucujte příliš silně, protože by mohlo dojít k přerušení proudění krve do končetiny.
- Jakmile začne do první zkumavky téci krev, ihned škrtidlo uvolněte.
- Příliš dlouhá a příliš silná zástava krevního oběhu může přispívat k hemolýze.
- Nepřikládejte na poraněnou kůži.
- Nepřikládejte na poraněnou kůži.
- Ihned po použití škrtidlo zlikvidujte a nepoužívejte jej opakovaně.
- Opakované použití jednorázového škrtidla může vést k onemocnění pacientů v důsledku přenosu infekčních onemocnění.

Dojde-li v souvislosti s produktem k závažným incidentům, musí být tyto incidenty ohlášeny výrobcí a kompetentnímu orgánu členského státu, v němž se nachází bydliště uživatele/pacienta.










Skladování

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
Teplota při skladování: 4–25 °C

Likvidace

Likvidujte v souladu s předpisy vašeho zdravotnického zařízení.

Informace na štítku

	Výrobce		Omezení teploty
	Datum použitelnosti		Nepoužívejte opakovaně
	Číslo šarže		Viz návod k použití
	Katalogové číslo		Zdravotnický prostředek
	Chraňte před slunečním světlem		

Literatura:

*CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41

Adresa výrobce:
STARLIM Spritzguss GmbH,
Mühlstrasse 21,
4614 Marchtrenk, Rakousko
Distributor: Greiner Bio-One GmbH,
Rakousko



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Rakousko

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791