



Camicia PP monouso HOLDEX[®]
(sterile)



Istruzioni per l'uso
Non disponibile negli Stati Uniti!

Applicabile solo per il seguente codice prodotto: 450263

Uso previsto

La camicia PP monouso HOLDEX[®] è concepita per l'uso in procedure di raccolta di sangue con dispositivi per la raccolta del sangue dotati di attacco Luer femmina.

Descrizione del prodotto

Una camicia in plastica sterile, monouso, usa e getta, con un connettore Luer maschio eccentrico sulla sommità della camicia. Un ago in acciaio inossidabile con una cannula è saldato sulla parte interna della camicia per facilitare il prelievo di sangue perforando il tappo di un dispositivo per la raccolta del sangue collegato.

Manipolazione

1. Aprire la confezione con cautela.
2. Afferrare la camicia con una mano e collegare l'attacco Luer maschio sulla sommità della camicia all'attacco Luer femmina dell'accessorio per la raccolta prescelto. Verificare che il collegamento sia ben saldo.
3. Eseguire la raccolta di sangue in conformità con le prassi della struttura.
4. Dopo la raccolta del sangue, eliminare il dispositivo come descritto di seguito.

Conservazione

Conservare la camicia a una temperatura di 4–25 °C (40–77 °F).

NOTA: non esporre alla luce solare diretta. Temperature di conservazione superiori alla temperatura massima consigliata possono causare danni alla camicia.










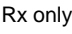
Precauzioni/Avvertimenti

- Attenendosi scrupolosamente alle istruzioni il dispositivo offre le prestazioni previste.
- Fare sempre riferimento alle istruzioni per l'uso di ciascun singolo accessorio.
- Indossare sempre i guanti mentre si esegue un prelievo di sangue utilizzando questo dispositivo.
- Prima dell'uso verificare l'integrità di ciascuna confezione. Se la confezione è in qualche modo danneggiata, non utilizzare il prodotto.
- Monouso e destinato a un singolo paziente. Non riutilizzare, a causa del rischio di infezioni pericolose!
- Durante l'uso e l'eliminazione, tenere sempre le mani dietro l'ago.
- Non toccare mai la parte interna della camicia.
- Non apporre nuovamente il cappuccio all'ago. Si raccomanda l'uso di accessori di sicurezza.
- Questo dispositivo contiene gomma naturale secca, la cui presenza è indicata sull'etichetta della confezione.
- Quando si utilizza un sistema di raccolta del sangue sottovuoto controllare sempre che le provette si riempiano correttamente.
- Il prodotto deve essere impiegato solo da personale sanitario appropriatamente formato in base alle presenti istruzioni per l'uso.

Smaltimento

Tenere in considerazione e attenersi alle linee guida di igiene generale e ai requisiti normativi per lo smaltimento di materiali infettivi. Dopo l'uso, eliminare la camicia e tutti gli accessori monouso insieme in contenitori idonei per l'eliminazione di prodotti a rischio biologico.

Informazioni sull'etichetta

	Fabbricante		Limiti di temperatura
	Data di scadenza		Non riutilizzare
	Codice lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
	Numero di catalogo		Contiene o è presente lattice di gomma naturale
	Sterilizzazione tramite irradiazione		Dispositivo esclusivamente su prescrizione medica



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefono +43 7583 6791