

**HOLDEX[®] holder PP til engangsbruk**

(steril)

**Bruksanvisning**

Ikke tilgjengelig i USA.

Gjelder bare for følgende varenummer: 450263

Tiltenkt bruk

HOLDEX[®] holder PP til engangsbruk er beregnet til blodprøvetakingsprosedyrer i kombinasjon med blodprøvetakingsenheter med en hunnluerkobling.

Beskrivelse av produktet

En steril engangsplastholder med en desentrert hannluerkobling øverst på holderen. En nål av rustfritt stål med en hylse er festet til insiden av holderen for å forenkle blodprøvetaking når hetten på en tilkoblet blodprøvetakingsenhet punkteres.

Håndtering

1. Åpne emballasjen forsiktig.
2. Ta tak i holderen i den ene hånden og fest den mannlige luerkoblingen øverst på holderen til hunnluerkoblingen til det valgte prøvetakingstilbehøret. Sørg for at den er forsvarlig festet.
3. Utfør blodprøvetaking i samsvar med rutinene på praksisen/klinikken.
4. Etter blodprøvetaking kasseres enheten som beskrevet nedenfor.

Oppbevaring

Oppbevar holderen ved 4–25 °C (40–77 °F)

MERK: Skal ikke utsettes for direkte sollys. Overskridelse av anbefalt maksimumstemperatur kan føre til svekkelse av holderen.







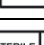
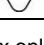


Forholdsregler/forsiktighetsregler

- Enheten fungerer som forutsatt når instruksjonene følges på riktig måte.
- Følg alltid bruksanvisningen til hvert enkelt tilbehør.
- Bruk alltid hansker under blodprøvetaking ved bruk av denne enheten.
- Undersøk at hver enkelt emballasje er hel før bruk. Dersom emballasjen er brutt, skal enheten ikke brukes.
- Kun til engangsbruk på en enkelt pasient. Skal ikke gjenbrukes på grunn av risikoen for skadelige infeksjoner.
- Hold hendene bak nålen til enhver tid under bruk og kassering.
- Berør aldri insiden av holderen.
- Sett aldri hetten på nålen igjen. Bruk av sikkerhetstilbehør anbefales.
- Denne enheten inneholder tørr naturgummi og er tilsvarende merket på emballasjen.
- Kontroller alltid at rørene er fylt på riktig måte når du bruker et evakuert blodprøvetakingssystem.
- Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene.

Kassering

Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avhending av infisert materiale skal respekteres og følges. Etter bruk kastes holderen og alt engangstilbehør sammen i egnede beholdere for biologisk risikoavfall.

Informasjon på etiketten

	Produsent		Temperaturgrense
	Utløpsdato		Må ikke brukes på nytt
	Partikode		Se bruksanvisningen
	Katalognummer		Inneholder eller kan inneholde naturgummilateks
	Sterilisert ved stråling		Enhet må foreskrives



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Østerrike

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tlf.: +43 7583 6791