



Jednorázový držák PP HOLDEX®
(sterilní)



Návod k použití

Platí pouze pro položku s následujícím číslem: 450241

Použití

Jednorázový držák PP HOLDEX® je určen k procedurám odběru venózní krve v kombinaci s prostředky pro odběr krve s vnější spojkou typu Luer.

Popis výrobku

Sterilní jednorázový plastový držák s vnitřní spojkou typu Luer v horní části umístěnou mimo střed. Uvnitř držáku je připevněna jehla z nerezové oceli s pouzdem, která usnadňuje odběr krve propíchnutím víčka připevněného prostředku pro odběr krve.

Zacházení

1. Opatrně otevřete balení.
2. Uchopte držák do jedné ruky a připevněte vnitřní spojkou typu Luer umístěnou na horní části držáku k vnější spojce typu Luer zvoleného příslušenství pro odběr krve. Zkontrolujte, zda jsou spojky správně spojeny.
3. Proveďte odběr krve v souladu se zásadami vašeho zdravotnického zařízení.
4. Po odběru krve držák zlikvidujte v souladu s popisem uvedeným níže.

Skladování

Držák uchovávejte při teplotě 4–25 °C (40–77 °F).

POZNÁMKA: Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Při překročení maximální doporučené teploty skladování může dojít k poškození držáku.





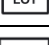



Upozornění/opatření

- Pro správnou funkci prostředku je nutné důsledně dodržovat pokyny.
- Vždy si přečtěte pokyny k použití pro příslušné příslušenství.
- Při odběru krve prováděném pomocí tohoto prostředku vždy používejte ochranné rukavice.
- Před použitím každého balení zkontrolujte jeho celistvost. Je-li balení porušené, nepoužívejte jej.
- Balení je určeno k jednorázovému použití pro jednoho pacienta. Opakované použití je zakázáno kvůli riziku infekce!
- Při použití a likvidaci se ruce vždy musí nacházet za jehlou.
- Nikdy se nedotýkejte vnitřku držáku.
- Jehlu nikdy znovu nezakrývejte. Doporučuje se používat ochranné pomůcky.
- Při použití vakuového systému pro odběr krve vždy zkontrolujte správné naplnění zkumavek.
- Výrobek je určen řádně vyškoleným zdravotnickým pracovníkům a smí být používán pouze v souladu s těmito pokyny.

Likvidace

Při řádné likvidaci infekčního materiálu je nutno dodržovat obecná hygienická pravidla a místní předpisy. Po použití zlikvidujte držák včetně jednorázového příslušenství s použitím vhodných nádob na biologicky nebezpečný odpad.

Informace na štítku

	Výrobce		Omezení teploty
	Datum použitelnosti		Nepoužívejte opakovaně
	Číslo šarže		Viz návod k použití
	Katalogové číslo	Rx only	Prostředek vydávaný pouze na lékařský předpis
	Sterilizováno zářením		



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Rakousko

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791