

VACUETTE® Super-T
Jednorázové zaškrcovadlo
Návod k použití

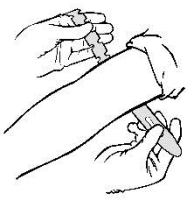
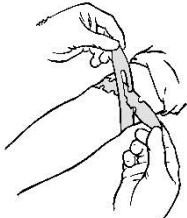

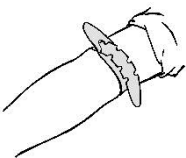
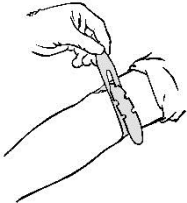
Použití

VACUETTE® Super-T se používá při rutinním odběru krve, kdy vyvíjí tlak na paži, aby se žíly více zvýraznily a byly lépe cítit a daly se snadněji najít. Výrobek je určen řádně vyškoleným zdravotnickým pracovníkům a smí být používán pouze v souladu s návodem.

Popis výrobku

VACUETTE® Super-T je jednorázové zaškrcovadlo na jedno použití vyrobené ze silikonu a potažené pudrem. Neobsahuje žádné součásti vyrobené ze suchého přírodního kaučuku a neobsahuje bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP).

Zacházení

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 1 Zaškrcovadlo umístíte 7,5–10 cm nad místem vpichu. | 2 Jednoduše obtočte VACUETTE® Super-T kolem paže a protáhněte jeden konec prostříhnutým otvorem. | 3 Vroubkovaný konec stahujte zpět přes sebe, dokud nedosáhnete požadovaného napnutí a pak lehce povolte. | 4 Zaškrcovadlo se zafixuje v poloze. | 5 Když krev nateče do první zkumavky, jednoduše vytáhněte konec s prostříhnutým otvorem a zaškrcovadlo se okamžitě uvolní. |

Pokud se zaškrcovadlo používá déle než 1 minutu, mělo by se povolit a znovu použít za 2 minuty.¹

Bezpečnostní opatření/Varování

- Nevyvíjejte příliš vysoký tlak, který by mohl poškodit arteriální průtok krve do končetiny.
- Jakmile začne krev téct do první zkumavky, zaškrcovadlo povolte.
- Příliš dlouhé a příliš vysoké městnání krve může přispět k hemolýze.





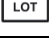


Skladování

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
Teplota při skladování: 4–25 °C

Likvidace

Likvidujte v souladu s předpisy vašeho zdravotnického zařízení.

Informace na štítku

| | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|
|  | Výrobce |  | Omezení teploty |
|  | Datum použitelnosti |  | Nepoužívejte opakovaně |
|  | Číslo dávky |  | Viz návod k použití |
|  | Katalogové číslo | | |

Literatura:

¹CLSI GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture (Postupy pro odběry vzorků krve venepunkcí k diagnostickým účelům; schválené šesté vydání normy); Approved Standard-Sixth Edition

Adresa výrobce:
STARLIM Spritzguss GmbH,
Mühlstrasse 21,
4614 Marchtrenk, Rakousko
Distributor: Greiner Bio-One GmbH,
Rakousko



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Rakousko

www.qbo.com/preanalytics
office@at.qbo.com
Telefon +43 7583 6791