

**Brugsvejledning**

Gælder kun for følgende artikelnummer: 450241

**Tilsluttet brug**

HOLDEX<sup>®</sup>-engangsholder PP er beregnet til brug sammen med blodopsamlingsenheder med en hun-luer-forbindelse ved udtagning af venøst blod.

**Produktbeskrivelse**

En steril, engangsplastholder med en forskudt han-luer-konnektor på toppen af holderen. En forbundet nål med en muffe i rustfrit stål indvendigt i holderen for at lette blodopsamling ved at punktere hættten på en fastgjort anordning til blodopsamling.

**Håndtering**

1. Åbn forsigtigt pakningen.
2. Tag holderen i den ene hånd, og sæt han-luer-forbindelsen på toppen af holderen på hun-luer-forbindelsen på det valgte opsamlingsstilbehør. Kontrollér, at luer-forbindelsen er sikkert fastgjort.
3. Udfør blodudtagningen i henhold til gældende retningslinjer og procedurer på stedet.
4. Efter blodudtagningen bortskaffes holderen som beskrevet nedenfor.

**Opbevaring**

Holderen skal opbevares ved 4-25 °C (40-77 °F).

**BEMÆRK:** Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medføre, at holderen beskadiges.






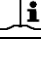

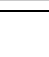
**Forholdsregler/forsigtighedsregler**

- Enheden vil fungere som tilsigtet, når anvisningerne følges.
- Se altid brugsvejledningen for hvert enkelt stykke tilbehør.
- Bær altid handsker under en blodopsamling ved anvendelse af denne anordning.
- Kontrollér, at de enkelte pakninger er fejlfrie inden brug. Hvis pakningen er brudt, må den ikke bruges.
- Kun til engangsbrug på en enkelt patient. Må ikke genbruges på grund af risiko for skadelige infektioner!
- Hold altid hænderne bag nålen under håndtering og bortskaffelse.
- Berør aldrig holderens indvendige side.
- Sæt aldrig kappen på nålen igen. Det anbefales at bruge sikkerhedsudstyr.
- Kontrollér, at prøverør fyldes korrekt, når der anvendes et evakueret blodopsamlingsystem.
- Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale i henhold til denne vejledning.

**Bortskaffelse**

De generelle hygiejneretningslinjer og lovbestemmelser for korrekt bortskaffelse af infektiøst materiale skal følges og overholdes. Efter brug skal holderen og alt engangstilbehør bortskaffes sammen i passende beholdere til biologisk farligt affald.

**Oplysninger på etiketten**

	Producent		Temperaturbegrænsning
	Anvendes før:		Må ikke genanvendes
	Batchkode		Læs brugsvejledningen
	Katalognummer	Rx only	Ordineret udstyr
	Steriliseret vha. bestråling		



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Straße 32  
4550 Kremsmünster  
Østrig

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Telefon +43 7583 6791