

VACUETTE® SAFELINK Holder med han-luer-lås (steril) Brugsanvisning

Tilsigtet brug

VACUETTE® SAFELINK er beregnet til brug sammen med blodopsamlingsprocedurer med en hun-luer-forbindelse.

Produktbeskrivelse

En steril, engangsplastholder med en han-luer-lås konektor centreret oven på holderen. En rustfrit stål nål med en muffe er forbundet i til innersiden af holderen for at lette blodopsamling ved at punktere hættten på et fastgjort blodprøvetagningsrør.

Håndtering

1. Åbn forsigtigt indpakningen.
2. Hold holderen i den ene hånd, og fastgør han-luer-konnektoren, der findes oven på holderen, til hun-luer-konnektoren på den valgte enhed ved forsigtig iskruning. Sørg for, at den er forsvarligt fastgjort, men ikke overskruet.
3. Udfør blodudtagning i henhold til gældende retningslinjer og procedurer på stedet.
4. Efter blodudtagning bortskaffes holderen som beskrevet nedenfor.

Opbevaring

Holderen skal opbevares ved 4-25 °C (40-77 °F).

BEMÆRK: Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medføre, at holderen beskadiges.







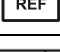
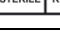
Forholdsregler/forsigtighedsregler

- Enheden fungerer som tilsigtet, når anvisningerne følges.
- Hvis enheden anvendes i kombination med et perifert indsat venekateter (PIVC), bør der anvendes forlængersæt.
- Ikke egnet til blodgennemstrømningstryk på over 185 mmHg.
- Se altid brugsanvisningen for hvert enkelt tilbehør.
- Brug altid handsker under en blodopsamling med denne enhed.
- Kontrollér, at de enkelte indpakninger er fejlfrie inden brug. Hvis indpakningen er brudt, må enheden ikke bruges.
- Kun til engangsbrug på en enkelt patient. Må ikke genbruges på grund af risiko for skadelige infektioner!
- Må kun anvendes til én blodprøvetagningsprocedure.
- Hold altid hænderne bag nålen under håndtering og bortskaffelse.
- Berør aldrig holderens indvendige side.
- Sæt aldrig kappen på nålen igen. Det anbefales at bruge personligt sikkerhedsudstyr.
- Skal altid holdes på plads ved at trykke røret med tommelfingeren eller en anden finger for at sikre komplet undertrykstræk.
- Kontrollér, at prøverørerne fyldes korrekt, når der anvendes et blodopsamlingsssystem.
- Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale i overensstemmelse med denne vejledning.

Bortskaffelse

De generelle hygiejneretningslinjer og lovbestemmelser for korrekt bortskaffelse af infektiøst materiale skal følges og overholdes. Efter brug skal holderen og alt engangstilbehør bortskaffes sammen i beholdere, der er egnet til biologisk farligt affald.

Oplysninger på etiketten

	Producent		Temperaturgrænse
	Anvendes før:		Må ikke genanvendes
	Batchkode		Læs brugsanvisningen
	Katalognummer	Rx only	Ordineret udstyr
	Steriliseret vha. bestråling		



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Østrig

Fremstillet i Østrig

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791