

VACUETTE® Super-T

Stasebånd til engangsbrug

Brugsanvisning

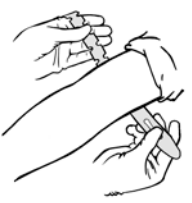


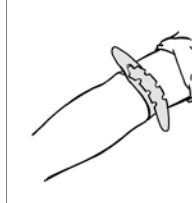
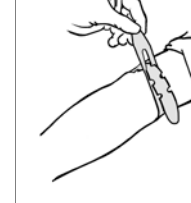
Tilsluttet brug

VACUETTE® Super-T anvendes til rutinemæssig blodprøvetagning til at påføre tryk på armen for at gøre venerne mere indlysende og lettere at mærke og finde. Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale i henhold til vejledningen.

Produktbeskrivelse

VACUETTE® Super-T er et engangsstasebånd, som kasseres efter brug, og som er fremstillet i silikone belagt med talkum. Det har ingen dele, der er fremstillet af tørt naturgummi, og det indeholder ikke DEHP (ftalater).

Håndtering

				
1 Anbring stasebåndet 7.5-10 cm oven for punkturstedet.	2 VACUETTE® Super-T vikles blot rundt om armen, og den ene ende føres gennem slidsen.	3 Træk den tilskårne ende tilbage hen over sig selv, indtil den er tilpas strammet, og slip den så forsigtigt.	4 Stasebåndet vil herefter blive låst på plads.	5 Når blodet strømmer ind i det første rør, trækkes der blot i enden med slidsen, og den vil straks blive løsnet.

Hvis en årepresse har været sat på i længere end 1 minut, skal den løsnes og påsættes igen efter 2 minutter. ¹

Forholdsregler/forsigtighedsregler

- Påfør ikke så stærkt et pres, at det kan hæmme den arterielle blodgennemstrømning til ekstremiteterne.
- Løsn stasebåndet, så snart blodet begynder at løbe ned i det første rør.
- For langvarig og for stram stase kan bidrage til hæmolyse.








Opbevaring

Må ikke udsættes for direkte sollys.
Opbevaringstemperatur: 4-25 °C

Bortskaffelse

Bortskaffes i henhold til din organisations politik.

Oplysninger på etiketten

	Producent		Temperaturbegrænsning
	Udløbsdato		Må ikke genanvendes
	Batchkode		Læs brugsvejledningen
	Katalognummer		

Litteratur:

¹CLSI GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition

Production location:
STARLIM Spritzguss GmbH,
Mühlstrasse 21,
4614 Marchtrenk, Austria
Distributed by Greiner Bio-One GmbH,
Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791