



HOLDEX[®] Einweghalter PP
(steril)



Gebrauchsanweisung
In den USA nicht verfügbar!

Gilt nur für folgende Artikelnummer: 450263

Verwendungszweck

Der HOLDEX[®] Einweghalter PP wird in Verbindung mit Blutentnahmezubehör mit weiblichem Luer-Anschluss zur Blutentnahme verwendet.

Produktbeschreibung

Ein für den Einmalgebrauch bestimmter steriler Halter aus Kunststoff mit einem exzentrischen männlichen Luer-Anschluss oben am Halter und einer im Inneren des Halters angebrachten Edelstahlnadel mit Hülse zur einfachen Blutentnahme nach Punktion der Kappe der verbundenen Blutentnahmekanüle.

Handhabung

1. Verpackung vorsichtig öffnen.
2. Halter mit einer Hand greifen und den männlichen Luer-Anschluss oben am Halter mit dem weiblichen Luer-Anschluss des ausgewählten Blutentnahmezubehörs verbinden. Überprüfen, ob die Verbindung fest sitzt.
3. Blutentnahme entsprechend der Richtlinie Ihrer Einrichtung durchführen.
4. Nach der Blutentnahme Halter und Zubehörteile wie unten beschrieben entsorgen.

Lagerung

Den Halter bei 4–25 °C (40–77 °F) lagern.

HINWEIS: Den Halter keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Wird die maximal empfohlene Lagertemperatur überschritten, kann dies die Qualität des Halters beeinträchtigen.










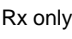
Sicherheitshinweise/Warnhinweise

- Werden die Anweisungen ordnungsgemäß befolgt, wird das Produkt wie vorgesehen funktionieren.
- Es sind zudem stets die zu jedem Zubehörteil zugehörigen Gebrauchsanweisungen zu beachten.
- Bei der Blutentnahme mit diesem Produkt stets Handschuhe tragen.
- Vor der Verwendung jede Einzelverpackung auf Unversehrtheit kontrollieren. Ist die Verpackung beschädigt, das Produkt nicht verwenden.
- Nur zum Einmalgebrauch bei einem einzelnen Patienten bestimmt. Nicht wiederverwenden, da dies zu gefährlichen Infektionen führen könnte!
- Die Hände während der Verwendung und Entsorgung stets hinter der Nadel belassen.
- Niemals ins Innere des Halters greifen.
- Eine Nadel niemals wiederverschließen. Es wird die Verwendung von Sicherheitszubehör empfohlen.
- Dieses Produkt enthält trockenen Naturkautschuk und ist auf der Verpackung entsprechend gekennzeichnet.
- Bei Verwendung von evakuierten Blutentnahmeröhrchen stets prüfen, ob die Röhrchen ordnungsgemäß gefüllt sind.
- Das Produkt darf nur von ausreichend geschultem medizinischen Fachpersonal unter Beachtung dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Entsorgung

Es sind die allgemeinen Hygienerichtlinien sowie die gesetzlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Entsorgung von infektiösem Material zu beachten und einzuhalten. Nach der Verwendung den Halter und alle Einweg-Zubehörteile in geeigneten Abfallbehältern für potentiell infektiöses Material entsorgen.

Etikettierung

	Hersteller		Temperaturgrenzwerte
	Verwendbar bis (Datum)		Nicht wiederverwenden
	Chargenbezeichnung		Gebrauchsanweisung beachten
	Artikelnummer		Enthält Naturkautschuklatex
	Sterilisation durch Bestrahlung		Verschreibungspflichtig



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Österreich

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tel.: +43 7583 6791