

Lancette di sicurezza MiniCollect®

Istruzioni per l'uso

Usò previsto

Le lancette di sicurezza **MiniCollect®** sono progettate per il prelievo di routine quotidiano di sangue capillare sotto la responsabilità di un medico qualificato. Sono un dispositivo monouso e devono essere utilizzate da un operatore sanitario adeguatamente formato, in base a queste istruzioni.

Descrizione del prodotto

Le lancette di sicurezza **MiniCollect®** sono dispositivi medici sterili, monouso attivati a pulsante, per la puntura cutanea, che consentono un'incisione a lunghezza e profondità controllate. Il dispositivo è composto da un ago/una lama in acciaio inossidabile, contenuta in un alloggiamento di plastica, che si ritrae in modo automatico e permanente dopo la puntura.

Precauzioni/Avvertenze

- Le nostre linee guida rappresentano solo delle raccomandazioni. Per la manipolazione delle lancette di sicurezza **MiniCollect®**, fare riferimento alle politiche e alle procedure adottate dalla struttura in cui si opera.
- Il contatto con campioni biologici può potenzialmente trasmettere malattie infettive come HBV, HCV, HIV e altre. In caso di esposizione a campioni biologici, sottoporsi subito al trattamento clinico appropriato.
- Smaltire tutte le lancette di sicurezza **MiniCollect®** in contenitori per materiali a rischio biologico approvati per tale tipo di smaltimento.
- Durante la procedura di puntura cutanea e la manipolazione delle provette contenenti il sangue prelevato indossare guanti usa e getta, al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione.
- Non utilizzare le lancette di sicurezza **MiniCollect®** dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare le lancette di sicurezza **MiniCollect®** se la linguetta di protezione è stata rimossa.
- Le lancette con una profondità di puntura superiore a 2 mm non sono raccomandate per l'uso su bambini di età inferiore a un anno.

Conservazione

Temperatura di stoccaggio consigliata: 4–36 °C (40–97 °F). Conservare in un luogo asciutto, lontano dal calore diretto o eccessivo.
NOTA: non esporre alla luce solare diretta.

Manipolazione


LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE DOCUMENTO PRIMA DI EFFETTUARE LA PUNTURA CUTANEA.

Dispositivi necessari per il prelievo.





Assicurarsi che i seguenti materiali siano facilmente accessibili prima di effettuare la puntura cutanea:

- Tutte le necessarie provette **MiniCollect®**, identificate per dimensioni, raccolta e additivo e ogni altro contenitore di raccolta necessario.
NOTA: le provette di coagulazione con citrato di sodio (9NC) **MiniCollect®** vengono utilizzate per il prelievo di campioni ematici venosi.
- Guanti monouso e dispositivi di protezione individuali.
- Etichette per contrassegnare i campioni in base all'approccio PPID (Identificazione Positiva del Paziente);
- Un batuffolo imbevuto di alcol per la disinfezione del sito.
- Cerotto adesivo o bendaggio.
- Contenitore per l'eliminazione sicura dei materiali usati.

Selezionare la versione della lancetta di sicurezza **MiniCollect®** in base allo spessore della cute del paziente e al volume di sangue richiesto.





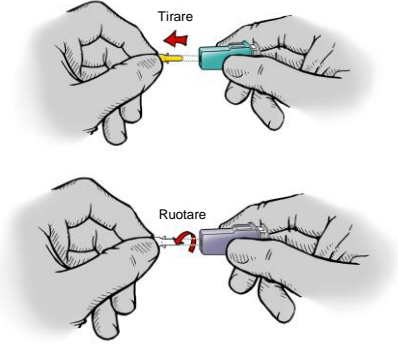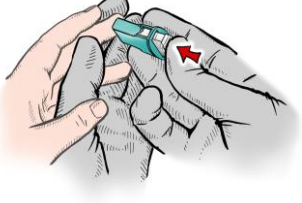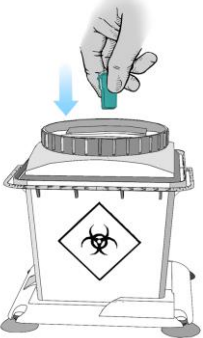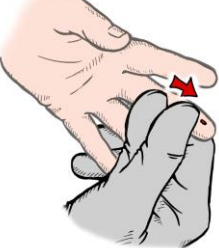

Lancette di sicurezza MiniCollect®		
Colore	Dimensioni/lunghezza a ago o lama	Volume di sangue ottenibile
Lavanda (ago)	28G / 1,25 mm	
Arancione (ago)	23G / 2,25 mm	
Rosa (lama)	1,00 mm / 1,00 mm	
Verde (lama)	1,50 mm / 1,50 mm	
Blu (lama)	1,50 mm / 2,00 mm	

Si può utilizzare un asciugamano caldo e umido (o altri dispositivi di riscaldamento) a temperature non superiori a 42 °C (108°F), coprendo l'area per tre-cinque minuti.

1	<p>Preparare il sito della puntura con un prodotto antisettico appropriato. Dopo aver pulito il sito della puntura cutanea, far asciugare all'aria l'area perché abbia effetto l'azione antisettica dell'alcol. I residui di alcol causano una rapida emolisi, possono avere effetti avversi sui risultati dei test e causeranno al paziente una sensazione di fastidio pungente.</p>
2	 <p>Tenere la lancetta saldamente fra le dita e staccare la linguetta protettiva tirandola (se si tratta di una lama) o ruotandola (se si tratta di un ago).</p>
3	 <p>Tenere fermo il sito della puntura per evitare un movimento improvviso, quindi posizionare la lancetta sopra di esso. Quindi, premere delicatamente il pulsante per attivare la lancetta. NOTA: non esercitare pressione sul sito della puntura durante l'attivazione della lancetta di sicurezza MiniCollect®.</p>
4	 <p>Immediatamente dopo la puntura, rimuovere la lancetta con un singolo movimento verso l'alto e smaltirla in un contenitore appropriato per taglienti.</p>
5	 <p>Si raccomanda di eliminare la prima goccia di sangue con una garza, dato che è molto probabile che la prima goccia contenga fluido tissutale in eccesso. Applicare una leggera pressione intermittente sul tessuto circostante. Evitare assolutamente una pressione ripetuta e forte (effetto "mungitura"), in quanto entrambe le procedure potrebbero causare emolisi o contaminazione del campione con liquido interstiziale.</p>

NOTA: se necessario, utilizzare queste istruzioni insieme alle istruzioni per l'uso sul prelievo di sangue capillare **MiniCollect®**.

Informazioni sull'etichetta

	Fabbricante		Numero di catalogo
	Data di scadenza		Non riutilizzare
	Codice lotto		Sterilizzazione tramite irradiazione

Riferimenti:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard—Sixth Edition

Sede di produzione:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Giappone
Prodotto in Giappone



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefono +43 7583 6791

Distribuito da Greiner Bio-One GmbH,
Austria