

MiniCollect® sikkerhetslansetter

Bruksanvisning

Tiltenkt bruk

MiniCollect® sikkerhetslansetter er utviklet for bruk i daglig prøvetaking av kapillærblod når denne oppgaven delegeres av kvalifisert helsepersonell. Nålene er kun beregnet til engangsbruk og skal kun brukes av helsepersonell med tilstrekkelig opplæring i samsvar med disse instruksjonene.

Beskrivelse av produktet

MiniCollect® sikkerhetslansetter er sterile knappaktiverte enheter til engangsbruk for hudpunksjon, noe som gir kontrollert snittlengde og -dybde. Enheten består av en nål / et blad av rustfritt stål i et plasthus, og den trekkes automatisk og permanent tilbake etter punksjon.

Forholdsregler/forsiktighetsregler

- Retningslinjene her er kun anbefalinger. Se institusjonens retningslinjer og rutiner med hensyn til håndtering av **MiniCollect®** sikkerhetslansetter.
- HBV, HCV, HIV og andre smittsomme sykdommer kan overføres gjennom kontakt med biologiske prøver. Ved eksponering for biologiske prøver må det gis egnet medisinsk hjelp.
- Kast alle **MiniCollect®** sikkerhetslansetter i beholdere for biologisk farlig avfall som er godkjent for dette.
- Bruk engangshansker under hudpunksjon og ved håndtering av blodprøverør for å redusere eksponeringsfaren.
- Ikke bruk **MiniCollect®** sikkerhetslansetter etter utløpsdatoen.
- Ikke bruk **MiniCollect®** sikkerhetslansetter hvis den beskyttende tappen er fjernet.
- Lansetter med en punksjonsdybde over 2 mm anbefales ikke til bruk på barn under ett år.

Oppbevaring

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 4–36 °C (40–97 °F). Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte eller sterk varme.

MERK: Skal ikke utsettes for direkte sollys.

Håndtering


LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU UTFØRER HUDPUNKSJON.

Nødvendig utstyr for prøvetaking.





Pass på at følgende materialer er lett tilgjengelig før du utfører hudpunksjon:

- Alle nødvendige **MiniCollect®**-rør, identifisert med størrelse, prøve og tilsetningsstoff, eller andre nødvendige prøvetakingsbeholdere.
MERK: **MiniCollect®** 9NC-koagulasjon *brukes kun til venøs blodprøvetaking.*
- Engangshansker og personlig verneutstyr.
- Etiketter for positiv pasientidentifikasjon av prøver.
- Spritserviett til rensing.
- Selvklebende plaster eller bandasje.
- Beholder for kassering av skarpt utstyr for sikker kassering av brukte materialer.

MiniCollect®-sikkerhetslansettversjonen skal velges ut fra pasientens vevstykkelse og blodvolumet som skal tas.





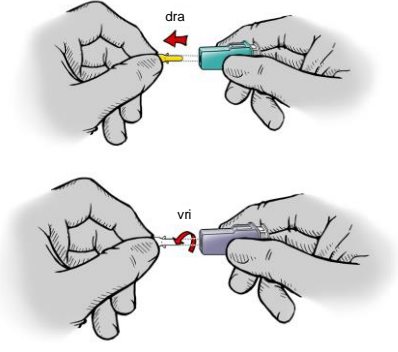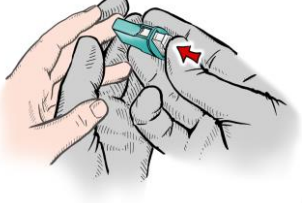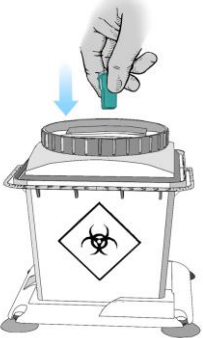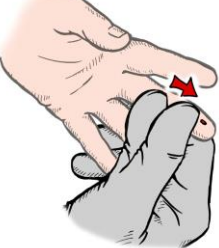

MiniCollect® sikkerhetslansetter		
Farge	Størrelse/lengde på nål eller blad	Oppnåelig blodvolum
Lavendel (nål)	28 G / 1,25 mm	
Oransje (nål)	23 G / 2,25 mm	
Rosa (blad)	1,00 mm / 1,00 mm	
Grønn (blad)	1,50 mm / 1,50 mm	
Blå (blad)	1,50 mm / 2,00 mm	

Et varmt, fuktig håndkle (eller andre oppvarmingsanordninger) ved en temperatur på maks. 42 °C (108 °F) kan anvendes for å tildekke området i 3 til 5 minutter.

1	<p>Klargjør punksjonsstedet med et egnet antiseptisk middel. Etter rensing av hudpunksjonsstedet lufttørkes området, slik at den antiseptiske virkningen av alkoholen kan gjøre seg gjeldende. Resterende alkohol forårsaker hurtig hemolyse, kan ha negative effekter på testresultatene og vil føre til ubehag (sviing) hos pasienten.</p>
2	 <p>Hold lansetten godt fast mellom fingrene, og fjern beskyttelsestappen ved å dra (blad) eller vri (nål).</p>
3	 <p>Hold punksjonsstedet støtt for å unngå plutselige bevegelser, og plasser lansetten over det. Trykk deretter forsiktig på knappen for å aktivere lansetten. MERK: Ikke trykk på punksjonsstedet mens du aktiverer MiniCollect® sikkerhetslansetten.</p>
4	 <p>Umiddelbart etter punksjon fjernes lansetten i en oppadgående bevegelse. Kast den i en egnet beholder for skarpe gjenstander.</p>
5	 <p>Det anbefales å tørke bort den første blodråpen med en kompress, ettersom den første dråpen sannsynligvis inneholder overskytende vevsvæske. Trykk forsiktig flere ganger mot det omkringliggende vevet. Kraftig, gjentatt trykk («melking») må unngås, da begge prosedyrer kan føre til hemolyse eller at vevsvæske forurenses prøven.</p>

MERK: Bruk disse instruksjonene sammen med bruksanvisningen for **MiniCollect®** kapillærbloodprøvetakingsrør, hvis nødvendig.

Informasjon på etiketten

	Produsent		Katalognummer
	Utløpsdato		Må ikke brukes på nytt
	Partikode		Sterilisert ved stråling

Litteratur:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard—Sixth Edition

Produksjonssted:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japan
Laget i Japan



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Østerrike

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tlf.: +43 7583 6791

Distribuert av Greiner Bio-One GmbH,
Østerrike