




Adaptador HOLDEX® PP Utilização Única (estéril)

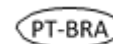

Instruções de Uso

Não disponível nos EUA!

Aplicável apenas ao produto com a seguinte referência: 450263

Indicação de Uso

O Adaptador Holdex® PP de utilização única, destina-se ao uso em procedimentos de coleta de sangue com dispositivos de coleta / infusão com uma porta luer fêmea.

Descrição do Produto

Adaptador plástico estéril, de uso único, com um conector luer macho descentralizado e uma agulha de aço inoxidável acoplada no interior do adaptador para facilitar a coleta de sangue pressionando a tampa do tubo de coleta de sangue acoplado.

Manuseamento

1. Abrir a embalagem cuidadosamente.
2. Segurar o suporte com uma mão e encaixar o luer macho no topo do suporte ao luer fêmea do acessório de coleta selecionado. Certificar-se de que o luer está devidamente encaixado.
3. Efetuar a coleta de sangue de acordo com a protocolo da instituição.
4. Após a coleta de sangue, descarte como descrito abaixo.

Armazenamento

Armazenar o suporte a uma temperatura de 4–25 °C (40–77 °F).

NOTA: Evitar exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o produto.








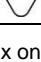

Precauções/Cuidados

- O adaptador deve ser utilizado de acordo com a instrução de uso.
- Consultar sempre as instruções de uso de cada acessório individual.
- Sempre calce luvas durante a coleta de sangue.
- Antes da utilização, inspecionar a embalagem individual para assegurar a sua integridade. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.
- Adaptador de uso único. A reutilização do produto poderá causar infecções.
- Manter as mãos atrás da agulha durante todo o tempo e no descarte.
- Não tocar no interior do suporte.
- Não reencapar a agulha.
- Este adaptador contém borracha natural seca e etiqueta correspondente na embalagem.
- Certificar-se sempre do preenchimento correto dos tubos quando utilizar um sistema de coleta de sangue a vácuo.
- O produto é para ser usado apenas por profissionais treinados de acordo com essas instruções.

Descarte

As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material infectante devem ser seguidas para o descarte correto do material potencialmente infeccioso. Após o uso descarte o suporte e todos os acessórios juntos em recipiente apropriado para descarte de materiais perfurocortantes.

Informações da Etiqueta

	Fabricante		Limite de Temperatura
	Data de Validade: Use até o fim do mês indicado		Não Reutilizar
	Número de Lote		Consultar Instruções de Uso
	Número de Item		Contém/Presença de Látex de Borracha Natural
	Esterilização por Radiação	Rx only	Dispositivo de Prescrição



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone: +43 7583 6791

Importador e Distribuidor :

Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Afonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – Site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves – CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS 10290310045

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com