

Lancetas de Segurança MiniCollect®

Instruções de utilização

Uso Pretendido

As Lancetas de Segurança **MiniCollect®** são projetadas para uso na rotina diária de coleta de sangue capilar quando realizada por profissional qualificado. São de uso único e devem apenas ser usadas por profissionais de saúde treinados adequadamente em conformidade com essa instrução de uso.

Descrição do produto

As Lancetas de Segurança **MiniCollect®** são dispositivos ativados por botão, estéreis e de uso único para punção cutânea, permitindo extensão e profundidade de incisões controladas. O dispositivo consiste de uma agulha / lâmina de aço inoxidável em um invólucro de plástico que se retrai automaticamente e permanentemente após a punção

Precauções/cuidados

- Nossas diretrizes são apenas recomendações. Por favor consultar as políticas e procedimentos de seu estabelecimento referente ao manuseio das Lancetas de Segurança MiniCollect®.
- HBV, HCV, HIV e outras doenças infecto-contagiosas podem ser transmitidas pelo contato com amostras biológicas. No caso de exposição à amostra biológica, assegure o fornecimento de cuidados médicos apropriados.
- Descartar todas as Lancetas de Segurança MiniCollect® em recipientes de descarte de material biológico apropriados.
- Utilizar luvas descartáveis durante a punção e quando manusear tubos para coleta de sangue para minimizar exposição ao risco.
- Não utilizar Lancetas de Segurança MiniCollect® após seu prazo de validade.
- Não utilizar Lancetas de Segurança MiniCollect® se a capa de proteção tenha sido removida.
- Lancetas com uma profundidade de perfuração superior a 2 mm não são recomendadas para uso em crianças com menos de 1 ano de idade.

Armazenamento

Temperatura de armazenamento recomendada: 4-36 ° C (40-97 ° F). Armazenar em local seco, longe do calor direto ou excessivo.

NOTA: Evitar a exposição direta à luz do sol.

Manuseio


LEIA TODO O DOCUMENTO ANTES DE EXECUTAR A PUNÇÃO

Materiais necessários para coleta de amostras.





Certifique-se de que os seguintes materiais estejam prontamente acessíveis antes de realizar uma punção:

- Todos os tubos **MiniCollect®** necessários, identificados por tamanho, volume de aspiração e aditivo ou outros recipientes de coleta necessários. **NOTA:** O tubo para Coagulação **MiniCollect®** 9NC é usado apenas para coleta de sangue venoso.
- Luvas descartáveis e equipamentos de proteção individual.
- Etiquetas para identificação do paciente.
- Materiais para antisepsia.
- Curativo, se necessário.
- Recipiente de descarte apropriado para o descarte seguro do material utilizado.

A versão da Lanceta de Segurança **MiniCollect®** deve ser baseada na espessura do tecido do paciente e no volume de sangue necessário.





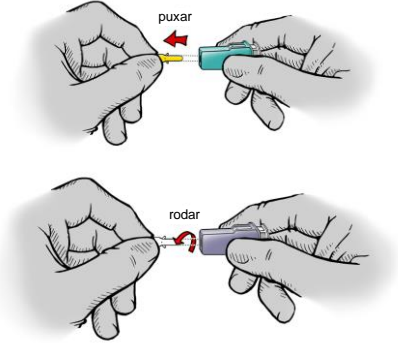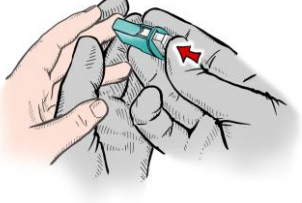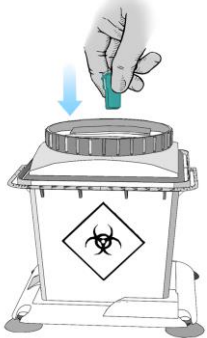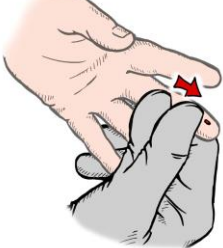

Lancetas de Segurança MiniCollect®		
Cor	Tamanho da agulha ou lâmina/comprimento	Volume de sangue atingível
Violeta (agulha)	28 G/1,25 mm	
Laranja (agulha)	23 G/2,25 mm	
Rosa (lâmina)	1,00 mm/1,00 mm	
Verde (lâmina)	1,50 mm/1,50 mm	
Azul (lâmina)	1,50 mm/2,00 mm	

Uma toalha morna e úmida (ou outros dispositivos de aquecimento) a uma temperatura não superior a 42 ° C (108 ° F) pode ser usada para aquecer o local por 3 a 5 minutos.

1	<p>Realizar a antisepsia no local da punção com antisséptico adequado. Esperar que a área seque adequadamente. Resíduos do antisséptico poderão causar hemólise da amostra, além de desconforto (ardor) ao paciente.</p>
2	 <p>Segurar a Lanceta firmemente entre os dedos e remova a aba de proteção puxando (lâmina) ou torcendo (agulha).</p>
3	 <p>Segurar o local da punção com firmeza para evitar movimentos repentinos e posicionar a lanceta acima do local selecionado. Em seguida, pressionar suavemente o botão para ativar a lanceta. NOTA: Não exerça pressão sobre o local da punção enquanto ativa a Lanceta de Segurança MiniCollect[®].</p>
4	 <p>Imediatamente após a punção, remova a lanceta em um movimento para cima e descarte-a em um recipiente apropriado para perfurocortante.</p>
5	 <p>Recomenda-se limpar a primeira gota de sangue com uma compressa de gaze, visto que é provável que contenha excesso de fluido tecidual. Suavemente aplique pressão intermitente nos tecidos circundantes. Pressão forte e repetitiva (ordenha) deve ser evitada, visto que isto pode causar hemólise ou contaminação da amostra com líquido do tecido.</p>

NOTA: Utilizar estas instruções em conjunto com as Instruções de Uso do **MiniCollect**[®] para Coleta de Sangue Capilar, se necessário.

Informações do rótulo

	Fabricante		Número de Referência
	Prazo de validade		Dispositivo de uso único
	Número do Lote		Método de esterelização (radiação)

Bibliografia:

GP42-A6 «Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens»; Approved Standard — Sixth Edition

Local da Produção:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japão
Fabricado no Japão



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone: +43 7583 6791

Distribuído por Greiner Bio-One GmbH,
Áustria

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Afonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP. 13.473-620 - Americana - SP
FONE - (0xx)(19)-3468-9600 FAX - (0xx)(19)-3468-9601
CNPJ 71.957.310 / 0001-47 – site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS 10290319004

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com