

# Lancetas de Segurança MiniCollect®

## Instruções de utilização

### Utilização prevista

As Lancetas de Segurança **MiniCollect®** destinam-se à utilização na rotina diária de colheita de sangue capilar quando delegada por um médico ou clínico qualificado. Destinam-se a utilização única e só devem ser utilizadas por pessoal de cuidados de saúde com a devida formação e de acordo com estas instruções.

### Descrição do produto

As Lancetas de Segurança **MiniCollect®** são dispositivos estéreis, de utilização única e ativados por botão para punção da pele, permitindo controlar o comprimento e a profundidade da incisão. O dispositivo é constituído por uma agulha/lâmina de aço inoxidável num invólucro plástico e retrai-se automática e permanentemente após a punção.

### Precauções/cuidados

- As diretrizes fornecidas constituem apenas recomendações. Consulte as políticas e os procedimentos em vigor na sua instituição referentes ao manuseamento das Lancetas de Segurança **MiniCollect®**.
- O VHB, VHC, VIH e outras doenças infecciosas podem ser transmitidos através do contacto com amostras biológicas. Assegure a obtenção de assistência médica adequada na eventualidade de exposição a amostras biológicas.
- Elimine todas as Lancetas de Segurança **MiniCollect®** em recipientes para resíduos de risco biológico aprovados para o efeito.
- Utilize luvas descartáveis ao punccionar a pele e ao manusear os tubos de colheita de sangue para minimizar o risco de exposição.
- Não utilize as Lancetas de Segurança **MiniCollect®** após o fim do prazo de validade.
- Não utilize as Lancetas de Segurança **MiniCollect®** se a patilha protetora tiver sido removida.
- Não é recomendada a utilização de lancetas com uma profundidade de punção superior a 2 mm em crianças com menos de um ano de idade.

### Armazenamento

Temperatura recomendada para o armazenamento: 4–36 °C (40–97 °F). Armazene o produto num local seco, afastado de fontes de calor direto ou excessivo.

**NOTA:** Evite a exposição à luz solar direta.

### Manuseamento


LEIA ESTE DOCUMENTO NA ÍNTEGRA ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO DA PELE

#### Equipamento necessário para a colheita de amostras.

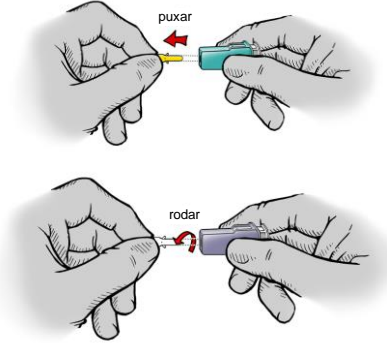
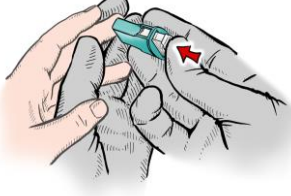

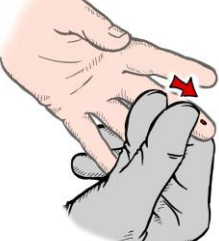
Certifique-se de que os seguintes materiais estão prontamente acessíveis antes de efetuar uma punção da pele:

- Todos os tubos **MiniCollect®** necessários, identificados segundo tamanho, colheita e aditivo ou outros recipientes de colheita necessários. **NOTA:** Os tubos de coagulação 9NC **MiniCollect®** destinam-se apenas à colheita de sangue venoso.
- Luvas descartáveis e equipamento de proteção individual.
- Etiquetas para identificação positiva das amostras do paciente.
- Algodão com álcool para assepsia do local.
- Penso adesivo ou ligadura.
- Recipiente para eliminação segura dos instrumentos afiados utilizados.

Selecionar a versão das Lancetas de Segurança **MiniCollect®** com base na espessura dos tecidos do paciente e no volume de sangue necessário.







Lancetas de Segurança <b>MiniCollect®</b>		
Cor	Tamanho/comprimento da agulha ou lâmina	Volume de sangue alcançável
Roxo (agulha)	28 G/1,25 mm	
Laranja (agulha)	23 G/2,25 mm	
Rosa (lâmina)	1,00 mm/1,00 mm	
Verde (lâmina)	1,50 mm/1,50 mm	
Azul (lâmina)	1,50 mm/2,00 mm	

É possível utilizar uma toalha morna e humedecida (ou outros dispositivos de aquecimento) a uma temperatura não superior a 42 °C (108 °F) para cobrir o local durante três a cinco minutos.

1	<p>Prepare o local de punção com um antisséptico apropriado. Para permitir a ação antisséptica do álcool, deixe a área do local de punção da pele secar ao ar após limpar. Os resíduos de álcool provocam uma hemólise rápida, podendo ter efeitos adversos nos resultados do teste e causar desconforto (ardor) ao paciente.</p>
2	 <p>Segure a lanceta firmemente entre os dedos e puxe (a lâmina) ou rode (a agulha) para remover a patilha protetora.</p>
3	 <p>Posicione a lanceta sobre o local de punção enquanto segura este último firmemente para impedir qualquer movimento súbito. Em seguida, pressione suavemente o botão para ativar a lanceta. <b>NOTA:</b> Não aplique pressão no local de punção ao ativar a Lanceta de Segurança MiniCollect®.</p>
4	 <p>Imediatamente após a punção, remover a lanceta num movimento único ascendente e eliminar num recipiente para eliminação de material médico cortante.</p>
5	 <p>É recomendável limpar a primeira gota de sangue com uma compressa de gaze, visto que é provável que a primeira gota contenha fluido de tecidos em excesso. Aplique uma suave pressão intermitente nos tecidos circundantes. Uma forte pressão repetitiva (ordenha) <b>deve</b> evitar-se, visto que este procedimento pode causar hemólise ou contaminação da amostra com líquido dos tecidos.</p>

**NOTA:** Utilizar estas instruções em simultâneo com as Instruções de utilização do Tubo de colheita de sangue capilar MiniCollect®, se necessário.

## Informações do rótulo

	Fabricante		Número de catálogo
	Prazo de validade		Não reutilizar
	Código do lote		Esterilizado por irradiação

### Bibliografia:

GP42-A6 «Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens»; Approved Standard — Sixth Edition

Local de produção:  
ASAHI Polyslider Company, Limited  
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,  
719-3226 Japão  
Fabricado no Japão



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Áustria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Telefone: +43 7583 6791

Distribuído por Greiner Bio-One GmbH,  
Áustria