

### Uso pretendido

As Lancetas de Segurança **MiniCollect®** destinam-se ao uso na rotina diária de coleta de sangue capilar realizada por um profissional qualificado. As lancetas são de uso único e só devem ser utilizadas por profissionais de saúde adequadamente treinados de acordo com essa instrução de uso.

### Descrição do produto

As Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect®** são dispositivos estéreis, de uso único e ativados por contato para punção da pele. O dispositivo consiste de uma lanceta de aço inoxidável num invólucro plástico e retrai-se automaticamente e permanentemente após a punção.

### Precauções

- As diretrizes fornecidas são apenas recomendações. Por favor, consulte as políticas e procedimentos de sua instituição sobre o manuseio das Lancetas de Segurança Lancelino of **MiniCollect®**.
- O HBV, HCV, HIV e outras doenças infecciosas podem ser transmitidas através de contato com amostras biológicas. Na eventualidade de exposição às amostras biológicas, assegure o fornecimento de cuidados médicos apropriados.
- Todas as Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect®** devem ser descartadas em recipientes apropriados.
- Utilizar luvas descartáveis durante a punção da pele e quando manusear os tubos de coleta de sangue para minimizar risco de exposição.
- Não utilizar as Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect®** após a sua data de validade.
- Não utilizar as Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect®** se a aba de proteção tiver sido removida.
- Lancetas com uma profundidade de perfuração superior a 2 mm não são recomendadas para uso em crianças com menos de 1 ano de idade.
- Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect®** não são recomendadas para punção calcânea.

### Armazenamento

Temperatura de armazenamento recomendada: 4-36°C (40-97°F). Armazenar em local seco, longe do calor direto ou excessivo.

**NOTA:** Evitar a exposição direta à luz do sol.

### Manuseio


LEIA TODO O DOCUMENTO ANTES DE EXECUTAR A PUNÇÃO

#### Materiais necessários para coleta de amostras.

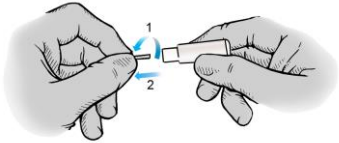
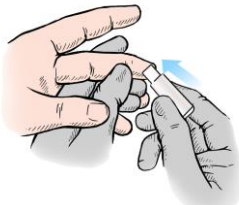

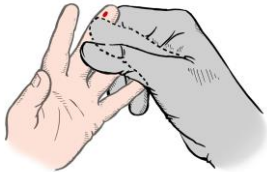
Certifique-se de que os seguintes materiais estejam prontamente acessíveis antes de realizar uma punção:

- Todos os tubos **MiniCollect®** necessários, identificados por tamanho, volume de aspiração e aditivo ou outros recipientes de coleta necessários. **NOTA:** O tubo para Coagulação **MiniCollect®** 9NC é usado apenas para coleta de sangue venoso.
- Luvas descartáveis e equipamentos de proteção individual.
- Etiquetas para identificação do paciente.
- Materiais para antissepsia.
- Curativo, se necessário.
- Recipiente de descarte apropriado para o descarte seguro do material utilizado.

A versão da Lanceta de Segurança Lancelino **MiniCollect®** deve ser baseada na espessura do tecido do paciente e no volume de sangue necessário.








Cor	Tamanho da agulha ou lâmina / comprimento	Volume de sangue atingível
Verde claro (agulha)	30G / 1.2mm	
Violeta (agulha)	25G / 1.5mm	
Azul (agulha)	21G / 1.8mm	
Verde (agulha)	21G / 2.4mm	
Amarelo (lâmina)	0.8mm / 2mm	

Uma toalha morna e úmida (ou outros dispositivos de aquecimento) a uma temperatura não superior a 42°C (108°F) pode ser usada para aquecer o local por 3 a 5 minutos.

1	Realizar a antisepsia no local da punção com antisséptico adequado. Esperar que a área seque adequadamente. Resíduos do antisséptico poderão causar hemólise da amostra, além de desconforto (ardor) ao paciente.	
2		Segurar a lanceta firmemente entre os dedos e remover a aba de proteção girando e puxando.
3		Segurar o local da punção firmemente para prevenir movimento inesperado e posicionar a lanceta sobre ele. <b>NOTA:</b> A Lanceta de Segurança Lancelino <b>MiniCollect</b> <sup>®</sup> não é recomendada para punção calcânea. Em seguida, pressionar suavemente a lanceta contra o local da punção até à sua ativação.
4		Imediatamente após a punção, remover a lanceta em um movimento ascendente e descartar em recipiente apropriado para material perfurocortante.
5		Recomenda-se limpar a primeira gota de sangue com uma compressa de gaze, visto que é provável que contenha excesso de fluido tecidual. Suavemente aplique pressão intermitente nos tecidos circundantes. Pressão forte e repetitiva (ordenha) <b>deve ser</b> evitada, visto que isto pode causar hemólise ou contaminação da amostra com líquido do tecido.

**NOTA:** Utilizar estas instruções em conjunto com as Instruções de Uso do **MiniCollect**<sup>®</sup> para Coleta de Sangue Capilar, se necessário.

#### Informação da etiqueta

	Fabricante		Método de esterelização (radiação)
	Prazo de Validade. Pode ser utilizado até o final do mês indicado.		Dispositivo de uso único
	Número do Lote		Consultar as Instruções de Uso
	Número de Referência		

#### Literatura:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard - Sixth Edition

Local da produção:  
HTL-STREFA S.A., 95-035 Ozorków,  
7 Adamówek St., Poland  
Made in Poland  
Distributed by Greiner Bio-One GmbH,  
Austria



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Phone +43 7583 6791

**Importador e Distribuidor:** Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  
Av. Afonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP.13.473-620 - Americana - SP  
FONE - (0xx)(19)-3468-9600 FAX - (0xx)(19)-3468-9601  
CNPJ 71.957.310 / 0001-47 - site: [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS 10290310055

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: [suporte@gbo.com](mailto:suporte@gbo.com)