



Portatubos de un solo uso PP HOLDEX<sup>®</sup>  
(estéril)



**Instrucciones de uso**

No disponible en EE. UU.

Solo aplicable al siguiente número de producto: 450263

**Uso previsto**

El portatubos de un solo uso PP HOLDEX<sup>®</sup> se utiliza en los procedimientos de extracción de sangre en combinación con dispositivos de extracción de sangre con puerto luer hembra.

**Descripción del producto**

Portatubos desechable de un solo uso de plástico estéril con conector luer macho excéntrico en la parte superior. Este portatubos facilita la extracción de sangre porque tiene una aguja de acero inoxidable con funda acoplada en el interior que permite atravesar el tapón de un dispositivo de extracción de sangre conectado.

**Manipulación**

1. Abra el envase con cuidado.
2. Sujete el portatubos con una mano y acople el luer macho de la parte superior del portatubos al luer hembra del accesorio de extracción elegido. Asegúrese de que esté firmemente acoplado.
3. Realice la extracción de sangre según las directivas de su centro.
4. Tras la extracción, deseche el producto como se indica a continuación.

**Almacenamiento**

Almacene el portatubos a 4–25 °C (40–77 °F).

**NOTA:** Evite la exposición a la luz solar directa. Superar la temperatura de almacenamiento máxima recomendada puede provocar el deterioro del portatubos.










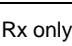
**Precauciones/advertencias**

- El dispositivo funcionará según lo previsto si se siguen las instrucciones correctamente.
- Consulte siempre las instrucciones de uso para cada accesorio individual.
- Póngase siempre guantes cuando use este dispositivo para extraer sangre.
- Compruebe la integridad del envase individual antes de su uso. Si el envase está roto, no utilice el dispositivo.
- Para un solo uso en un solo paciente únicamente. No reutilice este dispositivo debido al riesgo de infecciones nocivas.
- Mantenga las manos detrás de la aguja en todo momento durante su uso y eliminación.
- No toque nunca el interior del portatubos.
- No vuelva a colocar el protector de la aguja. Se recomienda el uso de accesorios de seguridad.
- Este dispositivo contiene caucho natural seco y está correspondientemente etiquetado en el envase.
- Compruebe siempre que los tubos se hayan llenado correctamente cuando se utilice un sistema de extracción de sangre evacuada.
- Solo el personal sanitario debidamente formado puede utilizar este producto y dicho uso debe efectuarse de acuerdo con las presentes instrucciones.

**Eliminación**

Deben observarse y respetarse las pautas generales sobre higiene y las normas legales para la eliminación adecuada de material infeccioso. Tras el uso, deseche el portatubos y todos los accesorios de un solo uso en recipientes para residuos biológicos apropiados.

**Información de etiquetado**

	Fabricante		Límite de temperatura
	Fecha de caducidad		No reutilizar
	Código del lote		Consulte las instrucciones de uso
	Número del catálogo		Contiene o hay presencia de látex de caucho natural
	Esterilizado mediante irradiación		Dispositivo con receta médica



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Straße 32  
4550 Kremsmünster  
Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Teléfono +43 7583 6791