

VACUETTE® Super-T

Stasband för engångsbruk

Användningsinstruktioner

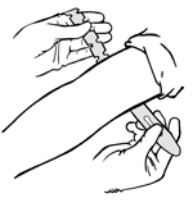


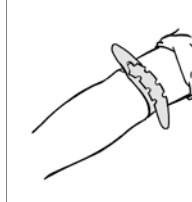
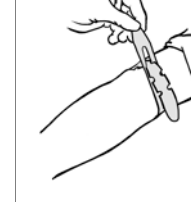
Avsedd användning

VACUETTE® Super-T används vid rutinmässig blodprovstagnung för att applicera tryck på armen och göra vener mer synliga och lättare att känna och hitta. Produkten ska bara användas av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal i enlighet med instruktionerna.

Produktbeskrivning

VACUETTE® Super-T stasband för engångsbruk tillverkad av silikon och belagd med talk. Den innehåller inga delar som är tillverkade av naturgummi och är ftalatfri.

Handhavand

				
1 Placera stasbandet 7.5-10 cm ovanför insticksstället.	2 Linda helt enkelt VACUETTE® Super-T runt armen och för ut ena änden genom en av skårorna.	3 Håll i båda ändar av stasbanden och dra den naggade änden genom skåran och släpp sedan.	4 Stasbandet låser sig då på plats.	5 När blodet fylls på i det första röret drar du i änden med skåra så frigörs den omedelbart.

Om en stasband har varit åtdragen i mer än 1 minut ska den frigöras och dras åt igen efter 2 minuter.¹

Försiktighetsåtgärder/Varningar

- Applicera inte så höga tryck att det arteriella blodflödet till extremiteten försämras.
- Släpp stasen så fort blodet börjat flöda in i röret.
- För lång och för kraftig stas kan bidra till hemolys.







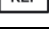
Förvaring

Undvik exponering mot direkt solljus.
Förvaringstemperatur: 4-25°C

Avfallshantering

Tas om hand enligt din institutions regler.

Märkning på produktetiketter

	Tillverkare		Temperaturgräns
	Utgångsdatum		Återanvänd inte
	Batchnummer		Konsultera användningsinstruktionerna
	Artikelnummer		

Litteratur:

¹CLSI GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition

Production location:
STARLIM Spritzguss GmbH,
Mühlstrasse 21,
4614 Marchtrenk, Austria
Distributed by Greiner Bio-One GmbH,
Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791