

Kullanım Talimatları
ABD'de satışa sunulmamaktadır!

Yalnızca şu ürün numarası için geçerlidir: 450263

Kullanım Amacı

HOLDEX® Tek Kullanımlık Tutucu PP, dişi luer portlu kan alma cihazlarıyla birlikte kan alma işlemlerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Ürün tanımı

Üstünde merkezden sapmış erkek luer bağlantılı steril, tek kullanımlık, atılabilir plastik tutucu. Takılı kan alma cihazının kapağı delinerek kan almayı kolaylaştırmak için tutucunun iç tarafına paslanmaz çelik, manşonlu bir iğne bağlanır.

Tutma

1. Ambalajı dikkatlice açın.
2. Tutucuyu bir elinizle tutarak, tutucunun üstünde bulunan erkek luer bağlantısını, seçilen kan alma cihazının dişi luer bağlantısına takın. Bağlantıların birbirine sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
3. Kan alma işlemi tesisinizin politikasına uygun olarak gerçekleştirin.
4. Kanı aldıktan sonra aşağıda açıklandığı gibi atın.

Saklama

Tutucuyu 4-25°C'de (40-77°F) saklayın

NOT: Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması, tutucunun bozulmasına neden olabilir.




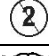



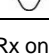


Önlemler/Dikkat Edilecek Konular

- Talimatlar uygun bir biçimde yerine getirildiğinde, cihaz amaçlandığı gibi çalışacaktır.
- Her bir aksesuar için mutlaka kullanım talimatlarını inceleyin.
- Bu cihazı kullanarak kan aldığınız sırada mutlaka eldiven takın.
- Kullanmadan önce ambalajların her birinin sağlığını kontrol edin. Yırtılan ambalajları kullanmayın.
- Yalnızca tek hasta üzerinde tek kullanımlıktır. Zararlı enfeksiyon riski nedeniyle tekrar kullanmayın!
- Kullanım ve atma sırasında ellerinizi daima iğnenin gerisinde tutun.
- Tutucunun iç tarafına kesinlikle dokunmayın.
- Bir iğnenin kapağını kesinlikle tekrar kapatmayın. Güvenlik aksesuarlarının kullanılması önerilir.
- Bu cihaz, doğal kuru kauçuk içerir ve bu bilgi ambalaj üzerinde etiketlenmiştir.
- Vakumlu kan alma sistemi kullanırken tüplerin doğru bir biçimde dolduğunu mutlaka kontrol edin.
- Ürün, bu talimatlar uyarınca yalnızca uygun eğitimi almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

Elden çıkarma

Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır. Tutucuyu ve tüm tek kullanımlık aksesuarları, kullandıktan sonra uygun bir biyolojik tehlike atık konteynırına birlikte atın.

Etiket bilgileri

	Üretici		Sıcaklık limiti
	Son kullanım tarihi		Yeniden kullanmayın
	Parti kodu		Kullanım talimatlarına başvurun
	Katalog numarası		Doğal kauçuk lateks içerir
	İşinleme yoluyla sterilize edilmiştir		Bu Cihaz Reçete İle Verilir



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Krefeld
Avusturya

www.gbo.com/preanalytcs
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791