


**FAUTEUIL DE PRELEVEMENT A HAUTEUR VARIABLE
HYDRAULIQUE**

51205

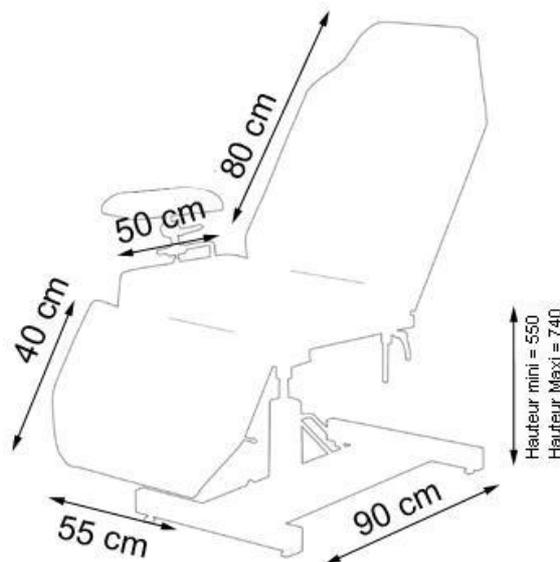

CARACTÉRISTIQUES :

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique
- Châssis composé d'une colonne télescopique
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, largeur 550, non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique.

Sellerie standard avec coutures apparentes

- Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 2 vérins à gaz
- Equipé d'une paire de gouttière prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation.

Montée du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne à mi-course

Descente du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne au maximum de sa course et maintenir.

Rotation du fauteuil : Blocage de cette rotation en levant la pédale au maximum


- Position de Trendelenburg
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique

OPTIONS :

- **ACC537** : Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage



- **ACC105** : Paire d'étriers

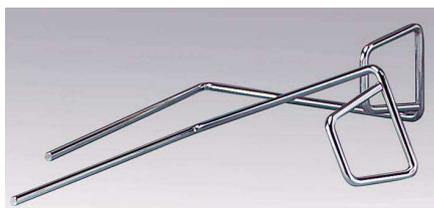

- **ACC964** : Paire de repose jambes



- **SL0964** : Housse pour repose jambe



- **ACC100** : Appuis-bras



- **ACC110POLY** : Gouttières en polyuréthane



- **ACC54005** : Têteière demi-lune

- **ACCTETERGO** : Têteière ergonomique



- **ACC113** : Paire de poignées

- Commande par télécommande manuelle


- **ACC514** : Protection plastique transparente pour l'assise et la jambière



- **ACC514-GOUT** : Protection plastique pour une gouttière

- **ACC9505** : 4 roulettes à freins diamètre 50mm

- **ACC125** : Porte rouleau

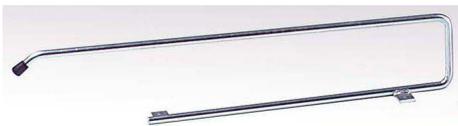

- **ACC910/PLAT02** : Plateau inox



- **ACC32012** : Tige porte sérum 2 crochets



- **ACC516**: Réglage simultané du dossier et de la jambière