

FICHE TECHNIQUE

Page 19 Catalogue Général 2017

Écouvillons stériles en tube

codes 300250, 300261, 300252, 300251, 300253, 300254, 300263, 300250.1

Directive 93/42/CEE. Dispositifs Médicaux

code	description	quantité par carton	Poids carton (kg)	Volume carton (m ³)	Cartons/pallet
DR47 300250	bois + coton	4 x 500	14,76	0,060	24
300261	PS cassable + coton	4 x 500	14,90	0,070	24
300252	PS cassable + viscose	4 x 500	15,00	0,066	24
300251	aluminium + coton	4 x 500	15,00	0,066	24
300253	aluminium + viscose	4 x 500	13,90	0,070	24
300254	Twisted aluminium + viscose	4 x 500	13,90	0,070	24
300263	PS cassable + polyester	4 x 500	15,00	0,062	24
300250.1	bois + coton cardé	4 x 500	14,00	0,070	24



USAGE SPECIFIQUE ET DESCRIPTION

L'écouvillon stérile sert en usage clinique à la prise d'échantillons de produits biologiques. Il est plus particulièrement indiqué pour préparer des frottis qui, après coloration, sont observés au microscope. Il permet également d'effectuer des isollements en milieux de culture.

Sa date de péremption est de 4 ans à partir de la date de stérilisation (par oxyde d'éthylène). Le certificat de stérilisation peut être livré sur demande.

Autre application notable: son utilisation pour ensemercer des plaques par dissémination à la surface du milieu (antibiogrammes par exemple).

Date d'expiration: 48 mois à partir de la date d'stérilisation

Nombreux autres usages: nettoyage de cavités biologiques, recoins peu accessibles, etc. Les écouvillons destinés au recueil d'échantillons microbiologiques en blessures ouvertes sont fabriqués selon la norme UNE-EN ISO 13485 et possèdent la Marque CE, Classe IIa. Une copie de ces certificats peut être fournie sur simple demande.

La fabrication de haute technologie de nos écouvillons, réalisée en salle blanche dans un environnement exempt à 99,9% de particules, les processus de stérilisation qui s'ensuivent, ainsi que les contrôles de Qualité exhaustifs, nous ont permis d'obtenir la Marque CE, classe IIa, laquelle autorise le produit à être utilisé comme produit invasif lors d'opérations chirurgicales.

RÉALISÉ



Cristina Rojas
Département du Marketing

VÉRIFIÉ



Anna Mir
Directeur Technique du Développement, Qualité et Environnement

APPROUVÉ



Mónica Torras
Directeur des Ventes et du Marketing

FICHE TECHNIQUE

Écouvillons stériles en tube

codes 300250, 300261, 300252, 300251, 300253, 300254, 300263, 300250.1

MODE D'EMPLOI

1. Retirez l'écouvillon du tube en l'étirant à travers le bouchon (exercez une pression sur le bouchon en tournant, tout en étirant, cela facilite l'ouverture).
2. Prends l'échantillon.
3. Insérez le coton-tige dans le tube.
4. Remplissez l'étiquette avec les détails de l'échantillonnage et envoyez-la au laboratoire.

COMPOSANTS

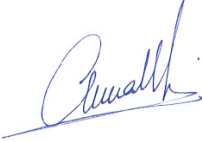
- Un tube stérile à fond rond, bouché, de 13 x 165 mm fabriqué en polypropylène indéformable.

- Un écouvillon à tige en bois, aluminium, ou PS cassable, muni d'un bouchon de sécurité garantissant une fermeture parfaite du tube (bouchon en polyéthylène de couleur rouge).

- Une étiquette qui unit le bouchon et le tube, permettant d'indiquer le nom du patient, la date et heure de la prise d'échantillon, numéro, docteur, nature de l'échantillon et nom de l'hôpital. Sont également inscrits la date de péremption, le numéro de lot, la description du produit et sa marque

Mesures en millimètres.

	codes	Longueur tige	Ø tige sans bouchon	Ø tête	Ø interne tube	Ø externe tube	Longueur tube + bouchon
DR47	300250	150	2,5	5	10,94	12,85	145 + 20
	300261	150	2,5	5	10,94	12,85	145 + 20
	300252	150	2,5	4	10,94	12,85	145 + 20
	300251	150	0,9	1,5	10,94	12,85	145 + 20
	300253	150	0,9	1,5	10,94	12,85	145 + 20
	300254	147	0,6	3	10,94	12,85	145 + 20
	300263	150	2,5	5	10,94	12,85	145 + 20
	300250.1	150	2,5	5	10,94	12,85	145 + 20

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
 Cristina Rojas Département du Marketing	 Anna Mir Directeur Technique du Développement, Qualité et Environnement	 Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing