

FICHE TECHNIQUE

Flacons carrés avec graduation jusqu'à 2,7 l

codes 407005 - 407005/T - 407005.0 - 407006 - 407006/T

code	couleur flacon	bouchon	présentation	sachet unitaire	stérile	Ø ouverture interne mm	quantité par carton	poids du carton (kg)	volume du carton (m ³)
407005	naturelle	blanc, avec jointe	non vissé	non	non	64	34	5,52	0,150
407005/T	naturelle	blanc, avec jointe	vissé	non	non	64	34	5,52	0,150
407005.0	naturelle	blanc, avec jointe	vissé	oui	STERILE R	64	34	5,70	0,152
407006	marron	blanc, avec jointe	non vissé	non	non	64	34	5,70	0,154
407006/T	marron	blanc, avec jointe	vissé	non	non	64	34	5,50	0,150

Directive 98/79/CE. Dispositif médicaux de diagnostic "in vitro"



DESCRIPTION ET UTILISATION

Utilisation en hôpital et en ambulatoire, comme conteneur pour la collecte de fluides biologiques humains (urine), contrôle volumétrique de l'échantillon dans les cliniques externes, collecte d'urine pendant 24 heures chez les patients hospitalisés et analyse in vitro subséquente de celui-ci.

Flacons carrés de 2,7 litres en polyéthylène haute densité. Corps translucide naturel ou brun opaque. Bouchon fileté en polyéthylène haute densité en blanc. Le bouchon a un joint de moule interne qui agit comme un obturateur et garantit une étanchéité totale de la bouteille.

Graduation de moule. Le corps du flacon incorpore une rainure latérale pour une meilleure manipulation.

La bouche incorpore une bague extérieure de moule qui évite que lors de la décantation du liquide, une goutte puisse tomber.

Les flacons sont fournis bouchés, sauf les codes 407005 et 407006, qui sont fournis avec les bouchons dans un sac séparé.

Dimensions

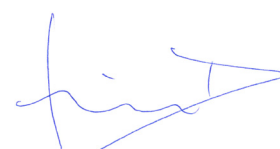
Diamètre int. de la bouche:	64,0 ± 1,0 mm
Longueur x largeur:	130,0 x 126,0 ± 1,0 mm
Hauteur sans bouchon:	249,0 ± 1,5 mm
Hauteur avec bouchon:	253,0 ± 1,5 mm
Gradué à:	2.700 ml (dans des intervalles de 50 ml) ± 5%
Capacité totale:	3.030 ± 50 ml

RÉALISÉ


 David Campos
Département du Marketing

VERIFIÉ


 Anna Mir
Directeur Technique, du Développement et Qualité

APPROUVÉ


 Mònica Torras
Directeur des Ventes et du Marketing