

Your **Power** for Health


greiner bio-one



VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle

Nichts für Leute, die kein
Blut sehen können

VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle

Die VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle mit optischer Punktionskontrolle stellt eine wesentliche Vereinfachung für das Blut entnehmende Personal dar.

Die Nadel ist in der Mitte mit einem transparenten Kunststoffteil ausgestattet, der als Sichtfenster dient.

Bei erfolgreicher Venenpunktion färbt sich dieser Kunststoffteil durch den einsetzenden Blutfluss rot.

Die VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle gewährleistet eine sichere und für den Patienten weitestgehend schonende Blutentnahme. Das Auffinden des Venenlumens wird durch die optische Punktionskontrolle im Sichtfenster deutlich einfacher.

Das für den Patienten mitunter schmerzhaft Bewegungen der Kanüle im Einstichkanal kann dank der VACUETTE® VISIO PLUS Punktionshilfe vermieden werden.

Der spezielle Facettenschliff der Nadelspitze erleichtert die Durchdringung des Gewebes.

Optisch unterscheiden sich die VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen durch transparente Nadelschutzhülsen von den VACUETTE® Standard Kanülen.

VACUETTE® VISIO PLUS – die Innovation von Greiner Bio-One in Sachen Punktionsicherheit.

Art.Nr.	Bezeichnung	Größe	Verpackung Box/Karton
450040	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle grün, steril, Latex-frei	21G x 1 ½" / 0,8 x 38 mm	100 Stk./2000 Stk.
450041	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle schwarz, steril, Latex-frei	22G x 1 ½" / 0,7 x 38 mm	100 Stk./2000 Stk.
450042	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle grün, steril, Latex-frei	21G x 1" / 0,8 x 25 mm	100 Stk./2000 Stk.
450043	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle schwarz, steril, Latex-frei	22G x 1" / 0,7 x 25 mm	100 Stk./2000 Stk.
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS einzelverpackt, steril <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	21G x 1 ½" / 0,8 x 38 mm	30 Stk./300 Stk.
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS einzelverpackt, steril <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	22G x 1 ½" / 0,7 x 38 mm	30 Stk./300 Stk.
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS einzelverpackt, steril <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	21G x 1" / 0,8 x 25 mm	30 Stk./300 Stk.
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS einzelverpackt, steril <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	22G x 1" / 0,7 x 25 mm	30 Stk./300 Stk.

Der spezielle Facettenschliff der Nadelspitze erleichtert die Durchdringung des Gewebes.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS


Einfach praktisch.

Der VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter ist besonders für die tägliche Blutentnahmeroutine geeignet. Ohne Änderung der Entnahmetechnik bietet der Halter Schutz vor Nadelstichverletzungen.

Als Kombiprodukt mit der VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle bietet der VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS Sicherheitsröhrchenhalter folgende Features:

- Vormontierte Kanüle samt Halter in steriler Blisterverpackung.
- Drehbarer Sicherheitsschild: Für eine bestmögliche Positionierung während der Blutentnahme.
- Transparentes Kanülensichtfenster für visuelle Punktionskontrolle.
- Das Einschrauben der Kanüle entfällt.
- Die praktische Komplettlösung spart Zeit.
- Die Handhabung wird optimiert.

Sichere Entsorgung durch eingeschlossene Kanüle.

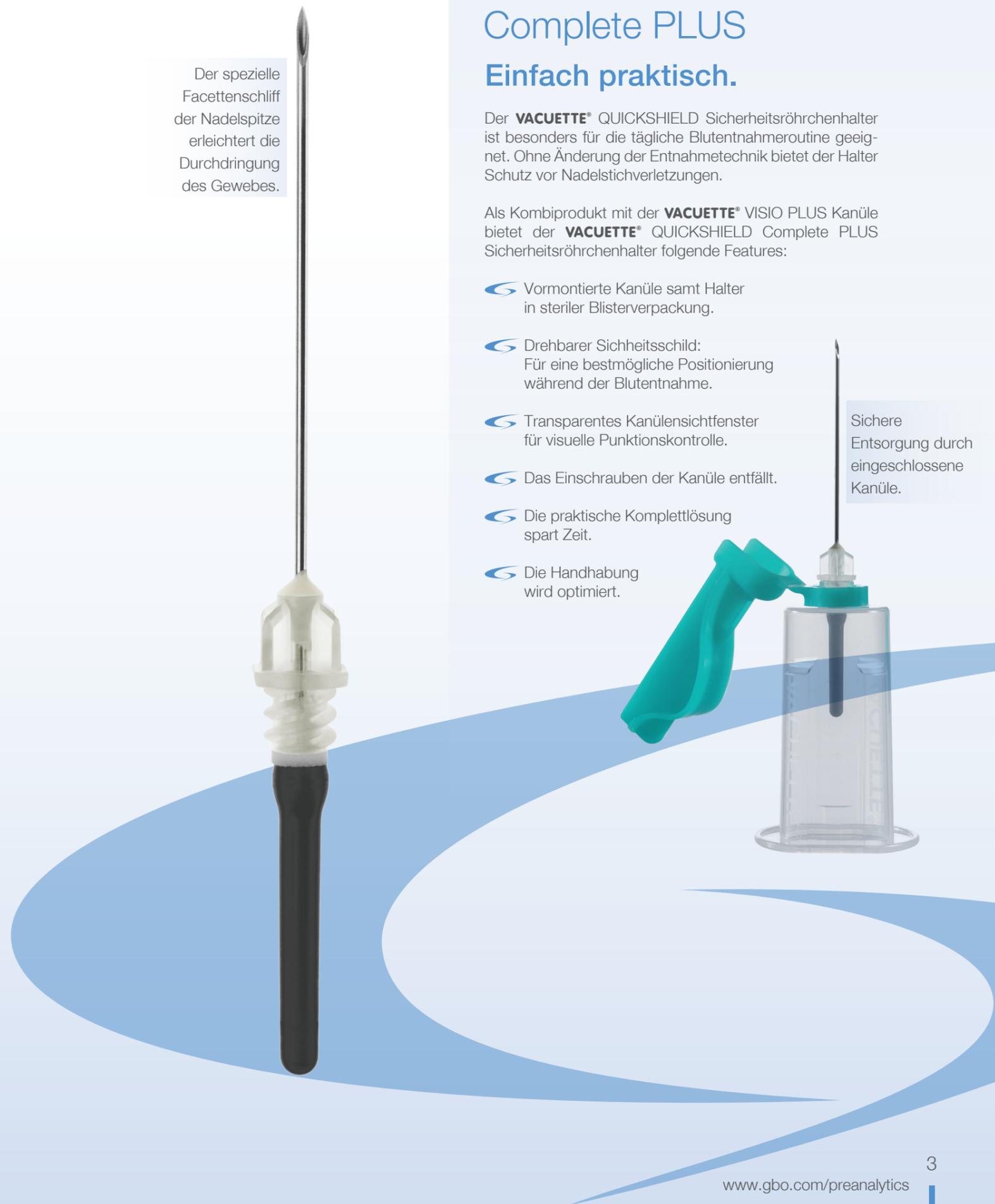



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.gbo.com/preanalytics oder kontaktieren Sie uns:

Österreich (Firmenzentrale)

Greiner Bio-One GmbH
Tel +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-Mail office@at.gbo.com

Frankreich

Greiner Bio-One SAS
Tel +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-Mail office@fr.gbo.com

Niederlande

Greiner Bio-One B.V.
Tel +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Ungarn

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tel +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

Brasilien

Greiner Bio-One Brasil
Tel +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-Mail office@br.gbo.com

Großbritannien

Greiner Bio-One Ltd.
Tel +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Schweiz

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tel +41 71 228 55 22
Fax +41 71 228 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Tel +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-Mail info@us.gbo.com

China

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tel +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

Indien

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tel +91 120 456 8787
Fax +91 120 456 8788
E-Mail info@gboindia.com

Spanien

VACUETTE Espana S.A.
Tel +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

Deutschland

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tel +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

Japan

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Tel +81 3350 58875
Fax +81 3505 8974
E-Mail info@jp.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tel +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail office@th.gbo.com