

making a difference



MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE

VACUETTE®

Linea di trasporto

Il trasporto di campioni
non è mai stato così facile.



greiner
BIO-ONE

TRASPORTO DI CAMPIONI SICURO

secondo le
linee guida

Tutti i nostri prodotti sono
stati ottimizzati per l'uso
quotidiano nella clinica.

SICUREZZA PER IL SUO PERSONALE

Con i prodotti della linea di trasporto VACUETTE® è possibile trasportare campioni di laboratorio come sangue, urina o saliva in modo sicuro e, se necessario, refrigerato dal prelievo al laboratorio.


Anche il trasporto di provette VACUETTE® per la stabilizzazione di virus contenenti campioni con SARS CoV-2, influenza A o influenza B, con la

linea di trasporto VACUETTE® è sicuro: il personale rimane costantemente e professionalmente protetto da potenziali infezioni.

Tutti i prodotti sono stati sviluppati per la faticosa routine ospedaliera quotidiana e sono quindi facili da maneggiare, facili da sterilizzare, robusti e ottimizzati per un peso ridotto.

PRODOTTI DELLA LINEA DI TRASPORTO:

- / Scatole di trasporto VACUETTE®
- / Contenitori di trasporto VACUETTE®
- / Rack e inserti di schiuma espansa per tubi di raccolta del sangue
- / Cooler pack
- / Borse e cartoni di trasporto

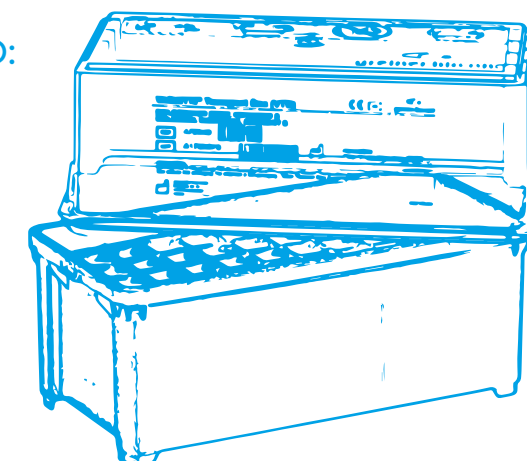

NESSUN COMPROMESSO SULLA QUALITÀ DEI CAMPIONI

I campioni medici sono un bene prezioso. Preservare la loro integrità è un requisito fondamentale per ottenere risultati di analisi di alta qualità. Per questo, i campioni di laboratorio vengono costantemente protetti dalla luce nel sistema di trasporto VACUETTE® e, se

necessario, possono essere raffreddati in modo efficace e duraturo direttamente nel recipiente secondario mediante borse di trasporto isolate termicamente e cooler pack altamente efficaci. Affinché la qualità dei risultati di laboratorio non dipenda dal tempo.

Un trasporto adeguato
e corretto del campione
è un prerequisito per
risultati analitici
coerenti.



TESTATO DA ISTITUTI INDIPENDENTI

I rapporti dei test si trovano nel centro di download del nostro sito web www.gbo.com

La linea di trasporto VACUETTE® è certificata per il trasporto di sostanze biologiche della categoria B secondo la norma UN 3373. Tutti i singoli componenti sono conformi all'ADR/RID (packing instruction P650), IATA-DG, ICAO-TI e il codice IMDG e sono stati testati per l'idoneità da istituti indipendenti e accreditati.



Scatola di trasporto VACUETTE®

Le scatole da trasporto VACUETTE® in polipropilene (PP) sono impilabili e adatte al trasporto di un massimo di 40 provette. La scatola è a tenuta di liquidi e ha una chiusura a scatto per un'apertura e una chiusura facili e veloci. L'inserto di schiuma espansa è adatto a provette di diametro 9-16 mm.



Contenitore di trasporto VACUETTE®

Il nostro contenitore di trasporto VACUETTE® è un pratico contenitore in polipropilene (PP) per il trasporto di un massimo di 12 provette. Il contenitore è chiuso con un tappo a vite ed è a tenuta di liquidi. L'inserto di schiuma espansa è adatto a provette di diametro 9-16 mm.



Borse di trasporto Isotherm

Le borse di trasporto Isotherm sono disponibili in diverse dimensioni per il trasporto di diverse scatole o contenitori. Le borse di trasporto sono robuste, leggere e aiutano a mantenere la temperatura bassa grazie al materiale esterno termoisolante. Se necessario, si possono usare cooler pack supplementari.

TRE COMPONENTI

per il trasporto
sicuro di materiali
biologici


TRASPORTA CORRETTAMENTE!

Secondo le linee guida internazionali ADR/RID, IATA, IMDG Code e ICAO-TI, i contenitori di spedizione per il trasporto di sostanze biologiche della categoria B (UN 3373) vanno composti da tre componenti.

1 IMBALLAGGIO PRIMARIO

A tenuta di liquidi fino a una differenza di pressione di 95 kPa.


- / Provette per il prelievo di sangue VACUETTE®
- / Provette per urina VACUETTE®
- / Provette Greiner Bio-One per il trasferimento della saliva
- / Provette per la stabilizzazione virus VACUETTE®
- / Provette VACUETTE® SECONDARIE con tappo di chiusura

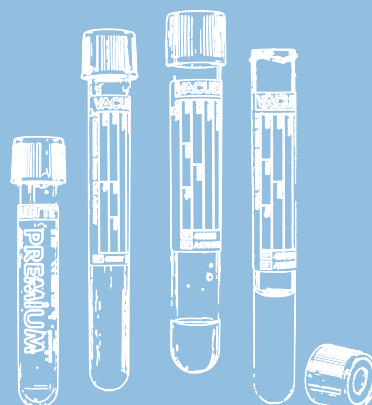

2 IMBALLAGGIO SECONDARIO

Protegge i campioni e contiene materiale assorbente in caso di perdite.

- / Scatola di trasporto VACUETTE® (VTB)
- / Contenitore di trasporto VACUETTE® (VTC)

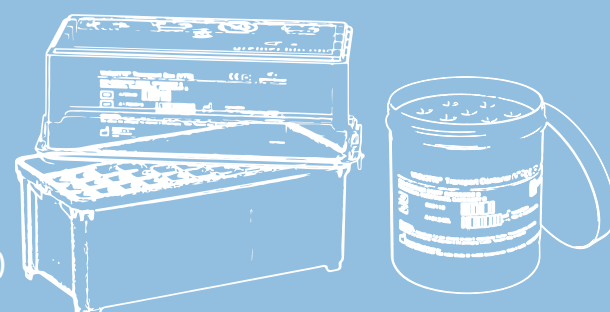

3 IMBALLAGGIO TERZIARIO

Protegge dagli impatti meccanici, dagli sbalzi di temperatura e dalla luce. Etichettatura standardizzata.

- / Cartone di spedizione
- / Borsa di trasporto Isotherm



SOLUZIONI DI PRODOTTO FLESSIBILI

VACUETTE®

Scatola di trasporto (VTB)*

- / Scatola robusta di plastica in polipropilene
- / Per il trasporto fino a 40 provette di campione
- / In opzione con scatola di trasporto
- / Con pratica e rapida chiusura clic
- / A tenuta di liquidi grazie all'anello di tenuta
- / Inserto assorbente
- / Supporto per il cooler pack
- / Impilabile



VACUETTE®

Contenitore di trasporto (VTC)*

- / Contenitore maneggevole in polipropilene
- / Per il trasporto di un massimo di 12 provette di campione
- / In opzione con cartone di trasporto
- / Con tappo a vite
- / Inserto assorbente



* Si prega di notare che la scatola di trasporto VACUETTE® (VTB) e il contenitore da trasporto VACUETTE® (VTC) servono come imballaggio secondario e non sono conformi all'ADR/RID, IATA-DG, ICAO-TI e IMDG Code senza scatola di trasporto o borse di trasporto adeguate. Greiner Bio-One non si assume alcuna responsabilità per il trasporto improprio. Le linee guida si applicano al trasporto pubblico stradale, ferroviario, aereo e navale.

RACK


per provette di raccolta del sangue

- / Rack pratico per fissare 10 provette di campioni con diametro esterno di 11 - 17 mm
- / 3 rack si inseriscono nelle fessure previste nella scatola di trasporto VACUETTE® (VTB)
- / Autoclavabile
- / Pulizia con i comuni disinfettanti e detergenti
- / Adatto per l'archiviazione di campioni



INSERTI DI SCHIUMA ESPANSA

- / Per 40 (scatola di trasporto) o 12 (contenitore di trasporto) provette di campione
- / Inserti di schiuma espansa per le provette con diametri da 9 a 16 mm
- / Autoclavabile a 120 °C secondo ASTM D 3574

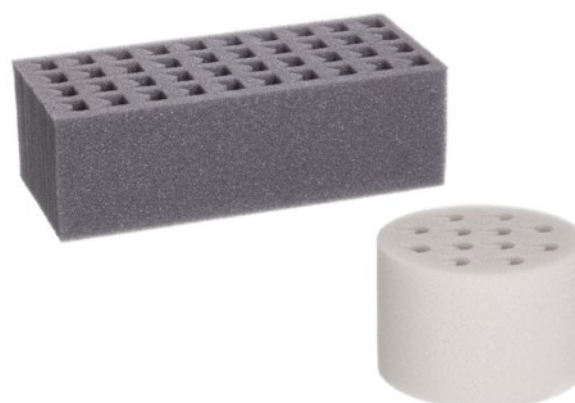

OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO

- / Cooler pack per scatola di trasporto VACUETTE® (VTB) così come per le borse di trasporto Isotherm
- / cooler pack (rotondo) per contenitore di trasporto VACUETTE® (VTC)
- / Extra piatto
- / Riutilizzabile grazie al raffreddamento
- / Il cooler pack è conforme alla norma DIN 18864



ISOTHERM

Borse di trasporto

- / Il materiale isolante rende possibile il trasporto di campioni raffreddati
- / Testato secondo i requisiti delle istruzioni di imballaggio P650 (ADR/RID, IATA-DG, ICAO-TI e IMDG-Code)
- / Grande finestra di visualizzazione per i documenti di trasporto o ulteriori informazioni aggiuntive sul retro
- / Design robusto ed estremamente leggero

DISPONIBILI IN DIVERSE DIMENSIONI:

- / Borsa rettangolare per 1 pezzo VTB
- / Borsa rettangolare per 2 pezzi VTB
- / Borsa rettangolare per 3 pezzi VTB
- / Borsa rettangolare per 4 pezzi VTB
- / Borsa rotonda per 1 pezzo VTC



CARTONI DI TRASPORTO

- / Cartone di spedizione per scatola di trasporto VACUETTE® (VTB)
- / Cartone di spedizione per contenitore di trasporto VACUETTE® (VTC)
- / Robusto cartone per il trasporto
- / Etichettato secondo gli standard





TRASPORTO SICURO DEI CAMPIONI

Il personale rimane costantemente e professionalmente protetto da potenziali infezioni.



TESTATO E CERTIFICATO

Tutti i prodotti della linea di trasporto VACUETTE® sono testati e certificati da un istituto indipendente e accreditato.



AMPIA VARIETÀ DI ACCESSORI

Greiner Bio-One Le offre tutto il necessario per un trasporto sicuro dei campioni.

shop.gbo.com

Trova questi e altri prodotti nel nostro shop online

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Scatole di trasporto VACUETTE®

Codice	Descrizione	Inner / Outer [Qtà.]
472001	Scatola di trasporto VACUETTE® (VTB), incl. inserto di schiuma espansa per 40 provette, incl. cartone di trasporto HK0190	1 / 10
472040	Scatola di trasporto VACUETTE® (VTB), incl. inserto di schiuma per 40 provette	1 / 10
472010	Inserto di schiuma espansa per scatola di trasporto VACUETTE® (VTB), per 40 provette (tutte le misure)	- / 168
472016	Cooler pack per scatola di trasporto VACUETTE® (VTB)	- / 104
472011	Rack per provette di raccolta del sangue, 10 posizioni, autoclavabile	1 / 100
472015	Inserto assorbente per VTB / VTC	- / 2.500

Contenitori di trasporto VACUETTE®

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Inner / Outer [Qtà.]
800105	Contenitore di trasporto VACUETTE® (VTC), incl. inserto di schiuma espansa per 12 provette, incl. cartone di trasporto HK0259	128,7 mm	113 mm	1 / 12
800110	Contenitore di trasporto VACUETTE® (VTC), incl. inserto di schiuma espansa per 12 provette, senza cartone di trasporto HK0259	128,7 mm	113 mm	1 / 12
800101	Inserto di schiuma espansa per contenitore di trasporto VACUETTE® (VTC), per 12 provette	70 mm	107 mm	- / 336
800102	Contenitore di spedizione volume 60 ml con tampone assorbente e tappo a vite, senza simbolo	127 mm	28 mm	- / 300
472017	Cooler pack per contenitore di trasporto VACUETTE® (VTC)	12 mm	107 mm	- / 150

Borse di trasporto VACUETTE®

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Larghezza	Colore prodotto	Inner / Outer [Qtà.]
472020	Scatola di trasporto VACUETTE® (VTB), piccola (1 pezzo)	250 mm	300 mm	170 mm	● blu scuro	1 / 16
472030	Scatola di trasporto VACUETTE® (VTB), media (2 pezzi)	250 mm	320 mm	300 mm	● blu scuro	1 / 8
472023	Scatola di trasporto VACUETTE® (VTB), media (3 pezzi)	250 mm	480 mm	300 mm	● blu scuro	1 / 4
472024	Scatola di trasporto VACUETTE® (VTB), grande (4 pezzi)	250 mm	640 mm	300 mm	● blu scuro	1 / 4
472022	Cartone di trasporto VACUETTE® (VTC), piccolo (1 pezzo)	160 mm	145 mm		● blu scuro	1 / 50

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.
Media owner: Greiner Bio-One GmbH / **Manufacturer:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

981222 it [rev.00 07.2021]


greiner
BIO-ONE