

making a difference

EN DEĞERLİ NUMUNELERİNİZ İÇİN

MINICOLLECT®

Kapiller Kan Alma Sistemi

Geniş analiz yelpazesi için az kan
örnekleri toplamamanın nazik yöntemi.


greiner
BIO-ONE

MiniCollect®, kapiler kanın
toplanması, taşınması
& çalışılması için ideal
bir çözüm sistemidir.

MiniCollect® tüpü, kan
damlacıklarının kolayca
ve hijyenik bir şekilde
toplanmasını sağlayan
entegre bir kürek içerir.

AZ KAN HACMİNDEKİ ÖRNEKLERİ TOPLAMANIN NAZİK YÖNTEMİ

MiniCollect® geniş analiz
yelpazesi için az kan hacminde
örnekleri toplamada nazik bir
yöntem sunar. Sistem, küçük
çocuklar, yaşlı hastalar ve
hassas damarları olan hastalar
için mükemmel şekilde
uygundur.


MiniCollect®, venöz kan
alımının özellikle zor olduğu
veya olumsuz olduğu durum-
larda da tavsiye edilir. Hassas
damar koşulları için, sıklıkla

kan örneği alınan hastalar veya
ciddi yanıkları olan kişiler için
MiniCollect® sistemi ile kapiler
kan alma, venöz kan alımına iyi
bir alternatif sunar.

MiniCollect® tüpü, kan damla-
cıklarının kolayca ve hijyenik
bir şekilde toplanmasını
sağlayan entegre bir kürek
içerir. Bir kapiler boru veya
başka bir aparatın kullanımına
ihtiyaç duyulmaz.

MINİMUM TUTUNMA İÇİN MAKSİMUM TÜP GENİŞLİĞİ.

- / Tüp genişliği ile verimli bir kan akışı sağlanır
- / Artan tüp çapı ile örneğin karıştırılması kolaylaşır
- / Tüp duvarında minimum kan tutunması sağlar

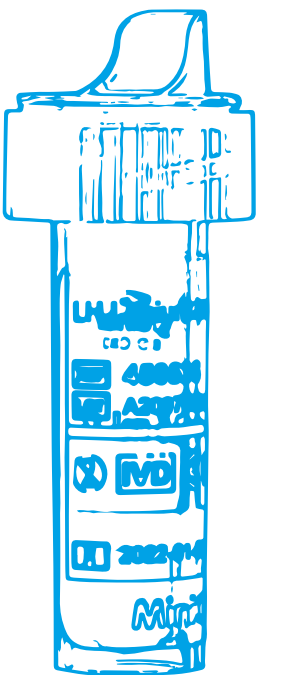


AZ KAN HACMİ İLE EN GENİŞ ANALİZ YELPAZESİ

Kapiler kan numunesi, daha basit ve daha az invaziv numune alma prosedürü nedeniyle örnek materyali olarak giderek daha popüler hale gelmektedir. Avantajlarından biri düşük kan hacmidir. Az miktarlar, çeşitli parametrelerin test edilebilmesi için yeterlidir. Kapiler kan toplanması Hasta Kan Yönetimi yaklaşımını

destekler: Mümkün olduğunca az kan, gerektiği kadar kan. Bazı sebepler ile venöz kan almanın mümkün olmadığı durumlarda, kapiler kan alma iyi bir alternatiftir. Sık kan almaya ihtiyaç duyulan hastalarda ve çocuklarda alınan kan miktarının en aza indirilmesi önemlidir.

MiniCollect®, küçük çocuklar, yaşlı ve hassas damar yapıları olan hastalarda son derece uygundur.

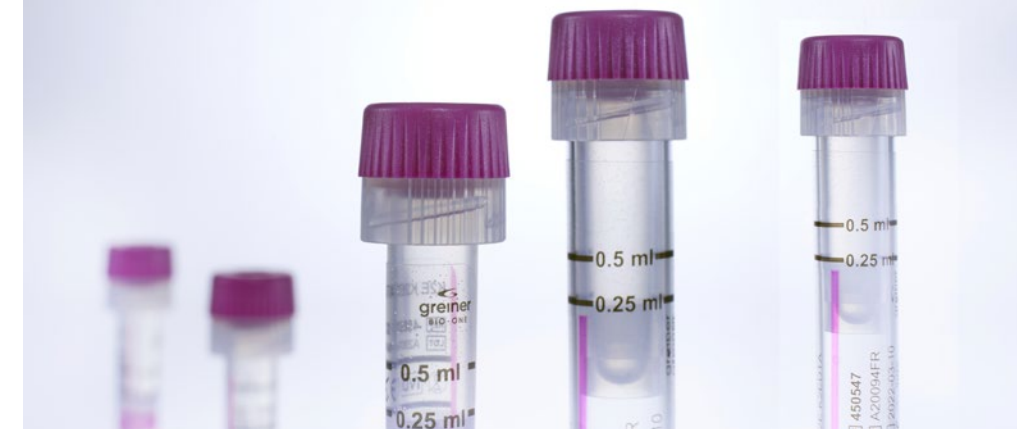

İKİ FARKLI HACİM TEK BİR TÜPTE

Bir araya getirilen farklı dolun hacimleri numunenin işlenmesini kolaylaştırır.

EDTA ve serum tüpleri için bir araya getirilen farklı dolun hacimleri, numune işlemeyi kolaylaştırır ve malzeme lojistik taleplerini azaltır. Katkı maddesi ile kapiler kan örneğinin doğru karışım oranını sağlamak için tüplerin dolun işaretleri arasına doldurulması yeterlidir.



Şeffaf etiketler ve renk-kodlu kapaklar.

Çeşitli renkte kapaklar, ISO 6710 uluslararası renk kodlarıyla uyumludur.

Renkli etiket metni, kapak çıkarıldığında bile numune tipinin tanımlanabilmesini sağlar. Şeffaf etiket, numune materyalinin görsel olarak incelenmesine izin verir.



Taşınmada güvenli kapaklar.

Kapaklar kesinlikle sızdırmazdır ve numune materyali kaybı olmaksızın pnömatik sistemler ile doğrudan taşınabilir.

MiniCollect® tüpleri aşağıdaki talimatlara göre sızdırmazdır ISO 6710 Annex C.



Kullanıma hazır cihaz.

Entegre kürek ile, kan almada kapiler yada ek aparatlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu yapı, geleneksel kapiler kan alma sistemlerine kıyasla verimliliği artırır.

Stok yönetimi ve planlaması ek aksesuarlar gerekmediği için kolay ve verimli bir şekilde yapılabilir.



MiniCollect® Complete standart bir santrifüj cihazıyla çalışabilmektedir

MINICOLLECT® TAŞIYICI TÜP İLE UYUMLUDUR

MiniCollect® tüpleri bir PREMIUM taşıyıcı tüpe yerleştirilebilir. Bu kombinasyon, standart bir 13 x 75 mm tüpün boyutlarına karşılık gelir.

Halihazırda taşıyıcı tüp ile birleştirilmiş ve geri çıkmayacak bir şekilde üretilmiş olan MiniCollect® Complete versiyonu ile, -özellikle numunenin otomatik analizi için çok sayıda avantaj sağlanmaktadır.

Standartlaştırılmış tüp boyutu, standart tüp etiketi formatlarıyla tanımlamaya olanak tanır. MiniCollect® tüpleri, taşıyıcı tüplerle birlikte standart bir santrifüjde çalışabilir.

Tüpler kapalıyken delinebilir bir kapağa sahiptir ve sızdırmazdır. Analizden önce kapağın çıkarılmasına gerek yoktur, böylece işlemin daha kolay ve hijyenik şekilde gerçekleşmesi sağlanır.

TAM UYUMLULUK

Otomatik laboratuvar analizleriniz için, önceden barkodlanmış versiyonları da mevcuttur




OTOMATİK ANALİZ İÇİN UYGUNDUR

Birçok cihazda hem venöz hem de kapiler kan örnekleri aynı yöntemle analiz edilebilir.



ANALİZ ÖNCESİ EK İŞLEMLERE GEREK YOKTUR

MiniCollect® Complete tüpleri CLSI AUT01-A uyumludur. Tüpler 13 x 75 mm boyutlu raklara uygun ve laboratuvarlarda otomatik analiz için tam uyumludur.

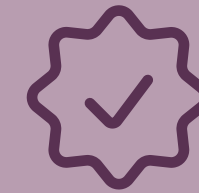

BİRÇOK LABORATUVAR CİHAZLARINDA VALİDE EDİLMİŞTİR

MiniCollect® Complete tüpleri çok çeşitli laboratuvar cihazları üzerinde valide edilmiştir.

OTOMASYON

Hem genç hem
de yaşlı hastalar
için nazik ve
şefkatli kan alımı



Lansetler, delme derinliğinin ve uygulamanın kolay tanımlanması için renk kodludur

EMNİYETLİ LANSET ÇEŞİTLİLİĞİ

MiniCollect® lansetler, delme yarasının olabildiğince az tutulmasını sağlamak için çok çeşitli delme derinliği ve bıçak boyutları / iğne kalınlıkları şeklinde sunulmaktadır.

Emniyet mekanizması yatay bıçak / iğnenin otomatik olarak geri çekilmesini sağlar. Delme işleminden sonra geri çekilebilir ve plastik muhafaza

içine güvenli bir şekilde alınır. Özellikle en genç hastalarımızla ilgilenirken, gereksiz endişe yaratmamak için prosedürün mümkün olduğunca hassas olması şarttır.

Emniyet mekanizması bıçağı/ iğneyi gizler, böylece kan alımı hastalar için daha rahatlatıcı bir ortamda gerçekleşir.



Lancelino Güvenlikli Lanset
(yüzey aktivasyonlu)

Ergonomik, yuvarlak tasarımı rahat bir kavrama sağlar. Aktivasyon için, delme bölgesine temas yapılır ve bastırılır.



Emniyetli Lanset

Tutarlı bir delme yönü için standardize bıçak konumu sağlar. Aktivasyon için, butona bastırılır.

KOAGULASYON TESTLERİ İÇİN

venöz kan
gerekmektedir

MINICOLLECT® KOAGULASYON TÜPÜ

YALNIZCA VENÖZ KAN İLE KULLANILMAKTADIR:

1



Venöz kanı tüp içerisine
transfer ediniz.

2



Orjinal kapağıyla birlikte
tüpü kapatınız.

3



Kanı alır almaz tüpü
nazikçe alt-üst ediniz.

EN AZ KAN HACMİ

Venöz kan almada da
en az hacimde kan
miktarı yeterlidir.



1



Kan alma bölgesinin yeri
ısıtılır ve dezenfekte edilir.

2



Kapak çıkarılır.

3



Delme işlemi yapılır ve ilk
kan damlası dışarı atılır.

4



Kan örneği toplanır.

5



Tüpü orjinal kapağıyla
kapatınız.

6



Kanı alır almaz, tüpü
nazikçe alt-üst ediniz.

KULLANIM TALİMATLARINI İNCELEYİNİZ

www.gbo.com
sitesindeki

ÜRÜNE BAKIŞ

MiniCollect® Complete

Taşıyıcı tüple bütünleşik tüp

Kat. No.	Hacim aralığı	Kapak rengi	Katkı maddesi	Tüp boyutu	Etiket tipi	İç / Dış [Adet]
450549	0.5 - 1ml	● kırmızı	CAT Serum Pıhtı Aktivatörlü	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000
450548	0.5 - 0.8ml	● altın sarı	CAT Serum Jelli Pıhtı Aktivatörlü	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000
450551	1ml	● yeşil	LH Lityum Heparin	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000
450550	0.8ml	● açık yeşil	LH Lityum Heparin Jelli	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000
450547	0.25 - 0.5ml	● mor	K2E K2EDTA	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000
450545	0.25 - 0.5ml	● mor	K3E K3EDTA	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000
450546	1ml	● mor	K3E K3EDTA	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000
450552	0.25ml	● gri	FX Sodyum Florid /Potasyum Okzalat	13 x 75	şeffaf	500 / 2,000

MiniCollect® Complete Barcode

Taşıyıcı tüple bütünleşik tüp

Kat. No.	Hacim aralığı	Kapak rengi	Katkı maddesi	Tüp boyutu	Etiket tipi	İç / Dış [Adet]
480546	0.25 / 0.5ml	● mor	K3E K3EDTA	13 x 75	kağıt	500 / 2,000
480547	0.25 / 0.5ml	● mor	K2E K2EDTA	13 x 75	kağıt	500 / 2,000
480548	0.5 / 1ml	● kırmızı	CAT Serum Pıhtı Aktivatörlü	13 x 75	kağıt	500 / 2,000
480549	0.25ml	● gri	FX Sodyum Florid /Potasyum Okzalat	13 x 75	kağıt	500 / 2,000
480550	0.5ml	● yeşil	LH Lityum Heparin	13 x 75	kağıt	500 / 2,000
480568	0.5 / 0.8ml	● altın sarı	CAT Serum Jelli Pıhtı Aktivatörlü	13 x 75	kağıt	500 / 2,000

MiniCollect® Tüpleri

Kat. No.	Hacim aralığı	Kapak rengi	Katkı maddesi	Tüp boyutu	Etiket tipi	İç / Dış [Adet]
450534	0.5 - 1ml	● kırmızı	CAT Serum Pıhtı Aktivatörlü	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450533	0.5 - 0.8ml	● altın sarı	CAT Serum Jelli Pıhtı Aktivatörlü	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450536	0.5ml	● yeşil	LH Lityum Heparin	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450537	1ml	● yeşil	LH Lityum Heparin	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450535	0.8ml	● açık yeşil	LH Lityum Heparin Jelli	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450532	0.25 - 0.5ml	● mor	K2E K2EDTA	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450530	0.25 - 0.5ml	● mor	K3E K3EDTA	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000

shop.gbo.com

Bu ve daha fazla
ürünü çevrimiçi
mağazamızdan
bulabilirsiniz.

Kat. No.	Hacim aralığı	Kapak rengi	Katkı maddesi	Tüp boyutu	Etiket tipi	İç / Dış [Adet]
450531	1ml	● mor	K3E K3EDTA	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450540	0.25ml	● gri	FX Sodyum Florid /Potasyum Okzalat	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000
450541	0.5ml	● gri	FX Sodyum Florid /Potasyum Okzalat	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000

MiniCollect® Koagulasyon Tüpleri

Yalnızca venöz kan ile kullanılmaktadır

Kat. No.	Hacim aralığı	Kapak rengi	Katkı maddesi	Tüp boyutu	Etiket tipi	İç / Dış [Adet]
450539	1ml	● mavi	9NC Koagulasyon sodyum sitrat 3.2 %	10 x 43	şeffaf	500 / 2,000

MiniCollect® Taşıyıcı Tüpler

Kat. No.	Renk kodu	Kapak tipi	Tüp boyutu	İç / Dış [Adet]
450417	○ şeffaf	PREMIUM	13 x 75	100 / 500
450418	● amber kahverengi	PREMIUM	13 x 75	100 / 500

MiniCollect® Ek Kapaklar

Kat. No.	Renk kodu	İç / Dış [Adet]
370267B	○ beyaz	1 / 9,008

MiniCollect® Lancelino Emniyetli Bıçaklı Lansetler

Kat. No.	Renk kodu	Bıçak / İğne boyutu	Delme derinliği	İç / Dış [Adet]
450524	● sarı	0.8mm	2mm	200 / 2,000

MiniCollect® Lancelino Emniyetli İğneli Lansetler

Kat. No.	Renk kodu	Bıçak / İğne boyutu	Delme derinliği	İç / Dış [Adet]
450521	● mor	25G	1.5mm	200 / 2,000
450522	● mavi	21G	1.8mm	200 / 2,000
450523	● yeşil	21G	2.4mm	200 / 2,000

MiniCollect® Emniyetli Bıçaklı Lansetler

Kat. No.	Renk kodu	Bıçak / İğne boyutu	Delme derinliği	İç / Dış [Adet]
450427	● pembe	1.5mm	1mm	200 / 2,000
450428	● yeşil	1.5mm	1.5mm	200 / 2,000
450429	● mavi	1.5mm	2mm	200 / 2,000

MiniCollect® Emniyetli İğneli Lansetler

Kat. No.	Renk kodu	Bıçak / İğne boyutu	Delme derinliği	İç / Dış [Adet]
450438	● mor	28G	1.25mm	200 / 2,000
450439	● turuncu	23G	2.25mm	200 / 2,000



FARKLI HASTA GRUPLARINDA

Kan alma iğnelerinden korkan veya zor erişimli damarları olan hastalar için.



GENİŞ BİR ANALİZ YELPAZESİ İÇİN

Kan, dikkatle işlenmesi gereken değerli bir kaynaktır. MiniCollect®, "Hasta Kan Yönetimini" desteklemek için düşük hacimli tüpler sağlar.



AZ KAN ÖRNEKLERİNİN TOPLANMASI, TAŞINMASI & ANALİZİ İÇİN İDEAL

Entegre kan toplama küreği hızlı ve kolay bir toplama sağlar, sızdırmaz kapaklar güvenli taşıma sağlar ve tüpler doğrudan analizörde çalışabilir, böylece iş akışı verimlilikleri artar.

AVANTAJLAR

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.
Media owner: Greiner Bio-One GmbH / **Manufacturer:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980317 tr [rev.02 11.2024]


greiner
BIO-ONE