

making a difference



MÁXIMA SEGURIDAD

VACUETTE®

Línea de transporte

El transporte de muestras
nunca ha sido tan fácil.


greiner
BIO-ONE

TRANSPORTE SEGURO DE MUESTRAS

de acuerdo con la normativa aplicable



Todos nuestros productos han sido optimizados para facilitar el trabajo diario del personal sanitario.

SEGURIDAD PARA SU PERSONAL

Los productos de la línea de transporte VACUETTE® permiten transportar muestras de sangre, orina o saliva de forma segura, si es necesario refrigeradas, desde la toma de la muestra hasta el laboratorio.


Actúe con seguridad incluso al transportar los Tubos de Estabilización de Virus VACUETTE® que contienen muestras con

SARS-CoV-2, Gripe A o Gripe B con la Línea de Transporte VACUETTE®: su personal está totalmente protegido contra posibles infecciones.

Todos los productos han sido desarrollados para el exigente uso diario y, por tanto, son fáciles de manejar, fáciles de esterilizar, resistentes y optimizados para que sean lo más ligeros posible.

PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE:

- / Cajas de transporte VACUETTE®
- / Contenedores de transporte VACUETTE®
- / Racks y gradillas de espuma para tubos de obtención de muestras sanguíneas
- / Acumuladores de frío
- / Bolsas y cajas de transporte

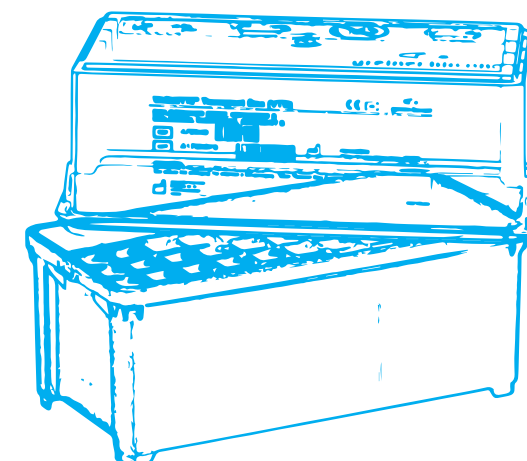

NO SE COMPROMETE LA CALIDAD DE LA MUESTRA

Las muestras médicas son un activo valioso. Mantener su integridad es un requisito esencial para obtener resultados analíticos de alta calidad.

Gracias al sistema de transporte VACUETTE® sus muestras de laboratorio están protegidas de la luz y, en caso necesario,

pueden mantenerse frías directamente en el contenedor secundario mediante bolsas de transporte aisladas y acumuladores de frío altamente eficaces durante períodos prolongados. De este modo, la calidad de los resultados de su laboratorio no depende de las condiciones meteorológicas.



Un sistema de transporte de muestras adecuado es el requisito esencial para obtener unos resultados analíticos de calidad.



TESTADO POR UN INSTITUTO INDEPENDIENTE

Puede encontrar los informes de las pruebas en el centro de descargas en nuestra página web www.gbo.com

La línea de transporte VACUETTE® está certificada para el transporte de sustancias biológicas de categoría B según la norma UN 3373. Todos los componentes individuales cumplen con el ADR/RID (Instrucción de Embalaje P650), IATA-DG, ICAO-TI y el Código IMDG y han sido probados para su idoneidad por institutos independientes y acreditados.



Cajas de transporte VACUETTE®

Las cajas de transporte VACUETTE® de polipropileno (PP) son apilables y adecuadas para transportar hasta 40 tubos. La caja es a prueba de fugas y tiene un cierre de clic para abrirla y cerrarla rápida y cómodamente. La gradilla de espuma es adecuada para tubos de 9 a 16 mm de diámetro.



Contenedores de transporte VACUETTE®

Nuestro contenedor de transporte VACUETTE® es un práctico recipiente de polipropileno (PP) para transportar hasta 12 tubos. El contenedor se cierra con una tapa a rosca y es a prueba de fugas. La gradilla de espuma es adecuada para tubos de 9 a 16 mm de diámetro.



Bolsas de transporte isotérmicas

Las bolsas de transporte Isotherm están disponibles en diferentes tamaños para transportar varias cajas o contenedores. Las bolsas de transporte son resistentes, ligeras y ayudan a mantener la temperatura baja gracias al material exterior aislante.

TRIPLE EMBALAJE

para el transporte seguro de muestras biológicas


TRANSPORTE LAS MUESTRAS DE FORMA CORRECTA

De acuerdo con el ADR/RID, la IATA, el Código IMDG y el ICAO-TI, los contenedores de transporte para el envío de sustancias biológicas de Categoría B (UN 3373) deben constar de tres componentes.

1 CONTENEDOR PRIMARIO

A prueba de líquidos hasta una diferencia de presión de 95 kPa.


- / Tubo de obtención de muestras sanguíneas VACUETTE®
- / Tubo de orina VACUETTE®
- / Tubo de transferencia de saliva Greiner Bio-One
- / Tubo de estabilización de virus VACUETTE®
- / Tubo SECUNDARIO VACUETTE® con tapón

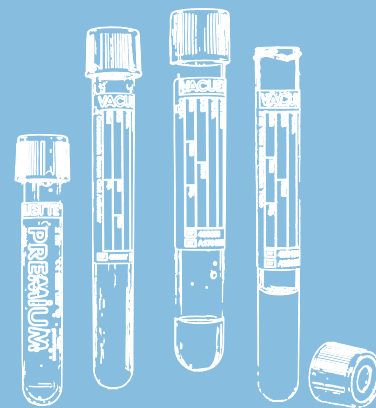

2 CONTENEDOR SECUNDARIO

Protege las muestras y contiene material absorbente en caso de fuga.

- / Caja de transporte VACUETTE® (VTB)
- / Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC)

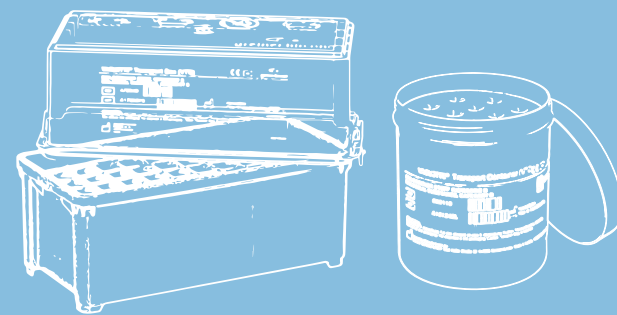

3 CONTENEDOR TERCIARIO

Protege contra las influencias mecánicas, las fluctuaciones de temperatura y la luz. Etiquetado conforme a la norma.

- / Caja de transporte
- / Bolsa de transporte isotérmica



SOLUCIONES FLEXIBLES

VACUETTE®

Caja de transporte (VTB)*

- / Caja resistente de polipropileno
- / Para transportar hasta 40 tubos
- / Opcionalmente incluye la caja de transporte
- / Con práctico cierre de clic
- / A prueba de fugas gracias al anillo de sellado
- / Gradilla de espuma absorbente
- / Soporte para el envase de la nevera
- / Apilable



VACUETTE®

Contenedor de transporte (VTC)*

- / Contenedor de polipropileno de tamaño práctico
- / Para transportar hasta 12 tubos
- / Opcionalmente incluye una caja de transporte
- / Con cierre de rosca
- / Gradilla de espuma absorbente



*Tenga en cuenta que la caja de transporte VACUETTE® (VTB) y el contenedor de transporte VACUETTE® (VTC) sólo cumplen las normas ADR/RID, IATA-DG, ICAO-TI y el Código IMDG si se utilizan con la caja o bolsa de transporte adecuada, y que Greiner Bio-One no se hace responsable de un transporte inadecuado. Las normas son aplicables para el transporte por carretera, ferrocarril, aire y/o barco.

RACK


para Tubos de obtención de muestras sanguíneas

- / Práctico rack para 10 tubos de muestra con un diámetro exterior de 11-17 mm
- / 3 racks que encajan en las ranuras de la Caja de transporte VACUETTE® (VTB)
- / Autoclavable
- / Limpieza con desinfectantes y productos de limpieza comunes
- / Apto para el almacenamiento de muestras



GRADILLAS DE ESPUMA

- / Para 40 (Caja de transporte) o 12 (Contenedor de transporte) tubos de muestras
- / Gradillas de espuma para tubos con diámetros de 9 a 16 mm
- / Autoclavable a 120°C según la norma ASTM D 3574

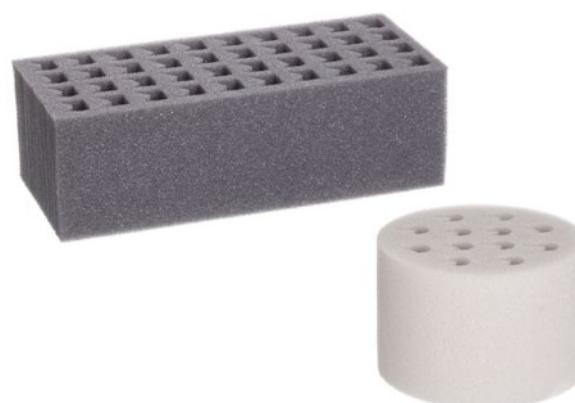

OPCIONES DE REFRIGERADO

- / Acumulador de frío ideal para la Caja de transporte VACUETTE® (VTB) y en las Bolsas de transporte Isotherm
- / Acumulador de frío (redondo) ideal para el Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC)
- / Extraplano
- / Recargable en nevera
- / El acumulador de frío se ajusta a la norma DIN 18864



ISOTHERM

Bolsas de transporte

- / El material aislante hace posible el transporte de muestras refrigeradas
- / Probado de acuerdo con los requisitos de la Instrucción de Embalaje P650 (ADR/RID, IATA-DG, ICAO-TI y el Código IMDG)
- / Gran ventana de visualización para los documentos de transporte o información adicional en el reverso
- / Diseño resistente y extremadamente ligero

DISPONIBLE EN DIFERENTES TAMAÑOS:

- / Bolsa rectangular 1 VTB
- / Bolsa rectangular 2 VTBs
- / Bolsa rectangular 3 VTBs
- / Bolsa rectangular 4 VTBs
- / Bolsa redonda 1 VTC



CAJAS DE TRANSPORTE

- / Caja de transporte para la Caja de transporte VACUETTE® (VTB)
- / Caja de transporte para el Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC)
- / Caja de transporte resistente
- / Etiquetado conforme a la normativa





TRANSPORTE SEGURO DE LAS MUESTRAS

Su personal está totalmente protegido contra posibles infecciones.



TESTADO Y CERTIFICADO

Todos los productos de la Línea de transporte VACUETTE® han sido probados y certificados por un instituto independiente y acreditado.



AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS

Greiner Bio-One le ofrece todo lo que necesita para el transporte seguro de muestras.

shop.gbo.com

Encuentre estos y otros productos en nuestra tienda online

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Cajas de transporte VACUETTE®

Referencia	Descripción	Uds. embalaje interior / exterior
472001	Caja de transporte VACUETTE® (VTB), incl. gradilla de espuma para 40 tubos, con Caja de transporte HK0190	1 / 10
472040	Caja de transporte VACUETTE® (VTB), incl. gradilla de espuma para 40 tubos	1 / 10
472010	Gradilla de espuma para Caja de transporte VACUETTE® (VTB), para 40 tubos (todos los tamaños)	- / 168
472016	Acumulador de frío para Caja de transporte VACUETTE® (VTB)	- / 104
472011	Rack para Tubos de obtención de muestras sanguíneas, 10 posiciones, autoclavable	1 / 100
472015	Gradilla de espuma absorbente para VTB / VTC	- / 2.500

Contenedores de transporte VACUETTE®

Referencia	Descripción	Alto	Ancho	Uds. embalaje interior / exterior
800105	Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC), incl. gradilla de espuma para 12 tubos, con caja de transporte HK0259	128,7 mm	113 mm	1 / 12
800110	Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC), incl. gradilla de espuma para 12 tubos, sin caja de transporte HK0259	128,7 mm	113 mm	1 / 12
800101	Gradilla de espuma para Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC), para 12 tubos	70 mm	107 mm	- / 336
800102	Contenedor volumen 60 ml con gradilla de espuma absorbente y tapa a rosca, sin símbolo	127 mm	28 mm	- / 300
472017	Acumulador de frío para Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC)	12 mm	107 mm	- / 150

Bolsas de transporte

Referencia	Descripción	Alto	Largo	Ancho	Color	Uds. embalaje interior / exterior
472020	para 1 Caja de transporte VACUETTE® (VTB), pequeña	250 mm	300 mm	170 mm	● azul oscuro	1 / 16
472030	para 2 Cajas de transporte VACUETTE® (VTB), mediana	250 mm	320 mm	300 mm	● azul oscuro	1 / 8
472023	para 3 Cajas de transporte VACUETTE® (VTB), mediana	250 mm	480 mm	300 mm	● azul oscuro	1 / 4
472024	para 4 Cajas de Transporte VACUETTE® (VTB), grande	250 mm	640 mm	300 mm	● azul oscuro	1 / 4
472022	para un Contenedor de transporte VACUETTE® (VTC), pequeño	160 mm	145 mm		● azul oscuro	1 / 50

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited. Media owner: Greiner Bio-One GmbH

981226 es [rev.00 07.2022]


greiner
BIO-ONE