

making a difference



GÜVENLİĞİNİZİ ÖNEMSİYORUZ

VACUETTE®

Güvenlikli ürünler

Greiner Bio-One, farklı gereksinimler
için geniş bir güvenlikli ürün
yelpazesine sahiptir.



greiner
BIO-ONE

iğne batması yaralanması,
yaralanan kişinin ve ailesinin
mesleki ve kişisel durumu
için geniş kapsamlı etkilere
sahip olabilir.



Kendinizi korumanın en etkili
yollarından biri güvenlikli
ürünler kullanmaktır.

İĞNE BATMASI YARALANMALARI GEÇMİŞTE KALDI

Sağlık sektöründe iş yerinde
kapılan birçok bulaşıcı hastalık
girişim yaralannalarından
kaynaklanıyor olabilir. İğne
batması yaralannaları açık ara
en yüksek enfeksiyon riskini
oluşturur.

Kayıtlı tüm vakaların %50'den
fazlası hemşirelerle ilgidir,
bunu doktorlar ve laboratuvar
personeli izler.

Ancak bu durum, iğne batması
yaralannalarının kaçınılmaz bir
mesleki risk olduğu anlamına
gelmez. VACUETTE® güvenlikli
ürünlerin doğru kullanılma-
sı bu riski neredeyse tamamen
ortadan kaldırabilir.

VACUETTE® güvenlikli ürünler
AB Direktifine (AB 2010/32)
uygundur.

GÜVENLİĞİNİZİ ÖNEMSİYORUZ

- / Geniş güvenlikli ürünler yelpazesi.
- / Uygulamaya bağlı olarak farklı ürünler.
- / Her durum için doğru güvenlikli ürün.

HER DURUM İÇİN DOĞRU GÜVENLİKLİ ÜRÜN

Her pazar ve müşteri için en uygun ürünlerin seçilmesine olanak tanıyan geniş bir güvenlikli ürünler yelpazesi sunuyoruz. Greiner Bio-One'da, basit bir güvenlikli üründen birinci sınıf bir ürüne kadar her emniyet seviyesinin yanı sıra

bireysel ihtiyaçlarınız için en uygun ürünü bulabilirsiniz.

ilerleyen sayfalarda, kendinizi iğne batması yaralanmalarına karşı en iyi şekilde korumanızı sağlayan ürünlerimize genel bir bakış bulabilirsiniz.



Standart venöz kan alma.

Günlük kan almında VACUETTE® QUICKSHIELD Complete Set PLUS kullanmanızı tavsiye ederiz.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete Plus



Zor damar koşulları.

Tüm güvenlikli kan alma setlerimiz, zor damar koşulları olan hastalar için uygundur. Üst kalite ürünümüz VACUETTE® EVOPROTECT özellikle hassas bir şekilde kan alımı sağlar.

VACUETTE® EVOPROTECT veya GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti ya da VACUETTE® Güvenlikli Kelebek Set (21G veya 23G) ürünlerinin kullanımı uygundur.



Kan kültürleri.

Kan kültürlerinin alınması için kan kültür tutucusu ile birlikte bütünlük şekilde olan güvenlikli kan alma setinin kullanılmasını tavsiye ederiz.

GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti, Kan Kültürü Tutuculu (21G veya 23G)

GREİNER BIO-ONE ÜRÜN SEÇENEKLERİ

Ürün yelpazemizde her güvenlik seviyesi için doğru ürünü bulabilirsiniz. Güvenlik mekanizması olmayan ürünlerden birinci sınıf güvenlikli ürünlere kadar, bireysel ihtiyaçlarınız için doğru ürüne sahibiz.



HIZLI VE KOLAY BİR ŞEKİLDE DOĞRU GÜVENLİKLİ ÜRÜNÜ BULUN

Aşağıdaki tabloda seçilen ürünün size hangi özellikleri sunduğunu ve hangi düzeyde güvenlik sağladığını bir bakışta görebilirsiniz. Böylece ihtiyaçlarınız için mümkün olan en iyi seçimi yapabilirsiniz.

		Güvenlikli cihaz	Vari-otomatik iğne geriçeklinesi	Damar-içi aktivasyon	Tek-elde aktivasyon	Bütünleşik ürün	Kanın akışını gösteren pencere	Koruyucu kapak yer değiştirilebilir	Aynı set ile Kan alma ve İnfüzyon işlemi	Ekstra ince duvarlı iğne (artırılmış kan akışı)	Hortum hafızası gözlenmez	Doğal kauçuk lateksiz ürün	DEHP'siz ürün
01	VACUETTE® EVOPROTECT Güvenlikli Kan alma Seti	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete	✓			✓	✓		✓			✓	✓	
02	GÜVENLİKLİ kan alma seti	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Güvenlikli tüp tutucu VISIO PLUS iğne ile birlikte	✓			✓		✓	✓			✓	✓	
	VACUETTE® QUICKSHIELD Güvenlikli tüp tutucu Çoklu kullanımı kan alma iğne ile birlikte	✓			✓			✓			✓	✓	
03	VACUETTE® GÜVENLİKLİ Kelebek Set	✓			✓	✓					✓	✓	
04	Kan alma seti				✓					✓	✓		
	iğne ile birlikte standart tutucu					✓				✓	✓	✓	

* 21G ve 23G



Güvenlikli ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:
powerforsafety.com



Güvenlikli ürünlerle iğne batması
yaralanmaları önlenebilir.
Kendinizi koruyun!



iğne aktivasyondan sonra bir koruyucu kapağa kitlenerek, iğne batması yaralanmalarından korur.



GÜNLÜK KAN ALMA RUTİNLERİ İÇİN

VACUETTE® QUICKSHIELD
Güvenlikli Tüp Tutucusu

KAN ALMA TEKNİĞİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAZ

Greiner Bio-One VACUETTE® QUICKSHIELD Güvenlikli Tüp Tutucusu, VACUETTE® Çoklu Kullanımlı Kan Alma İğneleri veya VACUETTE® VISIO PLUS İğneleri ile birlikte kullanılabilir. VACUETTE® QUICKSHIELD Complete ve VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS'ta iğneler önceden monte edilmiş halde bulunur.


Koruyucu kapak doğrudan tutucuya bağlıdır. Koruyucu

kapağı sabit bir yüzey veya parmak ya da başparmak yardımıyla tek elle aktifleştirilmesi sayesinde, bu ürün kolay kullanımı, yaralanma ve enfeksiyona karşı kapsamlı koruması ile bir numaradır.

VACUETTE® QUICKSHIELD Güvenlikli Tüp Tutucusu, kan alma teknlığında herhangi bir değişiklik olmadan iğne batması yaralanmalarına karşı koruma sağlar.

DAHA FAZLA GÜVENLİK İÇİN KORUYUCU KAPAK.

- / Kan alma teknlığında değişiklik olmaz.
- / Döner güvenlik kapağı sayesinde kullanıcıya ve hastaya özel gereksinimler için daha fazla esneklik.
- / Güvenlik koruyucu kapağının aktifleştirilmesi, duyulabilir ve hissedilebilir bir tık sesi ile anlaşılır.

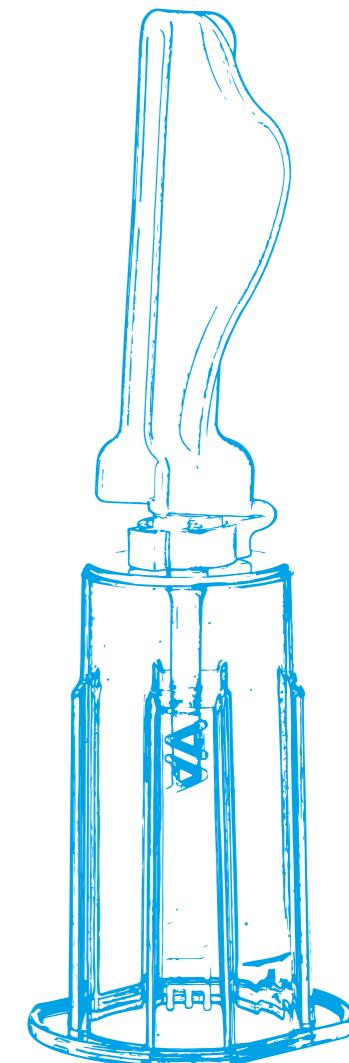

Tutucunun ergonomik tasarımı damara girişim sırasında iyi bir kavrama sağlar.

ZAMANDAN
TASARRUF
EDİN

önceden monte
edilmiş VISIO PLUS
iğneyle

KULLANIM
TALİMATLARINI
İNCELEYİNİZ

www.gbo.com
sitesindeki

BÜTÜNLEŞİK ÜRÜN

VACUETTE® QUICKSHIELD TUTUCU, İĞNE İLE BÜTÜNLEŞİK VERSİYON


iğne ile bütünlük formda kombiné bir ürün olarak, güvenlikli tüp tutucu steril poşet ambalajda ayrı ayrı paketlenmiş olarak gelir.



* VACUETTE®
Çoklu Kullanımlı
Kan Alma İğnesi ile
bütünlük form
** VACUETTE®
VISIO PLUS İğnesi
ile bütünlük form

GÜVENLİK MEKANİZMASININ AKTİVASYONU

Seçenek 1

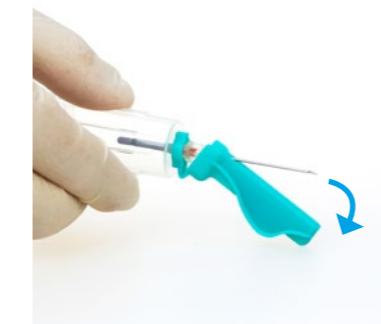

Seçenek 2



1

Güvenlik
mekanizmasını
ya sabit bir
yüzeyde ya da
parmağınızla veya
başparmağınızla
etkinleştirin.

2

Koruyucu kapak
güvenli bir şekilde
etkinleştirildiğinde
bir **tık sesi**
duyalabilir.



**GELİŞMİŞ
GÜVENLİK**
kapak yerine
yerleştirildiğinde,
iğne güvenli ve
geri döndürülemez
şekilde kapatılır.

İğne batması yaralanmalarını
en aza indirmek için ideal
başlangıç ürünü.



GÜVENLİĞE İLK ADIM

VACUETTE®
GÜVENLİKLİ Kelebek Set

İĞNE BATMASI RİSKİNİ AZALTIN

VACUETTE® GÜVENLİKLİ Kelebek Set steril, plastik kanatlı bir kan alma setidir. Set paslanmaz çelik iğne, iğne boyutuna göre renk kodlu kanatlar, esnek hortum ve plastik güvenlik kılıfından oluşur.


Luer adaptörsüz veya bütünlük tutuculu olmayan ürün, intravenöz sıvıların tek kullanımlık

kısa süreli infüzyonu için de uygundur.

Her ürün iğne batması yaranması riskini azaltmak için bir emniyet mekanizmasıyla donatılmıştır. Kan alma işlemi tamamlandıktan sonra, iğne hastanın damarından dikkatlice çıkarılır ve emniyet mekanizması hemen ardından aktifleştirilir.

RAHAT KULLANIM.

- / Esnek kanatlar hastanın cildini iyi şekilde kavrar ve rahat bir girişim sağlar.
- / Şeffaf tasarımının sayesinde kan akışı iyi şekilde görüntülenir.
- / İğne ince-duvarlı ve kan akışını artıran bir tasarıma sahiptir.

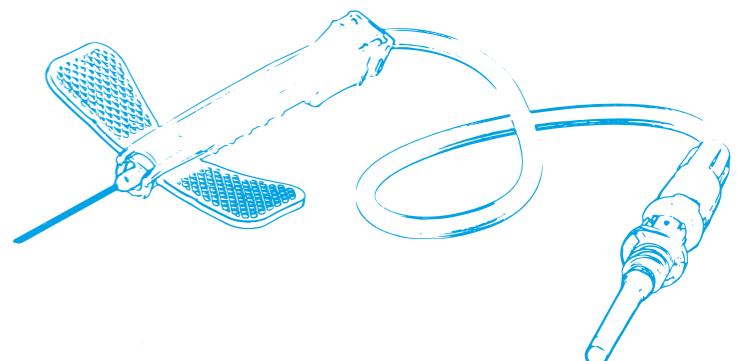

BASİT GÜVENLİKLİ SİSTEM


VACUETTE® GÜVENLİKLİ KELEBEK SET

VACUETTE® GÜVENLİKLİ Kelebek Set, bir Luer adaptörlü veya tutucuya bütünselik versiyon ile 21, 23 veya 25 G iğne boyutlarında ve 18 veya 30 cm hortum uzunluğunda mevcuttur.

Lateks ve DEHP içermez


iğne ince-
duvarlıdır
ve kan
akışını
artıran bir
tasarıma
sahiptir

Şeffaf tasarımlı
sayesinde kan
akışi iyi bir şekilde
görüntülenir

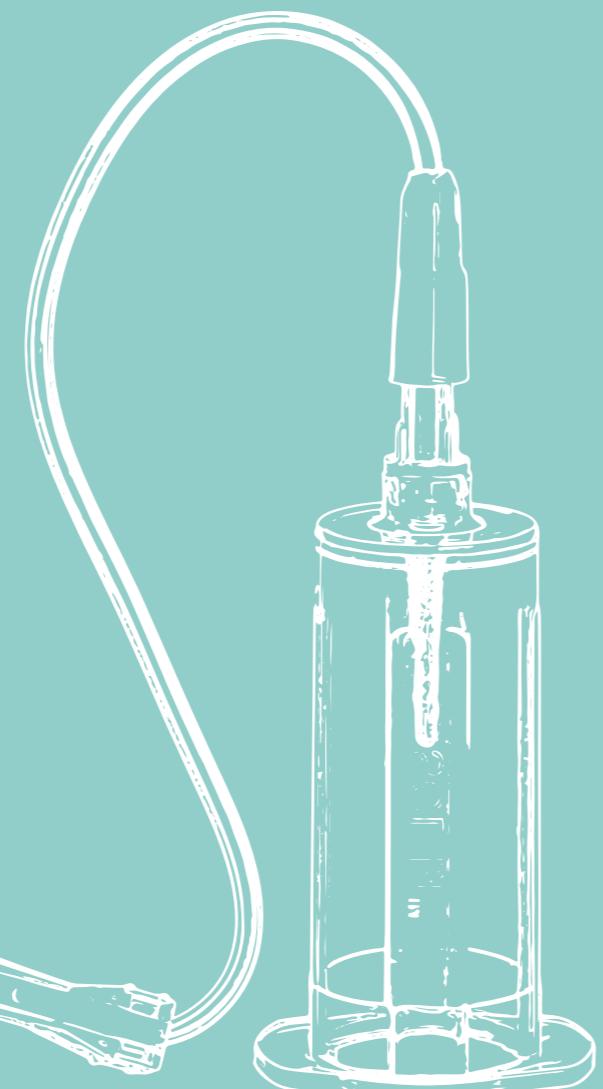

GÜVENLİK MEKANİZMASINI AKTİFLEŞTİRMEK İÇİN ÜÇ SEÇENEK


1

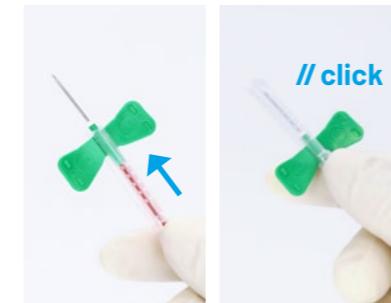

Tek elle
aktifleştirme

Kullanıldan sonra
hortumu tutun ve aynı
elinizle plastik koruyucuyu
iğnenin üzerine kaydırın.

2

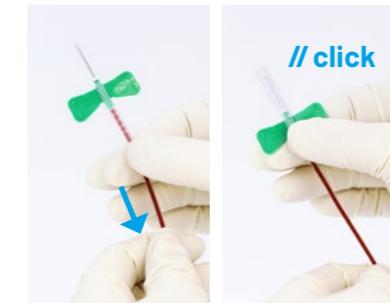

İki elle
aktifleştirme

Kullanıldan sonra,
hortumu tutun ve aynı
elinizle plastik koruyucuyu
iğnenin üzerine kaydırın.

3



İki elle
aktifleştirme

Kullandıktan sonra
kanatları bir elinizle tutun
ve diğer elinizle koruyucuyu
(plastik muhafazanın geniş
kısından) iğne kilitlenene
kadar hortumu geri çekin.

GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti,
hastaya özellikle nazik bir
kan alma konforu sunar.

Ergonomik ürün tekli
olarak paketlenmiştir.
Açılması kolaydır ve az
miktarda atık üretir.



SADECE ZOR DAMAR KOŞULLARI İÇİN DEĞİL

GÜVENLİKLİ
Kan alma seti

YÜKSEK GÜVENLİK SEVİYESİ


Kanül hala damarın içindediken emniyet mekanizması aktifleştirildiğinde bu ürün yüksek derecede güvenlik sağlar. Kullanıcı tarafından doğru olarak aktifleştirilmesi, net bir şekilde işitilebilir bir klick sesi ile belirtilir. Güvenlikli kan alma seti, iğne batması yaralanmalarına karşı mümkün olan en iyi korumayı sağlar. Venöz kan almanın şeffaf

bir pencereyle görsel olarak kontrol edilmesi de girişimin güvenliğini artırır. Set, kan alımı veya beş saatte kadar infüzyon için kullanılabilir.*

Güvenlikli kan alma seti, steril, esnek bir hortuma bağlı, Luer adaptörlü veya luer adaptör-süz ya da luer adaptorsuz tüp tutuculu tek kullanımlık kanatlı bir iğnedir.

KULLANIMI KOLAY ÜRÜN TASARIMI.

- / Girişim işleminin başarılı olup olmadığını görmek için iğne ile tüp arasındaki gözetleme penceresi kullanılabilir.
- / Farklı uzunluklardaki hortum tipleri kan almada daha fazla esneklik sağlar.
- / Güvenlik mekanizmasının kolay aktivasyonu

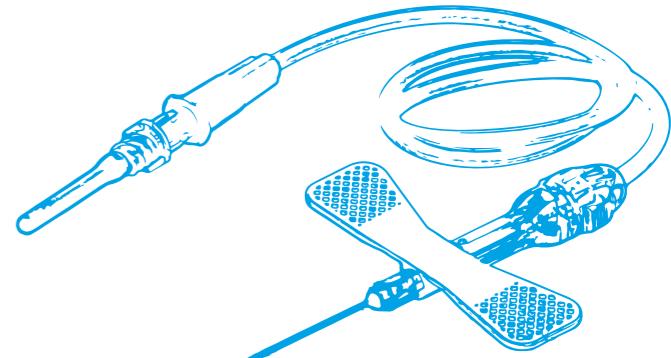

DÖRT ÜRÜN ÇESİDİ


GÜVENLİKLİ KAN ALMA SETİ

Pratik bir birleşik ürün olarak, GÜVENLİKLİ kan alma setini infüzyon seti olarak veya Luer adaptörlü, tutuculu veya kan kültürü tutuculu bütünsel formda formda çeşitli iğne boyutlarında ve hortum uzunluklarında seçebilirsiniz.

Farklı uzunlıklardaki hortumlar kan alımında daha fazla esneklik sağlar

Girişim işleminin başarılı olup olmadığını görmek için iğne ile tüp arasındaki gözetleme penceresi kullanılabilir

Steril poşetli ambalajda bütünsel formda ürünler

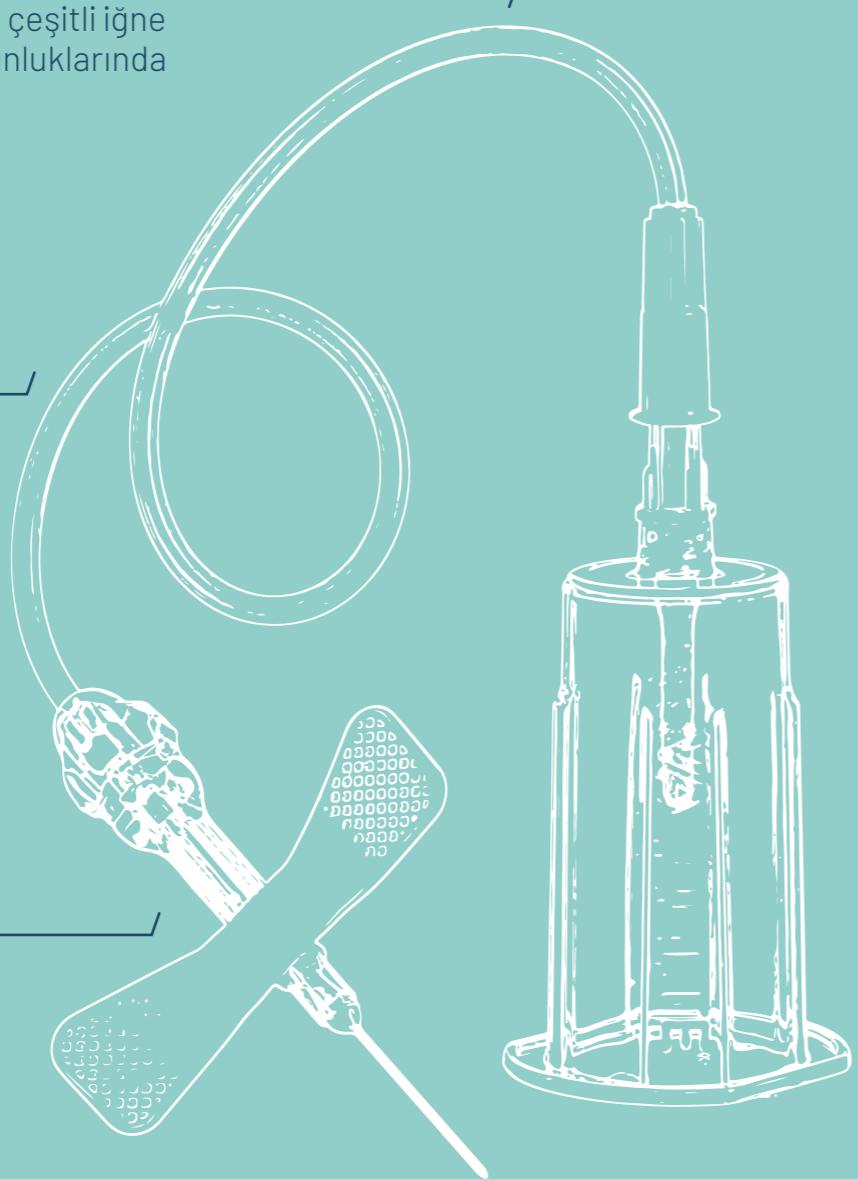


GÜVENLİK MEKANİZMASININ KOLAY AKTİFLEŞTİRİLMESİ



1

Koruyucunun her iki tarafına hafifçe bastırarak **güvenlik mekanizmasını** etkinleştirin.

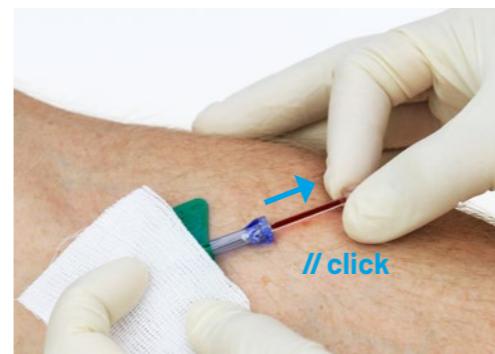


2

Ardından **açık renkli bölüm**den tutup geriye doğru çekin. Doğru şekilde aktifleştirildiğinde bir **tık sesi** duyulur.



GELİŞMİŞ GÜVENLİK
İğne, maksimum güvenlik için güvenli ve geri döndürülemez şekilde kapatılmıştır.

Kan almada evrimin
bir sonraki aşaması.

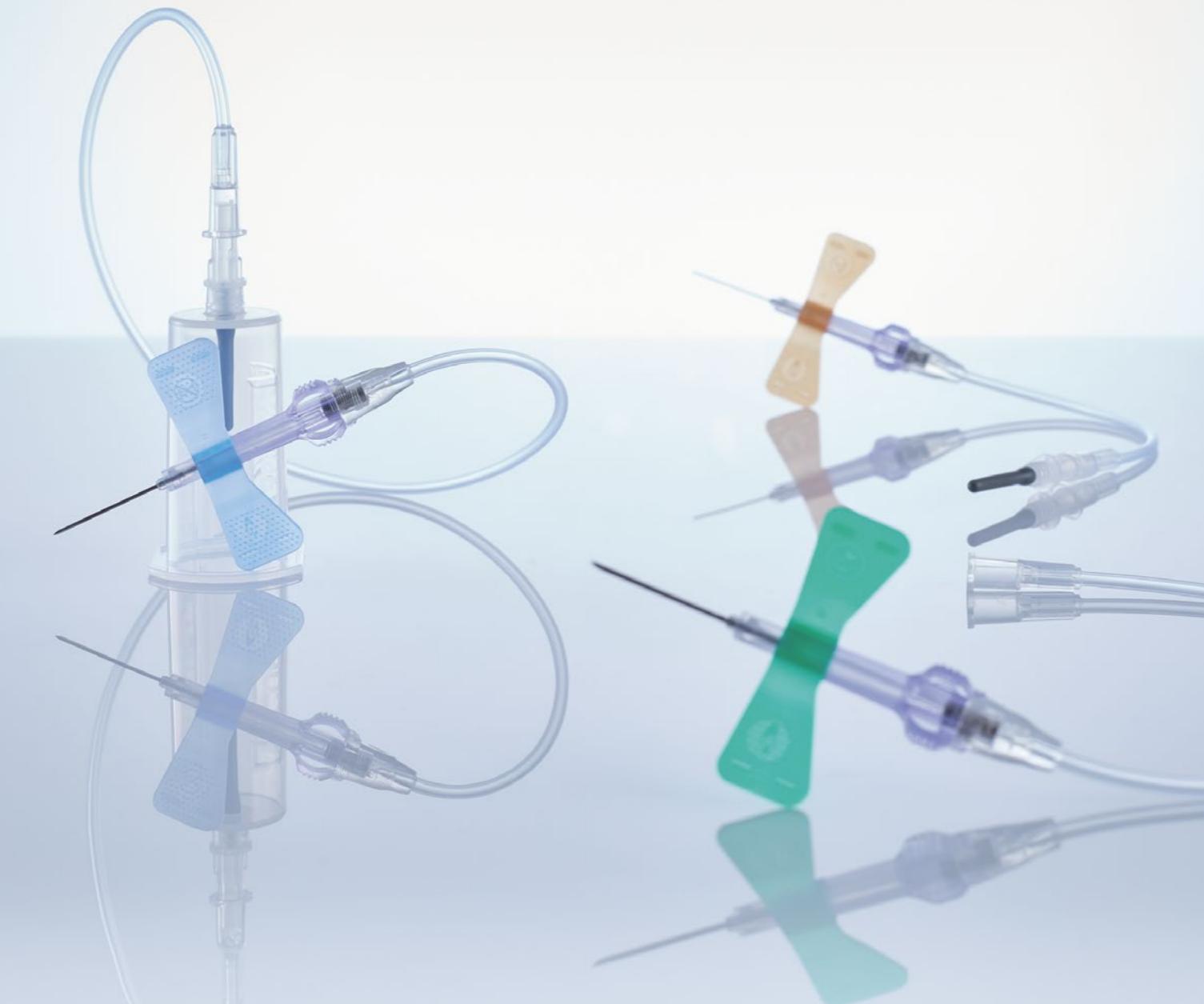

HASSAS DOKUNUŞ

VACUETTE® EVOPROTECT
GÜVENLİKLİ kan alma seti

GÜVENLİKTE BİR SONRAKİ EVRİM

Yarı otomatik yay mekanizması sizi iğne yaralanması riskinden korur ve günlük işlerinizi kolaylaştırır. Her iğne yaralanması aslında çoktur.


VACUETTE® EVOPROTECT Güvenlikli Kan Alma Seti son derece konforlu ve kullanımı kolaydır. Özel tasarıımı sayesinde tek elle aktifleştirmeye uygun, güvenlik mekanizmali kanatlı bir iğneden oluşur.

iğne hala damar içerisinde iken güvenlik mekanizmasının aktifleştirilmesi iğne yaralanma riskini büyük ölçüde ortadan kaldırır.

21G ve 23G iğnenin ekstra ince duvarlı yapıları sayesinde kan akış hızı yüksektir ve bu durumun kan alma ve infüzyon süresi üzerinde oldukça olumlu bir etkisi vardır.

YARI OTOMATİK GÜVENLİK MEKANİZMASI.

- / Net şekilde duyulan tık sesi, aktifleştirmenin başarılı olduğunu doğrular.
- / İğne daha sonra geri çekilir ve aynı anda ürün muhafazasının içine geri dönüşsüz ve emniyetli bir şekilde kitlenir.

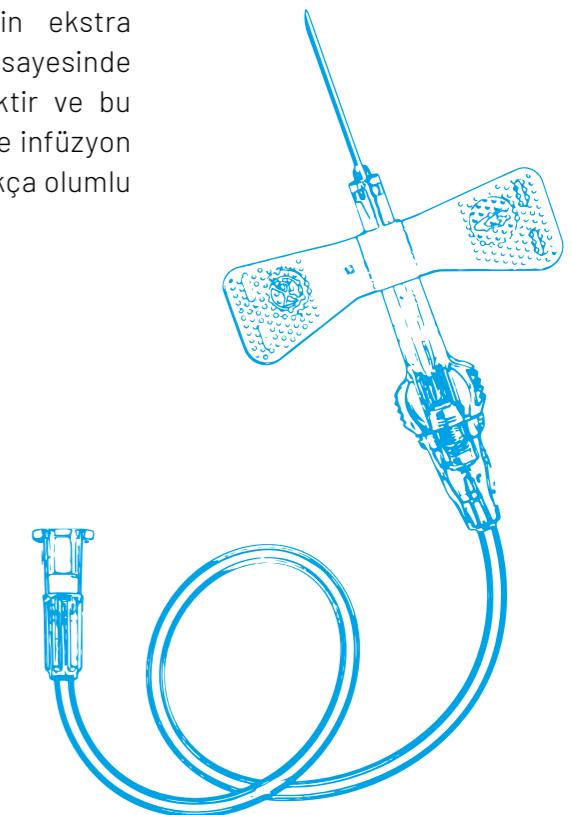

KULLANIMI KOLAY

Kolay kullanım için
başarılı tasarım


KULLANIM TALİMATLARINI İNCELEYİNİZ

www.gbo.com
sitesindeki



EVRİMİN BİR SONRAKİ AŞAMASI

VACUETTE® EVOPROTECT

Patentli yarı otomatik güvenlik mekanizmasının tetiği, ürünün yan tarafında yer alır ve böylece mekanizma hasta için mümkün olduğunda hassas şekilde tek elle aktifleştirilebilir.

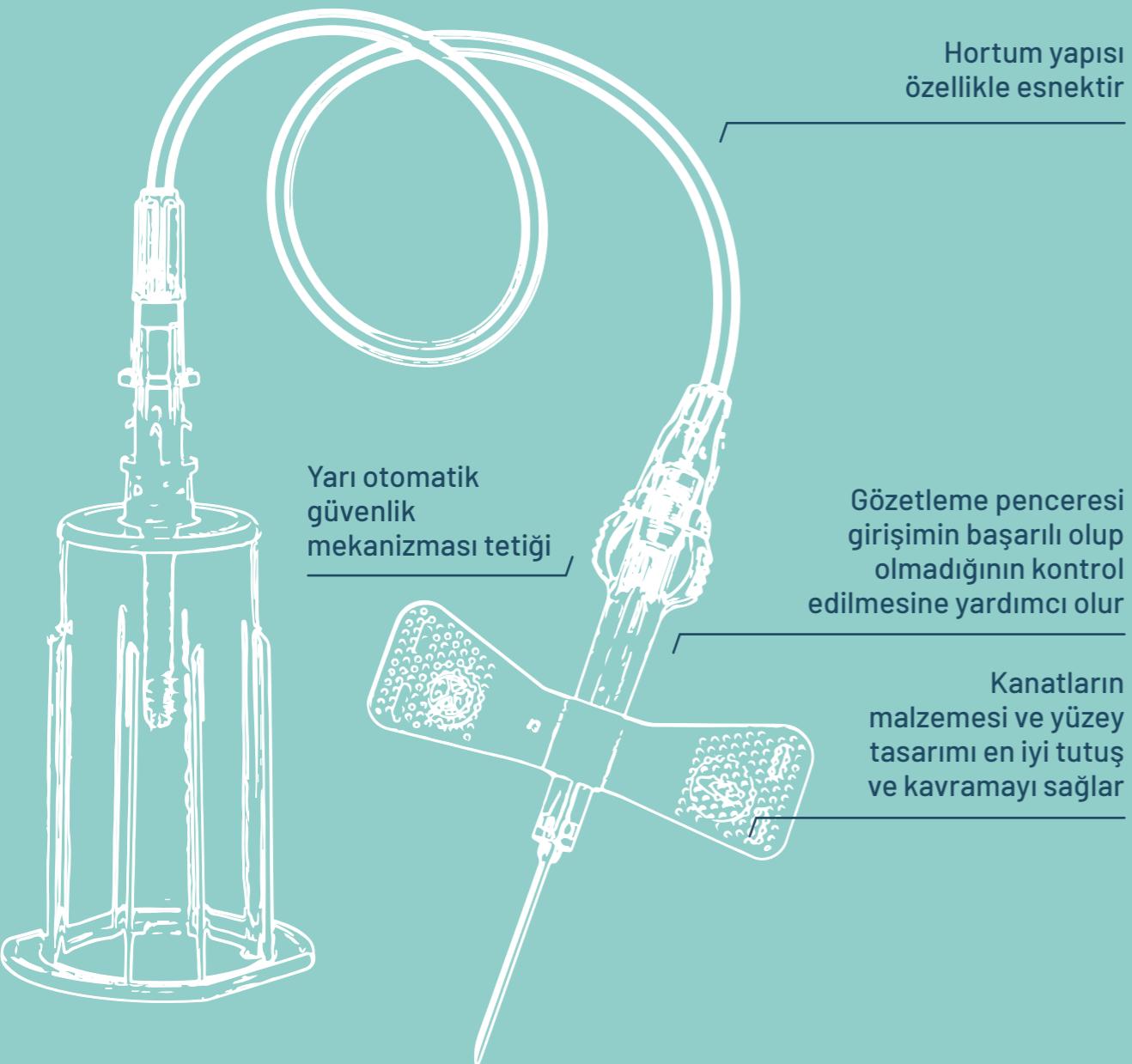

KULLANIMDA MAKİSÜM GÜVENLİK

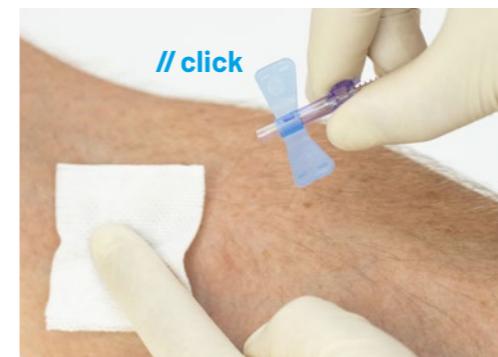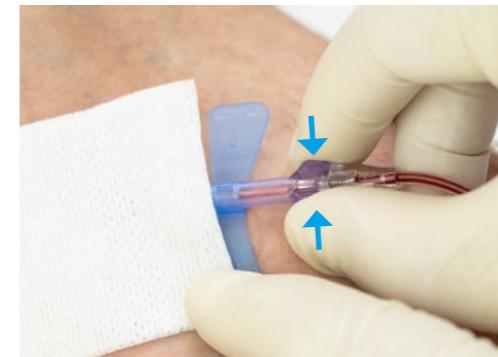

1

Mavi renkli serbest bırakma düğmelerine tek elle basarak güvenlik mekanizmasını aktifleştirin. Otomatik geri çekilmeye engel olmamaya özen gösterin.

2

iğne otomatik olarak geri çekildikten sonra bir **tık sesi** duyarsınız. Bu ses güvenlik mekanizmasının doğru ve başarılı şekilde aktifleştiğini gösterir.



YAY MEKANİZMASI

iğne hala hastanın damarındayken yarı otomatik aktivasyona izin verir.



HER SEVİYE İÇİN GÜVENLİK

Ürün yelpazemizde her güvenlik seviyesi için doğru ürünü bulabilirsiniz. Giriş seviyesinde ki ürünlerden yarı-otomatik güvenlik mekanizmalı birinci sınıf güvenlikli produktlere kadar.



KİŞİSEL TAVSİYE

Ürünlerimiz ve uygulamaları hakkında sorularınız varsa satış temsilcilerimiz size her zaman memnuniyetle yardımcı olacaktır. İhtiyaçlarınız için doğru ürünü birlikte bulabilirsiniz.



EĞİTİM OLANAKLARI

Ürünlerimizi doğru şekilde kullanmak için çok çeşitli ve geniş eğitim seçenekleri sunuyoruz. Uygulama uzmanlarımızla yüz yüze veya sanal olarak, veya web seminerleri ile, ya da web sitemizdeki çevrimiçi e-eğitim kurslarıyla eğitimler sunuyoruz.

shop.gbo.com
Bu ve daha fazla ürünü çevrimiçi mağazamızdan bulabilirsiniz.

PRODUCT OVERVIEW

VACUETTE® QUICKSHIELD Güvenlikli Tüp Tutucu

Kat. no.	Adet iç kutu / dış kutu
450230	50 / 1,000

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

Kat. no.	Renk kodu	İgne boyutu	İgne uzunluğu	İgne uzunluğu	İgne duvar kalınlığı tipi	Adet iç kutu / dış kutu
450238V1	● yeşil	21 G	1"	25 mm	ince duvarlı	30 / 360
450237V1	● yeşil	21 G	1,5"	38 mm	ince duvarlı	30 / 360

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Kat. no.	Renk kodu	İgne boyutu	İgne uzunluğu	İgne uzunluğu	İgne duvar kalınlığı tipi	Adet iç kutu / dış kutu
450235V1	● yeşil	21 G	1"	25 mm	ince duvarlı	30 / 360
450239V1	● yeşil	21 G	1,5"	38 mm	ince duvarlı	30 / 360
450226V1	● siyah	22 G	1"	25 mm	ince duvarlı	30 / 360
450228V1	● siyah	22 G	1,5"	38 mm	ince duvarlı	30 / 360

VACUETTE® GÜVENLİKLİ Kelebek Seti Kan Alma/ İnfüzyon

Kat. no.	Renk kodu	İgne boyutu	İgne uzunluğu	İgne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
451091	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	7"	18 cm	50 / 200
451092	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	7"	18 cm	50 / 200

Bu ürün için minimum sipariş miktarları ve daha uzun teslim süreleri geçerli olabilir.

VACUETTE® GÜVENLİKLİ Kelebek Set+ Luer Adaptör

Kat. no.	Renk kodu	İgne boyutu	İgne uzunluğu	İgne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
451081	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	7"	18 cm	50 / 200
451082	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	7"	18 cm	50 / 200
451090	● turuncu	25 G	19 mm	ince duvarlı	7"	18 cm	50 / 200
451095	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	50 / 200
451096	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	50 / 200
451099	● turuncu	25 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	50 / 200

Bu ürün için minimum sipariş miktarları ve daha uzun teslim süreleri geçerli olabilir.

VACUETTE® GÜVENLİKLİ Kelebek Set+ Tüp Tutucusu

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
451085	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	7"	18 cm	25 / 200
451086	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	7"	18 cm	25 / 200
451160	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	25 / 200
451161	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	25 / 200

Bu ürün için minimum sipariş miktarları ve daha uzun teslim süreleri geçerli olabilir.

GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Kan Kültürü Tutucusu

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
450182	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	24 / 240
450183	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	24 / 240
450184	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	24 / 240
450185	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	24 / 240

GÜVENLİKLİ Kan Alma / İnfüzyon Seti

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
450091	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	50 / 1,000
450191	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	50 / 1,000
450092	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	50 / 1,000
450090	● turuncu	25 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	50 / 1,000

GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
450083	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	4"	10 cm	50 / 1,000
450081	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	50 / 1,000
450095	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	50 / 1,000
450084	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	4"	10 cm	50 / 1,000
450082	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	50 / 1,000
450096	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	50 / 1,000
450099	● turuncu	25 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	50 / 1,000

GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti+ Tüp Tutucusu

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
450087	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	4"	10 cm	24 / 240
450085	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	24 / 240
450160	● yeşil	21 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	24 / 240
450088	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	4"	10 cm	24 / 240
450086	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	7,5"	19 cm	24 / 240
450161	● mavi	23 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	24 / 240

VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma/ İnfüzyon Seti

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
450120	● yeşil	21 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	7,5"	19 cm	60 / 1,080
450121	● mavi	23 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	7,5"	19 cm	60 / 1,080

VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Luer Adaptör

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
450127	● yeşil	21 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	7,5"	19 cm	60 / 1,080
450128	● yeşil	21 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	12"	30 cm	60 / 1,080
450129	● mavi	23 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	7,5"	19 cm	60 / 1,080
450130	● mavi	23 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	23"	30 cm	60 / 1,080
450132	● turuncu	25 G	19 mm	ince duvarlı	12"	30 cm	60 / 1,080

VACUETTE® EVOPROTECT GÜVENLİKLİ Kan Alma Seti + Tüp Tutucusu

Kat. no.	Renk kodu	İğne boyutu	İğne uzunluğu	İğne duvar kalınlığı tipi	Hortum uzunluğu	Hortum uzunluğu	Adet iç kutu / dış kutu
450122	● yeşil	21 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	7,5"	19 cm	30 / 540
450123	● yeşil	21 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	12"	30 cm	30 / 540
450125	● mavi	23 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	7,5"	19 cm	30 / 540
450126	● mavi	23 G	19 mm	ekstra ince duvarlı	12"	30 cm	30 / 540

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals.
Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals
only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications,
contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use
which accompanies each product or is available for download from our website at
www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local
Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty
or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved.
If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in
this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos.
Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.
Media owner: Greiner Bio-One GmbH / Manufacturer: [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980336 tr [rev.02 03.2021]


greiner
BIO-ONE