

making a difference



**WEIL JEDE
NADELSTICH-
VERLETZUNG
EINE ZU VIEL IST**

VACUETTE® QUICKSHIELD
Sicherheitsröhrchenhalter

Schutz vor Nadelstichverletzungen
bei der täglichen Blutentnahmeroutine.


greiner
BIO-ONE

EIN SCHUTZ- SCHILD

verwahrt nach der
Aktivierung die
Kanüle sicher.



Das ergonomische
Design des Halters
bietet den Fingern
einen guten Halt
bei der Punktion.

FÜR DIE TÄGLICHE BLUTENTNAHMEROUTINE


Ohne Änderung der Entnahmetechnik bietet der VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter Schutz vor Nadelstichverletzungen.

Sicherheitsröhrchenhalter der QUICKSHIELD Produktfamilie sind mit einem Mechanismus ausgestattet, der nach der Aktivierung die Kanüle sicher verwahrt und somit vor Nadelstichverletzungen schützt.

Das Schutzschild ist direkt am Halter befestigt. Durch die einhändige Aktivierung des Schutzschildes unter Zuhilfenahme einer stabilen Auflagefläche beziehungsweise des Fingers oder Daumens überzeugt das Produkt durch einfachste Handhabung bei weitreichendem Verletzungs- und Infektionsschutz.

SCHUTZSCHILD FÜR MEHR SICHERHEIT.

- / Keine Änderung der Entnahmetechnik.
- / Mehr Flexibilität in Bezug auf benutzer- und patientenspezifische Anforderungen durch das drehbare Schutzschild.
- / Aktivierung des Schutzschildes durch deutliches „Klicken“ hörbar und fühlbar.

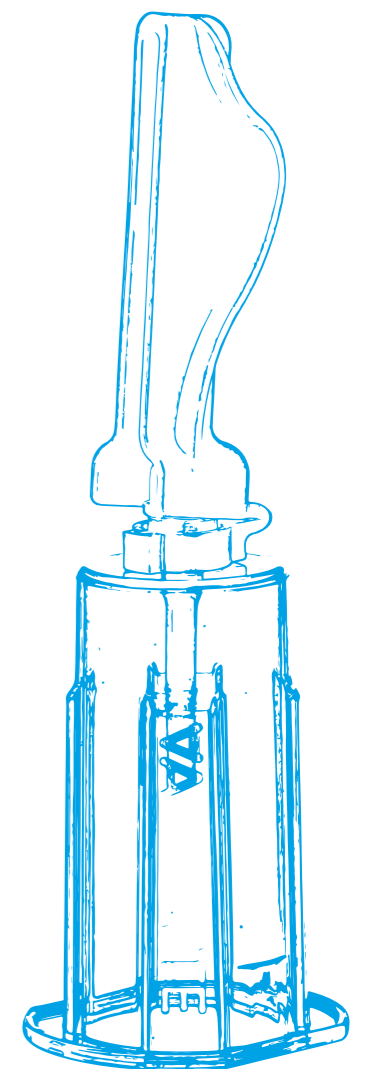



Ein Punkt auf der Kanülenschutzkappe hilft, die Position der Kanülenspitze für eine präzise Punktion zu bestimmen.

SICHERHEIT UND PRÄZISION

Das Kanülensichtfenster von VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen zur Anzeige einer erfolgreichen Venenpunktion verfügt über einen speziell entwickelten Filter, der das Totvolumen im Gegensatz zu Vergleichsprodukten um 75% reduziert.

Der Punkt auf der Nadel-
schutzkappe liegt in einer Linie mit dem Nadelschliff. Er hilft, die Position der Kanülenspitze

für eine präzise Punktion zu bestimmen. Das Schutzschild kann in die bevorzugte Position gedreht werden, ohne vorher die Nadelschutzkappe abziehen zu müssen.


Die Aktivierung des Schutzschildes nach erfolgreicher Punktion und Probengewinnung erfolgt in einem nächsten Schritt außerhalb der Vene des Patienten.

OPTISCHE KONTROLLE IN KOMBINATION MIT VISIO PLUS

Ein transparentes Kanülensichtfenster zeigt eine erfolgreiche Venenpunktion an.



Das Schutzschild des Halters kann beliebig in jede Richtung positioniert werden. Damit haben Sie freie Sicht auf die gesamte Punktionsstelle und mehr Flexibilität, um sich jeder Situation bestmöglich anzupassen.

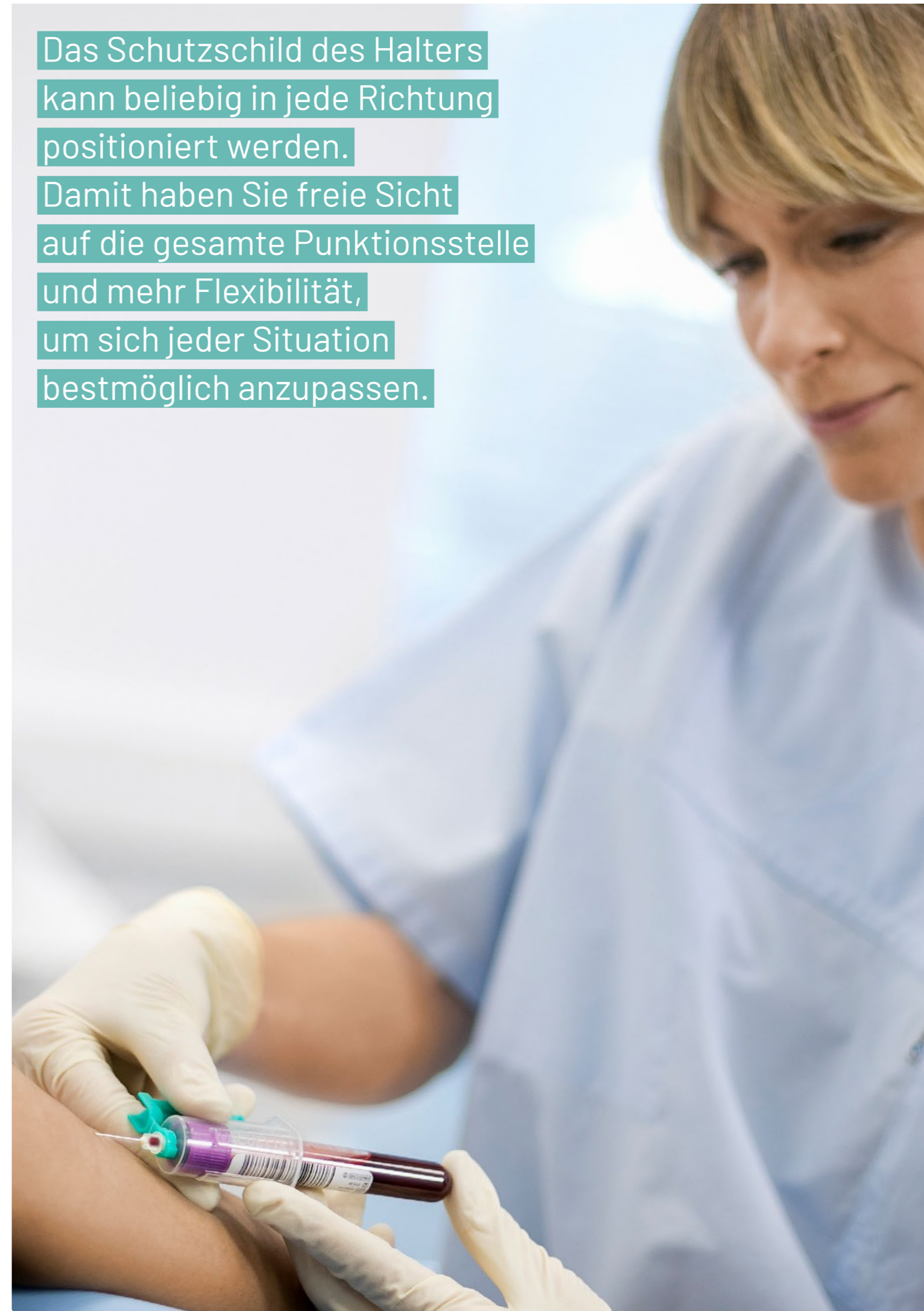

GANZ EINFACH
ZEIT SPAREN

mit bereits
vormontierter
Kanüle

VERSCHIEDENE VARIANTEN WÄHLBAR

Der VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter kann wahlweise mit VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen oder mit VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen verwendet werden.

Wir bieten ein breites Portfolio aus regulären Kanülen, Kanülen

mit visueller Punktionskontrolle und vormontierten Produkten für eine effiziente Lösung für jede Situation.

Als Kombinationsprodukt mit einer bereits vormontierten Kanüle kommt das Produkt einzeln verpackt in steriler Blisterverpackung.

DAS KOMBINIERTE PRODUKT

VACUETTE® QUICKSHIELD HALTER VORMONTIERT MIT DER KANÜLE

entweder:
VACUETTE® QUICKSHIELD Complete*

oder:
VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS**

Complete PLUS hat ein transparentes Kanülensichtfenster für eine visuelle Punktionskontrolle

Schutzschild kann beliebig in jede Richtung positioniert werden

VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter

* vormontiert mit VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle

** vormontiert mit VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle



VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter

Der Sicherheitsröhrchenhalter mit drehbarem Schutzschild eignet sich durch einfache Handhabung für die Routineblutentnahme bei normalen Venenverhältnissen.

Der Halter kann mit VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen oder mit VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen verwendet werden.



VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete ist als Kombinationsprodukt mit einer vormontierten Mehrfachentnahmekanüle erhältlich.

Das einzeln verpackte Produkt steht ohne weitere Arbeitsschritte für den sofortigen Einsatz bereit.



VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS ist als Kombinationsprodukt mit einer vormontierten VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle erhältlich.

Das transparente Sichtfenster ermöglicht eine visuelle Punktionskontrolle. Das Produkt steht ohne weitere Arbeitsschritte für den sofortigen Einsatz bereit.

SCHUTZSCHILD



GRÖSSTMÖGLICHE FLEXIBILITÄT

Das drehbare Schutzschild gewährleistet freie Sicht auf die gesamte Punktionsstelle und ermöglicht eine flexible Anpassung an alle Situationen.



EINHÄNDIGE AKTIVIERUNG

Das Schutzschild wird einhändig entweder unter Zuhilfenahme einer stabilen Auflagefläche oder mit dem Finger oder Daumen aktiviert.



SCHUTZ

Bei der Aktivierung ist ein deutliches „Klick“ hörbar. Einmal aktiviert ist die Kanüle sicher und irreversibel gesichert und schließt damit das Risiko einer Nadelstichverletzung am Weg zur Entsorgung aus.

BITTE
BEACHTEN
SIE DIE
GEBRAUCHS-
ANWEISUNG
auf www.gbo.com

AKTIVIERUNG DES SICHERHEITSMECHANISMUS

Option 1



Option 2



1

Aktivieren Sie den Sicherheitsmechanismus **entweder auf einer stabilen Auflagefläche oder mit dem Finger oder Daumen.**

2

Sobald das Schild sicher einrastet, ist ein **Klicken** zu hören.



MEHR SICHERHEIT

Sobald das Schild eingerastet ist, ist die Nadel sicher und irreversibel verschlossen.



ERHÖHTER PATIENTENKOMFORT

In Kombination mit VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen dient das Kanülensichtfenster als optische Kontrolle zur Anzeige einer erfolgreichen Venenpunktion.



SICHERHEIT UND PRÄZISION

Ein Punkt auf der Kanülenschutzkappe hilft, die Position der Kanülenspitze für eine optimale Vorbereitung des Produktes vor der Punktion zu bestimmen.



KEINE ÄNDERUNG DER ENTNAHMETECHNIK

Aufgrund des drehbaren Schutzschildes und des ergonomischen Designs ist das Produkt gleichwertig für Links- und Rechtshänder verwendbar.

PRODUKTÜBERSICHT

VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter

Art. Nr.	Stück UVP / VP
450230	50 / 1.000

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadellänge	Stück UVP / VP
450238V1	● grün	21 G	1"	25 mm	30 / 360
450237V1	● grün	21 G	1,5"	38 mm	30 / 360

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadellänge	Stück UVP / VP
450235V1	● grün	21 G	1"	25 mm	30 / 360
450239V1	● grün	21 G	1,5"	38 mm	30 / 360
450226V1	● schwarz	22 G	1"	25 mm	30 / 360
450228V1	● schwarz	22 G	1,5"	38 mm	30 / 360

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, ÖSTERREICH

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



Diese Produktinformationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Produkte von Greiner Bio-One dürfen nur von entsprechend geschultem medizinischem Fachpersonal in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gebrauchsanweisung (IFU) verwendet werden. Eine Auflistung der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung, die jedem Produkt beiliegt oder zum Download auf unserer Webseite www.gbo.com (Download Center) abrufbar ist. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich an Ihren lokalen Greiner Bio-One Vertriebspartner oder besuchen Sie unsere Website.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung, Gewährleistung oder Garantie der Greiner Bio-One GmbH ist ausgeschlossen. Alle Rechte, Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. Sofern nicht anders angeführt, verfügt Greiner Bio-One GmbH über alle Urheberrechte und/oder sonstigen (Verwendungs-)Rechte in den vorliegenden Unterlagen, insbesondere an Kennzeichen, wie an angeführten (Wort-Bild-)Marken, Logos. Eine Verwendung, Vervielfältigung oder jeder sonstige Gebrauch der Rechte der Greiner Bio-One GmbH ist ausdrücklich untersagt.
Medieninhaber: Greiner Bio-One GmbH / **Hersteller:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980958 de [rev.02.08.2022]


greiner
BIO-ONE