


making a difference



**CAR NOUS SOMMES
CONVAINCUS QUE
CHAQUE PIQÛRE
D'AIGUILLE EST UNE
PIQÛRE DE TROP**

VACUETTE® QUICKSHIELD

Corps de prélèvement sécurité

Protection contre les blessures par
piqûre d'aiguille lors du prélèvement
sanguin quotidien.



greiner
BIO-ONE

LE BOUCLIER PROTECTEUR

enferme l'aiguille
après activation.



La conception
ergonomique du corps
de prélèvement garantit
une bonne prise en main
pendant le prélèvement.

PAS DE CHANGEMENT DANS LA TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT

Le corps de prélèvement sécurité VACUETTE® QUICKSHIELD de Greiner Bio-One peut être utilisé avec des aiguilles de prélèvement à usage multiple VACUETTE® ou avec des aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS. Sur notre VACUETTE® QUICKSHIELD Complete et notre VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS, les aiguilles sont déjà assemblées.


Le bouclier de sécurité est fixé directement sur le corps de prélèvement. Grâce au dé-

clenchement à une main du bouclier de sécurité à l'aide d'une surface stable ou du doigt ou du pouce, ce dispositif se distingue grâce à sa facilité de manipulation et à sa protection optimale contre les blessures et les infections.

Le corps de prélèvement sécurité VACUETTE® QUICKSHIELD offre une protection contre les blessures par piqûre d'aiguille sans modification de la technique de prélèvement.

BOUCLIER PROTECTEUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ.

- / Pas de changement dans la technique de prélèvement.
- / Plus de flexibilité en matière d'exigences spécifiques de l'utilisateur et du patient grâce au bouclier de sécurité rotatif.
- / Déclenchement du bouclier de sécurité indiqué par un clic audible et tactile.

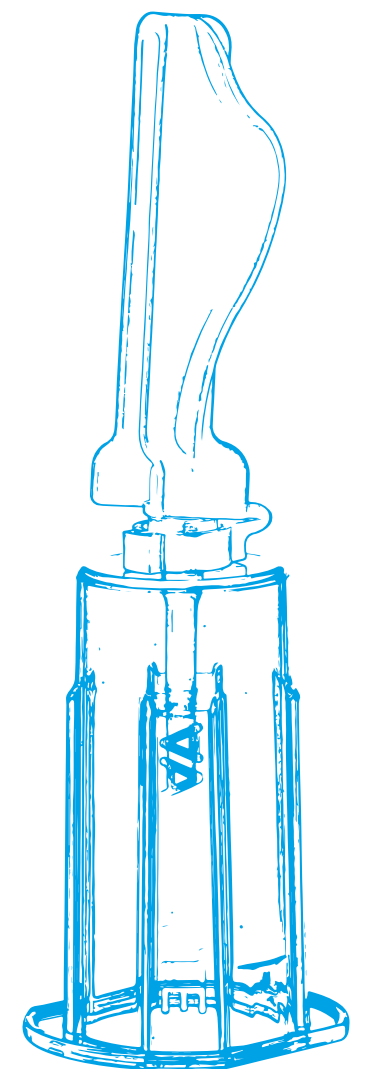



Un point d'orientation situé sur le capuchon protecteur de l'aiguille indique la position de la pointe de l'aiguille pour une ponction précise.

SÉCURITÉ ET PRÉCISION

La fenêtre de visualisation transparente des aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS pour un contrôle visuel de la ponction est dotée d'un filtre spécialement conçu qui réduit le volume mort de 75 % par rapport aux produits comparables.

Le point sur le capuchon protecteur de l'aiguille est aligné avec le biseau de l'aiguille. Il permet d'indiquer la position

de la pointe de l'aiguille pour une ponction précise. Le bouclier protecteur peut être tourné dans la position souhaitée sans nécessité de retirer le capuchon protecteur de l'aiguille au préalable.


Une fois la ponction et le prélèvement réussis, l'étape suivante consiste à activer le bouclier protecteur lors du retrait de la veine du patient.

CONTRÔLE VISUEL EN ASSOCIATION AVEC VISIO PLUS

Une fenêtre transparente permet le contrôle visuel d'une ponction veineuse réussie.



Le bouclier protecteur peut être positionné dans n'importe quelle direction. Vous disposez ainsi d'une visibilité optimale de l'ensemble du site de ponction et d'une plus grande flexibilité pour vous adapter au mieux à toute situation.

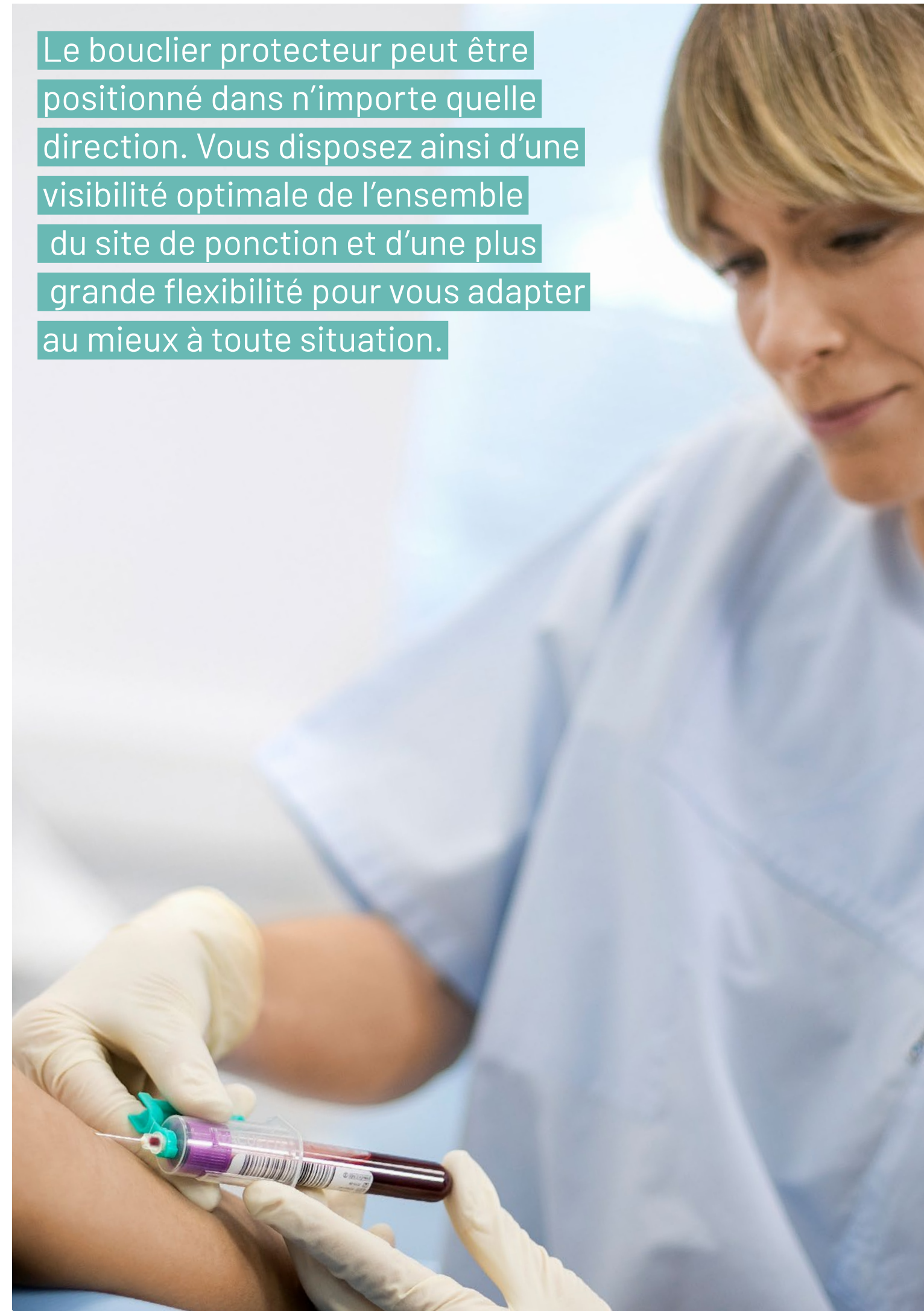

**GAGNEZ
DU TEMPS**

grâce à l'aiguille
pré-assemblée
VISIO PLUS

CHOIX ENTRE DIFFÉRENTES OPTIONS

Le corps de prélèvement sécurité VACUETTE® QUICKSHIELD peut être utilisé avec des aiguilles de prélèvement à usage multiple VACUETTE® ou avec des aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS.

Nous proposons une large gamme d'aiguilles classiques,

d'aiguilles avec fenêtre de visualisation et de produits pré-assemblés pour une solution efficace dans chaque situation.

Pré-assemblé à l'aiguille, le produit est emballé individuellement sous blister stérile.



VACUETTE® QUICKSHIELD
Corps de prélèvement de sécurité

Le corps de prélèvement avec bouclier protecteur rotatif convient au prélèvement sanguin de routine dans des conditions veineuses normales grâce à sa manipulation facile.

Le corps de prélèvement peut être utilisé avec des aiguilles de prélèvement VACUETTE® à usage multiple ou avec des aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS.



VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete est pré-assemblé avec une aiguille de prélèvement à usage multiple.

Le produit emballé individuellement est immédiatement prêt à l'emploi, sans étape supplémentaire.



VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS est pré-assemblé avec une aiguille VACUETTE® VISIO PLUS.

La fenêtre transparente permet de contrôler visuellement la ponction. Le produit est immédiatement prêt à l'emploi sans étape supplémentaire.

LA SOLUTION COMPLÈTE

CORPS DE PRÉLÈVEMENT VACUETTE® QUICKSHIELD PRÉ-ASSEMBLÉ AVEC L'AIGUILLE

Pré-assemblé à l'aiguille, le corps de prélèvement sécurité est emballé individuellement sous blister stérile.

Le bouclier de sécurité peut être positionné dans n'importe quelle direction

VACUETTE® QUICKSHIELD
Corps de prélèvement sécurité

OU :
VACUETTE® QUICKSHIELD Complete*

OU :
VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS**

L'aiguille VISIO PLUS possède une fenêtre transparente pour le contrôle visuel du retour veineux

* pré-assemblé avec l'aiguille de prélèvement VACUETTE® à usage multiple

** pré-assemblé avec l'aiguille VACUETTE® VISIO PLUS



FLEXIBILITÉ OPTIMALE

Le bouclier protecteur rotatif garantit une visualisation optimale de l'ensemble du site de ponction et offre à l'utilisateur la flexibilité nécessaire pour s'adapter à toutes les situations.



ACTIVATION À UNE MAIN

Le bouclier protecteur est activé d'une main, soit à l'aide d'une surface solide, soit avec le doigt ou le pouce.



PROTECTION

Un clic sonore indique la bonne activation. Une fois l'activation effectuée, l'aiguille est enfermée de manière sûre et irréversible, ce qui élimine le risque de piqûre d'aiguille lors de son élimination.

VEUILLEZ
SUIVRE LES
INSTRUCTIONS
D'UTILISATION


figurant sur
www.gbo.com

ACTIVATION DU MÉCANISME DE SÉCURITÉ

Option 1



Option 2

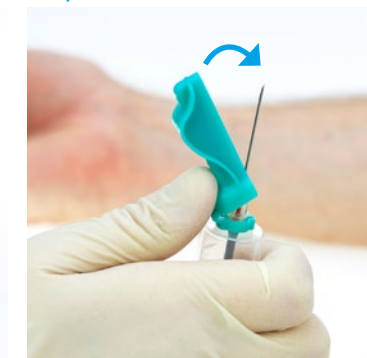

1

Déclenchez le mécanisme de sécurité **soit sur une surface stable, soit avec le doigt ou le pouce.**

2

Un **clic** est audible dès que l'aiguille est mise en sécurité.



UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE

Une fois le bouclier en place, l'aiguille est enfermée de manière sûre et irréversible.



CONFORT PATIENT OPTIMISÉ

Associé aux aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, le dispositif permet un contrôle visuel de la ponction grâce à la fenêtre de visualisation transparente.



SÉCURITÉ ET PRÉCISION

Un point situé sur le capuchon protecteur de l'aiguille indique la position de l'extrémité de l'aiguille pour une préparation optimale du produit avant la ponction.



AUCUN CHANGEMENT DANS LA TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT

Grâce au bouclier protecteur rotatif et à sa conception ergonomique, le produit peut être utilisé aussi bien par les gauchers que par les droitiers.

APERÇU PRODUIT

Corps de prélèvement sécurisé VACUETTE® QUICKSHIELD

Réf.	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450230	50 / 1,000

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

Réf.	Code couleur	Taille d'aiguille	Longueur d'aiguille	Longueur d'aiguille	Type de paroi de l'aiguille	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450238V1	● vert	21 G	1"	25 mm	parois fines	30 / 360
450237V1	● vert	21 G	1.5"	38 mm	parois fines	30 / 360

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Réf.	Code couleur	Taille d'aiguille	Longueur d'aiguille	Longueur d'aiguille	Type de paroi de l'aiguille	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450235V1	● vert	21 G	1"	25 mm	parois fines	30 / 360
450239V1	● vert	21 G	1.5"	38 mm	parois fines	30 / 360
450226V1	● noir	22 G	1"	25 mm	parois fines	30 / 360
450228V1	● noir	22 G	1.5"	38 mm	parois fines	30 / 360

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful editing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this/document / these documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.
Media owner: Greiner Bio-One GmbH / **Manufacturer:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980960 fr [rev.01.08.2021]


greiner
BIO-ONE