

DOUCEUR ET DÉLICATESSE POUR LES PATIENTS JEUNES ET MOINS JEUNES



MINICOLLECT®

Lancettes de sécurité

Les lancettes de sécurité MiniCollect® sont conçues pour un usage unique. Selon le type de lancette, de lame ou d'aiguille, différentes profondeurs de pénétration sont disponibles.

Les lancettes de sécurité MiniCollect® garantissent une sécurité optimale lors du prélèvement sanguin capillaire. Une fois la ponction effectuée en exerçant une pression sur le mécanisme de déclenchement, la lame/l'aiguille se rétracte automatiquement de manière irréversible dans le boîtier en plastique.

- / Prélèvement sanguin capillaire sûr et hygiénique
- / Plus grande précision pour un prélèvement aisé des échantillons
- / Code couleur clairement identifiable des différents types
- / Conception ergonomique pour une manipulation plus aisée
- / Profondeur de pénétration contrôlée

LARGE GAMME DE LANCETTES

Le type de lancette (aiguille/lame) et la profondeur de pénétration sont identifiés par leur couleur.

VOLUME D'ÉCHANTILLON SANGUIN

... avec utilisation d'une lancette de sécurité avec aiguille :

- lancette violette
- lancette orange

... avec utilisation d'une lancette de sécurité avec lame :

- lancette rose
- lancette verte
- lancette bleue



APERÇU PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

Lancettes de sécurité MiniCollect®

stérile

| Réf. | Code couleur | Lame | Aiguille | Taille de lame/aiguille | Profondeur de pénétration | Intérieur / Extérieur [0té.] |
|--------|--------------|------|----------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 450427 | ● rose | X | | 1,5 mm | 1 mm | 200 / 2 000 |
| 450428 | ● vert | X | | 1,5 mm | 1,5 mm | 200 / 2 000 |
| 450429 | ● bleu | X | | 1,5 mm | 2 mm | 200 / 2 000 |
| 450438 | ● lavande | | X | 28G | 1,25 mm | 200 / 2 000 |
| 450439 | ● orange | | X | 23G | 2,25 mm | 200 / 2 000 |


RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

Veillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site internet www.gbo.com.



1

Réchauffer et désinfecter le site de ponction conformément à vos directives internes.

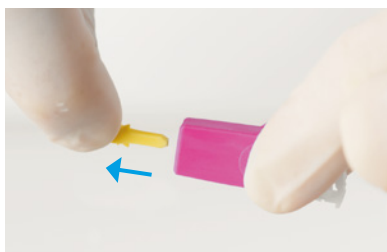

2

Retirer le dispositif de protection.



3

Positionner la lancette, appuyer sur le bouton de déclenchement, puis la jeter.



4

Exercer une légère pression sur la zone de ponction et éliminer la première goutte de sang.