

Your **Power** for Health



greiner bio-one



VACUETTE®

Sicherheitsblut- entnahmeset

Unsere Innovationen
für Ihre Sicherheit

www.gbo.com/preanalytics


Sicherheitsblutentnahmeset

Speziell bei schwierigen Venenverhältnissen

Das Sicherheitsblutentnahmeset wurde speziell für Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen entwickelt, ist jedoch ebenso für jede andere Blutentnahmesituation geeignet, da es dem Patienten einen besonders sanften Abnahmekomfort bietet.

Das Produkt bietet ein hohes Maß an Sicherheit durch Aktivierung des Schutzmechanismus noch während sich die Kanüle innerhalb der Vene befindet. Die korrekte und vollständige Aktivierung wird zusätzlich durch ein deutlich hörbares Klicken angezeigt.

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor dem Risiko einer Nadelstichverletzung, denn jede Verletzung ist bereits eine zuviel.

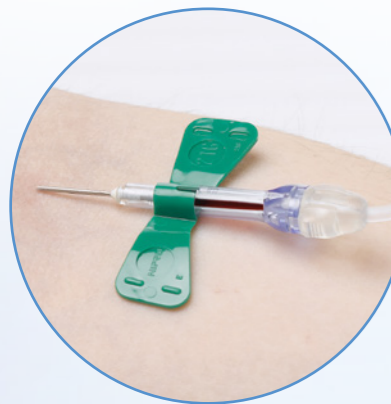


Transparentes Sichtfenster

Automatische Blutflusskontrolle im transparenten Sichtfenster zeigt an, ob die Vene richtig punktiert wurde.

Wahlweise

Kann sowohl für eine Blutentnahme als auch für Infusionen für bis zu fünf Stunden eingesetzt werden.

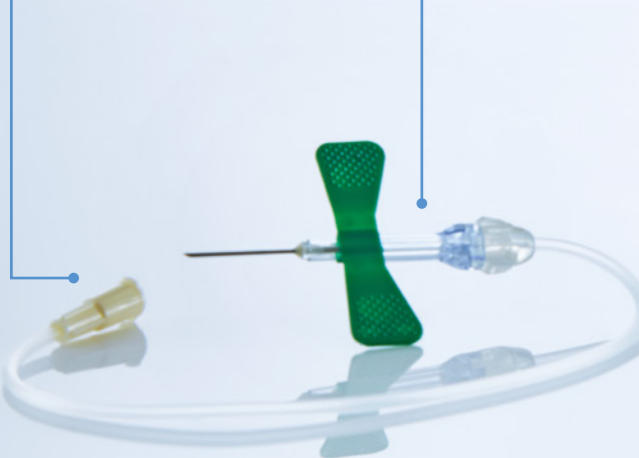

Sicherheitsmechanismus

Einfaches Auslösen des Sicherheitsmechanismus durch leichten Druck auf die beiden Seitenteile des Schiebers. Die vollständige Aktivierung ist durch ein deutliches „Klicken“ hörbar.



Mehr Flexibilität

Ein Schlauch mit unterschiedlichen Längen bietet mehr Flexibilität bei der Blutentnahme.

Sicherheitsblutentnahmesets Kombiprodukte

Als praktisches Kombiprodukt erhalten Sie das Sicherheitsblutentnahmeset auch bereits vormontiert.

Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter

- Vormontiertes Set samt Luer-Adapter in steriler Blisterverpackung.
- Die Handhabung wird optimiert.



Art. Nr. 450081-84
Art. Nr. 450095-96
Art. Nr. 450099

Sicherheitsblutentnahmeset + Halter

- Vormontiertes Set samt Halter in steriler Blisterverpackung.
- Das Einschrauben in den Halter entfällt.
- Die praktische Komplettlösung spart Zeit.



Art. Nr. 450080
Art. Nr. 450085-88
Art. Nr. 450160-61


Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter

- Vormontiertes Set samt Blutkulturhalter in steriler Blisterverpackung.
- Speziell für die in einem Arbeitsschritt durchführbare Entnahme mit gängigen Blutkulturflaschen sowie **VACUETTE®** Blutentnahmeröhrchen entwickelt.
- Durch die flexible Verwendung wird die Anzahl der Entnahmen reduziert und somit eine kostengünstige und patientenschonende Arbeitsweise unterstützt.



Art. Nr. 450182-85

Anwendungshinweise *

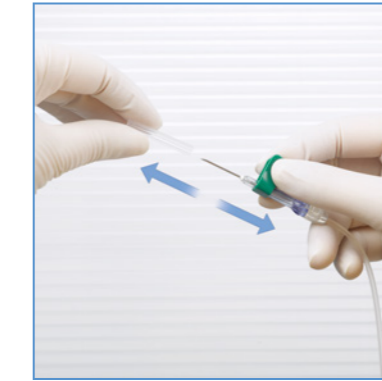


1 Entfernen der Schutzkappe




2 Venenpunktion




3 Einsetzen des Röhrchens

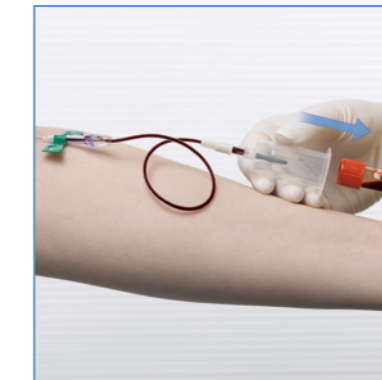


4 Abziehen des Röhrchens

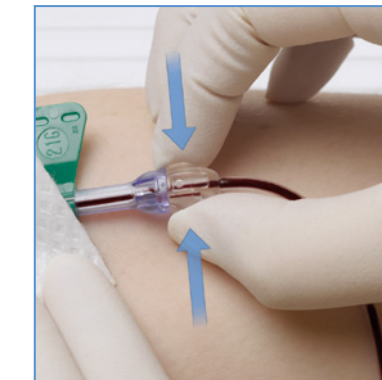

5 Aktivierung d. Sicherheitsmechanismus (durch Zusammendrücken und nach hinten Ziehen des hellen Bereiches)

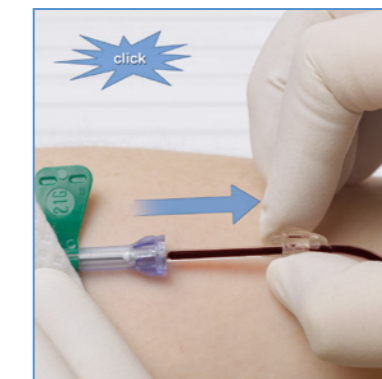

6 Hörbares Klicken beim Einrasten

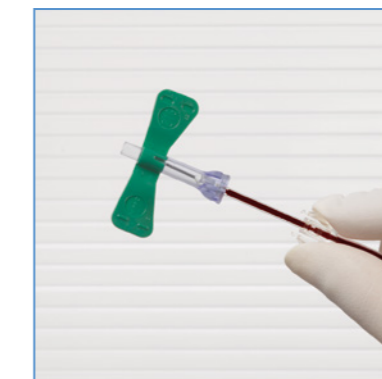

7 Aktiviertes Sicherheitsblutentnahmeset



8 Entsorgung

* Die vollständigen Handhabungshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Sicherheitsblutentnahmesets

Art. Nr.	Beschreibung	Größe		Verpackung	
				Innen	Außen
Sicherheitsblutentnahme- / infusionssets (steril)					
450090	Sicherheitsblutentnahme- / infusionsset	Schlauchlänge: 19cm	25G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450091	Sicherheitsblutentnahme- / infusionsset	Schlauchlänge: 19cm	21G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450191	Sicherheitsblutentnahme- / infusionsset	Schlauchlänge: 30cm	21G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450092	Sicherheitsblutentnahme- / infusionsset	Schlauchlänge: 19cm	23G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450192	Sicherheitsblutentnahme- / infusionsset	Schlauchlänge: 30cm	23G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
Sicherheitsblutentnahmesets + Luer Adapter (steril)					
450083	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter	Schlauchlänge: 10cm	21G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450081	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter	Schlauchlänge: 19cm	21G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450095	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter	Schlauchlänge: 30cm	21G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450084	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter	Schlauchlänge: 10cm	23G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450082	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter	Schlauchlänge: 19cm	23G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450096	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter	Schlauchlänge: 30cm	23G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
450099	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter	Schlauchlänge: 30cm	25G x 3/4"	50 Stk.	1.000 Stk.
Sicherheitsblutentnahmesets + Halter (steril)					
450087	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	Schlauchlänge: 10cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450085	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	Schlauchlänge: 19cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450160	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	Schlauchlänge: 30cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450088	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	Schlauchlänge: 10cm	23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450086	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	Schlauchlänge: 19cm	23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450161	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	Schlauchlänge: 30cm	23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450080	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	Schlauchlänge: 30cm	25G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
Sicherheitsblutentnahmesets + Blutkulturhalter (steril)					
450182	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450183	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm	23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450184	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 30cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450185	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 30cm	23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.

Diese Produkte enthalten keine Komponenten aus natürlichem Latexgummi oder aus DEHP.



Österreich (Firmenzentrale)

Greiner Bio-One GmbH
Tel +43 7583 6791-0
E-Mail office@at.gbo.com

Großbritannien

Greiner Bio-One Ltd.
Tel +44 1453 8252 55
E-Mail info@uk.gbo.com

Brasilien

Greiner Bio-One Brasil
Tel +55 19 3468-9600
E-Mail office@br.gbo.com

Indien

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tel +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Niederlande

Greiner Bio-One B.V.
Tel +31 172 4209 00
E-Mail info@nl.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Tel +66 38 4656 33
E-Mail office@th.gbo.com

China

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tel +86 10 83 55 19 91
E-Mail office@cn.gbo.com

Indonesien

Greiner Bio One Indonesia KPPA
Tel +62 812 1391 3900
E-Mail office@id.gbo.com

Portugal

VACUETTE Portugal S.A.
Tel +351 252 647 721
E-Mail info@vacuette.pt

Türkei

Greiner Bio-One Turkey
Tel +90 216 576 6004
E-Mail office@tr.gbo.com

Deutschland

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tel +49 7022 948-0
E-Mail office@de.gbo.com

Italien

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Tel +39 02 9438 3340
E-Mail office@it.gbo.com

Schweiz

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tel +41 71 228 55 22
E-Mail office@ch.gbo.com

Ungarn

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tel +36 96 213 088
E-Mail office@hu.gbo.com

Frankreich

Greiner Bio-One SAS
Tel +33 1 69 86 25 25
E-Mail accueil@gbo.com

Japan

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Tel +81 3 3505 8875
E-Mail info@jp.gbo.com

Spanien

Greiner Bio One España, S.A.U.
Tel +34 91 652 77 07
E-Mail info@es.gbo.com

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Tel +1 704 261-7800
E-Mail info@us.gbo.com

