

VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter & Zubehör:

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung			
		Innen	Außen		
VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter					
450230	VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter	50 Stk.	1.000 Stk.		
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1", steril, einzeln verpackt Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.		
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1 1/2", steril, einzeln verpackt Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.		
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1", steril, einzeln verpackt Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.		
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1 1/2", steril, einzeln verpackt Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.		
VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen (steril)					
450071	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, schwarz	0.7 x 25mm	22G x 1"	100 Stk.	2.000 Stk.
450072	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, grün	0.8 x 25mm	21G x 1"	100 Stk.	2.000 Stk.
450073	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, gelb	0.9 x 25mm	20G x 1"	100 Stk.	2.000 Stk.
450075	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, schwarz	0.7 x 38mm	22G x 1 1/2"	100 Stk.	2.000 Stk.
450076	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, grün	0.8 x 38mm	21G x 1 1/2"	100 Stk.	2.000 Stk.
450077	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, gelb	0.9 x 38mm	20G x 1 1/2"	100 Stk.	2.000 Stk.
VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen (steril)					
450040	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, grün	0.8 x 38mm	21G x 1 1/2"	100 Stk.	2.000 Stk.
450041	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, schwarz	0.7 x 38mm	22G x 1 1/2"	100 Stk.	2.000 Stk.
450042	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, grün	0.8 x 25mm	21G x 1"	100 Stk.	2.000 Stk.
450043	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, schwarz	0.7 x 25mm	22G x 1"	100 Stk.	2.000 Stk.

Diese Produkte enthalten keine Komponenten aus natürlichem Latexgummi.

Your Power for Health

greiner bio-one



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.gbo.com/preanalytics oder kontaktieren Sie uns:

Österreich (Firmenzentrale)
Greiner Bio-One GmbH
Tel +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-Mail office@at.gbo.com

Frankreich
Greiner Bio-One SAS
Tel +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-Mail office@fr.gbo.com

Schweiz
Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tel +41 71 228 55 22
Fax +41 71 228 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Ungarn
Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tel +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

Brasilien
Greiner Bio-One Brasil
Tel +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-Mail office@br.gbo.com

Großbritannien
Greiner Bio-One Ltd.
Tel +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Spanien
VACUETTE Espana S.A.
Tel +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

USA
Greiner Bio-One North America Inc.
Tel +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-Mail info@us.gbo.com

China
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tel +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

Indien
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tel +91 120 456 8787
Fax +91 120 456 8788
E-Mail info@gboindia.com

Thailand
Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tel +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail office@th.gbo.com

Deutschland
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tel +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

Niederlande
Greiner Bio-One B.V.
Tel +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Your Power for Health

greiner bio-one



VACUETTE®
QUICKSHIELD
Sicherheitsröhrchenhalter

„Do the Twist“



980958 rev.01, 11.2014 d

VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter

Do the twist

Mehr Flexibilität – das bietet der neue **VACUETTE®** QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter.

Das Schutzschild des neu gestalteten Halters kann nun beliebig in jede Richtung positioniert werden. Frei nach dem Slogan „Do the twist“ haben Rechts- und Linkshänder die Möglichkeit, das Schutzschild in die für sie am besten geeignete Position zu drehen.

Das drehbare Schutzschild gewährleistet:

- freie Sicht auf die gesamte Punktionsstelle
- mehr Flexibilität, um sich jeder Situation bestmöglich anzupassen

Für die tägliche Blutentnahmeroutine

Der **VACUETTE®** QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter von Greiner Bio-One ist besonders für die tägliche Blutentnahmeroutine geeignet. Durch die Aktivierung des Schutzschildes mit nur einer Hand und unter Zuhilfenahme einer stabilen Auflagefläche beziehungsweise des Daumens überzeugt das Produkt durch einfachste Handhabung bei weitreichendem Verletzungs- und Infektionsschutz.




Das ergonomische Design des Halters bietet den Fingern einen besseren Halt bei der Punktion.

Das Schutzschild ist direkt am Halter befestigt. Die Aktivierung des Schutzschildes erfolgt durch den Anwender außerhalb der Vene des Patienten.

Ohne Änderung der Entnahmetechnik bietet der **VACUETTE®** QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter Schutz vor Nadelstichverletzungen.



VACUETTE® QUICKSHIELD kann wahlweise mit **VACUETTE®** Mehrfachentnahmekanülen oder mit **VACUETTE®** VISIO PLUS Kanülen verwendet werden. Beide Kanülen weisen einen speziellen Schliff der Nadelspitze auf, der eine optimale Punktion ermöglicht. Der Punkt auf der Nadelschutzkappe liegt in einer Linie mit dem Nadelschliff. Er dient als Indikator der Position des Nadelschliffs, sodass der Anwender das Schutzschild in die bevorzugte Position drehen kann, ohne vorher die Nadelschutzkappe abziehen zu müssen. Jetzt auch als Kombinationsprodukt mit einer vormontierten **VACUETTE®** VISIO PLUS Kanüle erhältlich: **VACUETTE®** QUICKSHIELD Complete PLUS.

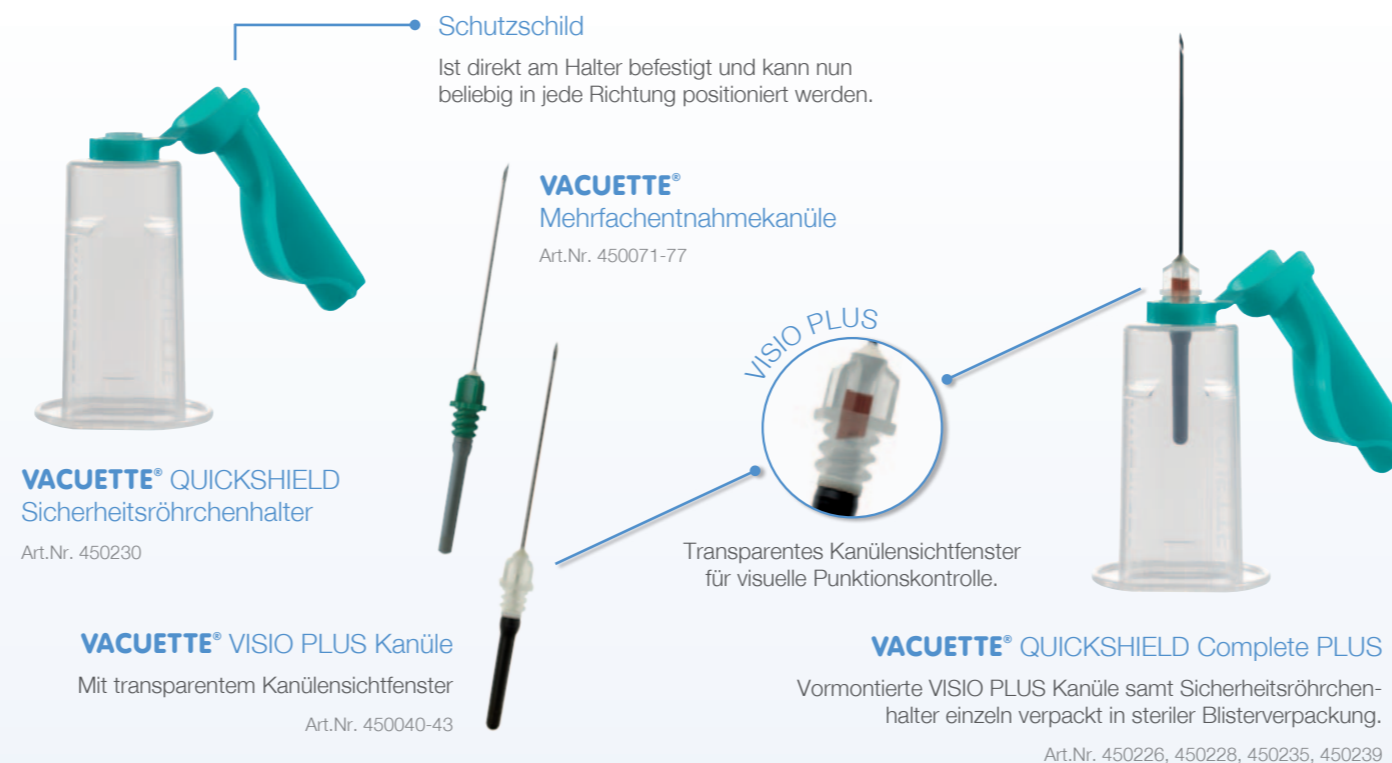


VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle
Mit transparentem Kanülsichtfenster
Art.Nr. 450040-43

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS
Vormontierte VISIO PLUS Kanüle samt Sicherheitsröhrchenhalter einzeln verpackt in steriler Blisterverpackung.
Art.Nr. 450226, 450228, 450235, 450239

Vorteile des **VACUETTE®** QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalters:

- Mehr Flexibilität in Bezug auf benutzer- und patientenspezifische Anforderungen durch das drehbare Schutzschild
- Aktivierung mit Hilfe einer stabilen Auflagefläche oder des Daumens
- Besonders benutzerfreundlich durch Aktivierung mit nur einer Hand
- Sicherheitsprodukt geeignet zur Einhaltung der Richtlinie 2010/32
- Positionspunkt auf der Nadelschutzkappe als Orientierungshilfe für die optimale Ausrichtung des Nadelschliffs
- Keine Änderung der Entnahmetechnik
- Aktivierung des Schutzschildes durch deutliches „Klicken“ hörbar und fühlbar
- Gleichwertig für Links- und Rechtshänder verwendbar
- Farbliche Differenzierung zur Vorgängerversion durch farblosen Röhrchenhalter

Anwendungshinweise *

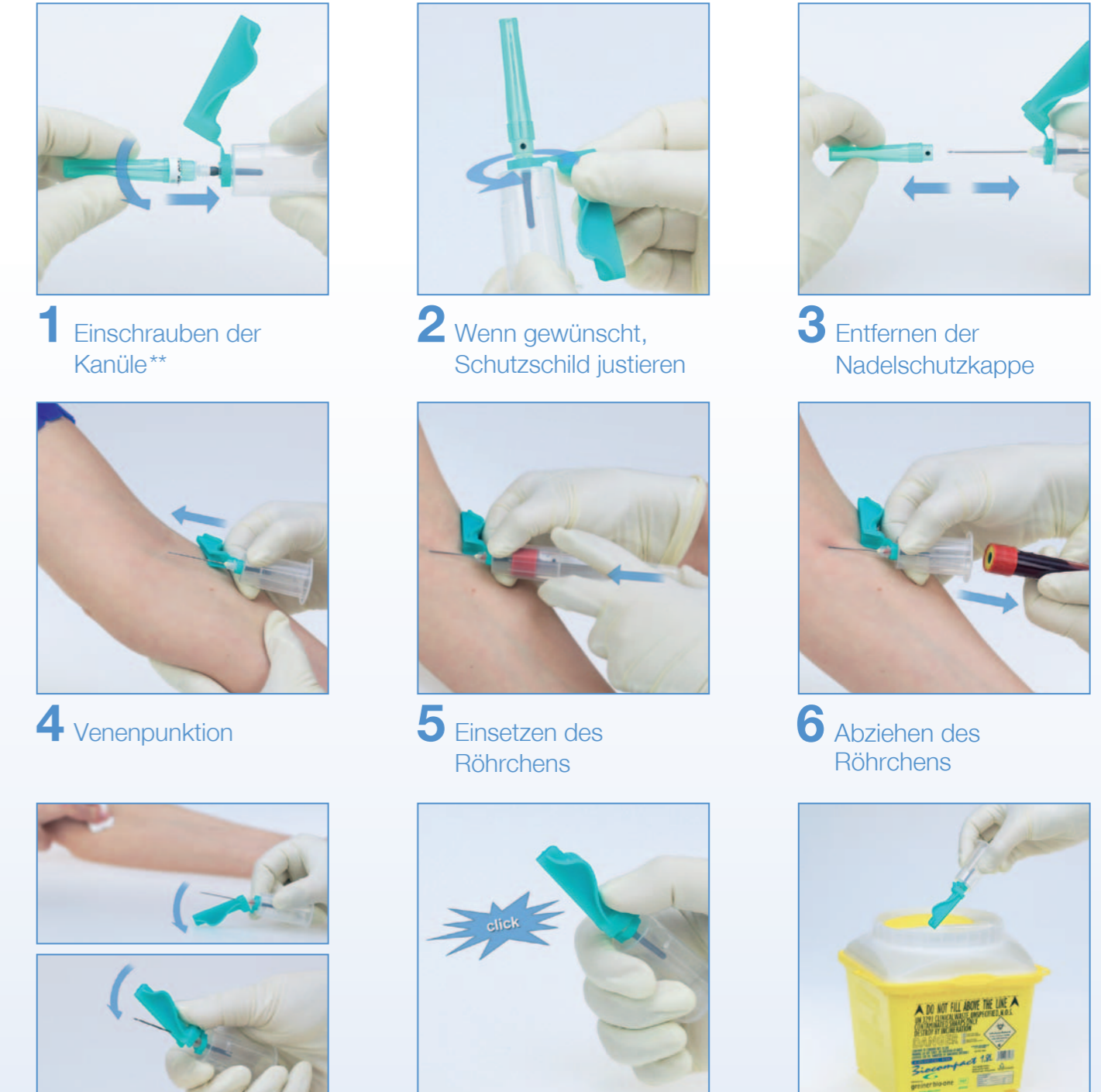

1 Einschrauben der Kanüle**

2 Wenn gewünscht, Schutzschild justieren

3 Entfernen der Nadelschutzkappe



4 Venenpunktion



5 Einsetzen des Röhrchens



6 Abziehen des Röhrchens



7 Aktivierung d. Sicherheitsmechanismus
(unter Zuhilfenahme einer stabilen Auflagefläche oder des Daumens)



8 Hörbares Klicken beim Einrasten



9 Entsorgung

Der **VACUETTE®** QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter ist zusammen mit den **VACUETTE®** Blutentnahmeröhrchen und Kanülen als System zur einmaligen Verwendung für die tägliche venöse Blutentnahme geeignet.

* Die vollständigen Handhabungshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
** Arbeitsschritt entfällt bei **VACUETTE®** QUICKSHIELD Complete PLUS.