


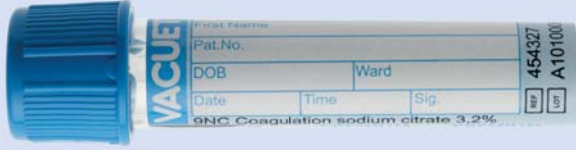












# Blutentnahmereihenfolge

## VACUETTE® Blutentnahmeröhrchen

-  Blutkultur/Discard-Röhrchen 
-  Gerinnung/CTAD\* 
-  Serum mit/ohne Gel 
-  Heparin mit/ohne Gel 
-  EDTA mit/ohne Gel 
-  Glukose 
-  Alle anderen 

\* Bei erstmaliger Entnahme nur für Routinetests geeignet (z.B. PT und aPTT).

In Fällen, in denen keine Blutkultur notwendig ist, empfiehlt Ihnen GBO den Einsatz von Röhrchen ohne Additive.

HINWEIS: Bitte beachten Sie für die Reihenfolge der Blutentnahme immer die Vorgaben Ihrer Einrichtung.