

Szérum vs. plazma

Jóllehet gyakran tanácsos a rövid TAT idő miatt plazma csövet használni, szem előtt kell tartani, hogy a plazma nem alkalmas az összes laboratóriumi paraméter meghatározására, a véralvadásgátlók jelenléte miatt.² A szérum használata bizonyos esetekben létfontosságú.



Az új **VACUETTE®** Serum Fast cső egyesíti a **SZÉRUM** MINŐSÉGÉT a **PLAZMA** SEBESSÉGÉVEL.

Your **Power** for Health


greiner bio-one



Ausztria (Központi iroda)
Greiner Bio-One GmbH
Telefon +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-mail office@at.gbo.com

Brazília
Greiner Bio-One Brasil
Telefon +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-mail office@br.gbo.com

Egyesült Királyság
Greiner Bio-One Ltd.
Telefon +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-mail info@uk.gbo.com

Franciaország
Greiner Bio-One SAS
Telefon +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-mail office@fr.gbo.com

Hollandia
Greiner Bio-One B.V.
Telefon +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-mail info@nl.gbo.com

További információkért kérjük látogassa meg a www.gbo.com/preanalytics honlapunkat vagy lépjen kapcsolatba velünk.

India
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Telefon +91 120 456 8787
Fax +91 120 456 8788
E-mail info@gboindia.com

Japán
Greiner Bio-One Co. Ltd.
Telefon +81 3 3505 8875
Fax +81 3 3505 8945
E-mail info@jp.gbo.com

Kína
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Telefon +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-mail office@cn.gbo.com

Magyarország
Greiner Bio-One Hungary Kft.
Telefon +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-mail office@hu.gbo.com

Németország
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Telefon +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-mail office@de.gbo.com

Olaszország
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Telefon +39 02 9438 3340
Fax +39 02 9438 3366
E-mail office@it.gbo.com

Portugália
VACUETTE Portugal S.A.
Telefon +351 252 647 721
Fax +351 252 647 722
E-mail info@vacuette.pt

Spanyolország
VACUETTE Espana S.A.
Telefon +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-mail info@vacuette.es

Svájc
Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Telefon +41 7 12 28 55 22
Fax +41 7 12 28 55 21
E-mail office@ch.gbo.com

Thaiföld
Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Telefon +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-mail office@th.gbo.com

Törökország
Greiner Bio-One Turkey
Telefon +90 216 576 6004
Fax +90 216 576 6005
E-mail office@tr.gbo.com

USA
Greiner Bio-One North America Inc.
Telefon +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-mail info@us.gbo.com

Your **Power** for Health


greiner bio-one



VACUETTE®
Serum Fast cső

Gyorsaság
kompromisszumok
nélkül



VACUETTE® Serum Fast cső

Gyorsaság kompromisszumok nélkül

Az idő lényeges tényező, amikor a betegek kezeléséhez gyors és pontos diagnózis szükséges. A vérvételt követő gyors véralvadás lehetővé teszi, hogy létfontosságú perceket lehessen megtakarítani és azzal az előnnyel is együtt jár, hogy hatékonyabbá teszi a laboratóriumi munkát.

A **VACUETTE®** CAT Szérum Gyors cső egyesíti a plazma cső gyorsaságát a szérum jellemzőivel.

Elemzésre kész csupán 10-15 percen belül¹

A csőfal belső felületét BCA thrombin adalékanyag keverékkel vonták be, amely felgyorsítja a véralvadási folyamatot. A **VACUETTE®** CAT Serum Fast csővel a teljes feldolgozási idő csak 10 perc, a hagyományos szérum csövek 40 percéhez képest, lehetővé téve a vizsgálatkéréstől az eredménykiadásig eltelt idő (TAT) könnyű és hatékony lecsökkentését.

A cső olyan gélt tartalmaz, amely centrifugálás után stabil határrejteget képez a teljes vér sejtjes alkotóelemei és a szérum között.



ELŐNYÖK MÁR AZ ELSŐ LÁTÁSRA

- Rövidebb preanalitikai folyamat
- Rövidebb, a vizsgálatkéréstől az eredménykiadásig eltelt idő
- A vérvétel röviddel a vérminták elszállítása előtt elvégezhető
- Gyorsabb laboreredmények a helyszíni elemzés alapján

Könnyen keverhető minta

A teljes vérből vett minta teljes mértékben elkeveredik az adalékanyaggal, a cső 5-10 alkalommal történő megfordításával.

Törhetetlen PET cső


Kihívást jelentő körülmények esetén a cső könnyen kicsúszhat a felhasználó kezéből.

A **VACUETTE®** CAT Serum Fast cső a már jól ismert törhetetlen PET-ből készül. A bevált vákuumos technológiát használják és könnyen nyitható biztonsági kupakkal rendelkeznek. Ez higiénikus munkaeljárásokat tesz lehetővé a kifröccsenés kockázata nélkül, amely előfordulhat a szabványos gumidugók esetében.

Centrifugálási ajánlás

A Greiner Bio-One a szérum kinyeréséhez az alábbi centrifugálási beállításokat javasolja:

5 min / 3000g
10 min / 1800g
20°C

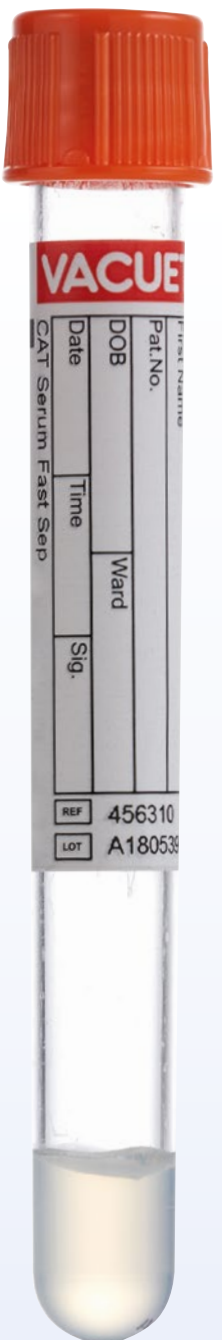

Teljes véralvadás csupán 5 PERC alatt

KEZDJE A CÉLZOTT KEZELÉST GYORSABBAN

A **VACUETTE®** CAT Serum Fast cső radikálisan lerövidíti a preanalitikai folyamatot, ahol véralvadáshoz a teljes vér mintában csupán 5 percet vesz igénybe.



A cikk áttekintése

Cikkszám	Névl. Téf.	Kupak színe	Gyűrű színe	Cső méret	Leírás	Csomagolás	
						Belső	Külső
VACUETTE® CAT Serum Fast Szeperátor - Perem nélküli (lehúzható kupak)							
454591	3,5ml	narancs-sárga	sárga	13 x 75	CAT Serum Fast Szeperátor	50 db.	1200 db.
456310	5ml	narancs-sárga	sárga	13 x 100	CAT Serum Fast Szeperátor	50 db.	1200 db.

Hivatkozások:

- 1 Az alkalmazott centrifugálási körülményektől függően
- 2 Véralvadásgátlók használata a diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatokban. World Health Organization. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2, 2002.