

Siero VS Plasma

Nonostante sia sempre consigliato di utilizzare le provette per plasma grazie al corto TAT, è da notare che il plasma non sia consigliato per tutti i parametri analitici a causa della presenza di anticoagulante.² L'uso del siero risulta essenziale in questi casi.



La nuova provetta **VACUETTE®**
per Siero veloce combina la
QUALITÀ DEL SIERO con la
VELOCITÀ DEL PLASMA.

Your **Power** for Health


greiner bio-one



Austria (Ufficio Principale)
Greiner Bio-One GmbH
Telefono +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-Mail office@at.gbo.com

Brazile
Greiner Bio-One Brasil
Telefono +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-Mail office@br.gbo.com

Cina
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Telefono +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

Francia
Greiner Bio-One SAS
Telefono +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-Mail accueil@gbo.com

Germania
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Telefono +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

Per ulteriori informazioni, visitate gentilmente
il nostro sito www.gbo.com/preanalytics o contattaci.

Giappone
Greiner Bio-One Co. Ltd.
Telefono +81 3 3505 8875
Fax +81 3 3505 8945
E-Mail info@jp.gbo.com

Gran Bretagna
Greiner Bio-One Ltd.
Telefono +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

India
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Telefono +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Italia
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Telefono +39 02 9438 3340
Fax +39 02 9438 3366
E-Mail office@it.gbo.com

Olanda
Greiner Bio-One B.V.
Telefono +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Portogallo
VACUETTE Portugal S.A.
Telefono +351 252 647 721
Fax +351 252 647 722
E-Mail info@vacuette.pt

Spagna
Greiner Bio One España, S.A.U.
Telefono +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@es.gbo.com

Svizzera
Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Telefono +41 71 228 55 22
Fax +41 71 228 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Thailandia
Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Telefono +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail office@th.gbo.com

Turchia
Greiner Bio-One Turkey
Telefono +90 216 576 6004
Fax +90 216 576 6005
E-Mail office@tr.gbo.com

Ungheria
Greiner Bio-One Hungary Kft.
Telefono +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

USA
Greiner Bio-One North America Inc.
Telefono +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-Mail info@us.gbo.com

Your **Power** for Health


greiner bio-one



Provetta
VACUETTE®
Siero Veloce

Velocità senza
compromessi



Provetta VACUETTE® Siero Veloce

Velocità senza compromessi

Quando è necessaria una veloce e accurata diagnosi per trattare il paziente, il tempo è un fattore critico. La veloce coagulazione del campione di sangue dopo il prelievo permette di salvare minuti preziosi e presenta anche il vantaggio di rendere il lavoro del laboratorio più efficiente.

La provetta **VACUETTE®** CAT Siero Veloce combina la velocità del plasma con le proprietà del siero.

Pronti per l'analisi in soli 10-15 minuti¹

L'interno della provetta è coattato con una soluzione di BCA (Blood Coagulation Additive) e trombina, la quale accelera il processo di coagulazione. Con la provetta **VACUETTE®** CAT Siero Veloce l'intero processo richiede solo 10 minuti, al posto dei 40 minuti necessari con la provetta per siero standard, permettendo un facile ed efficace miglioramento del tempo di turnaround (TAT).

La provetta contiene un gel che forma una barriera stabile tra il siero e la componente cellulare del sangue intero dopo centrifugazione.



VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO:


- Processo preanalitico più corto
- Tempo di turnaround migliorato
- Il prelievo ematico può essere effettuato poco prima del trasporto del campione
- Risultati di laboratorio più veloci con analisi sul posto

Facile da miscelare

Il campione di sangue intero viene completamente miscelato all'additivo grazie all'inversione della provetta per 5-10 volte.

Provetta infrangibile in PET

In situazioni di urgenza può capitare che la provetta sfugga dalle mani dell'operatore. La provetta **VACUETTE®** CAT Siero Veloce è costruita con PET infrangibile. Le provette sfruttano la comprovata tecnologia sottovuoto e hanno tappo di sicurezza con apertura facilitata. Ciò permette di avere procedure di lavoro più igieniche senza il rischio di perdite che possono capitare con i classici tappi con gomma perforabile.

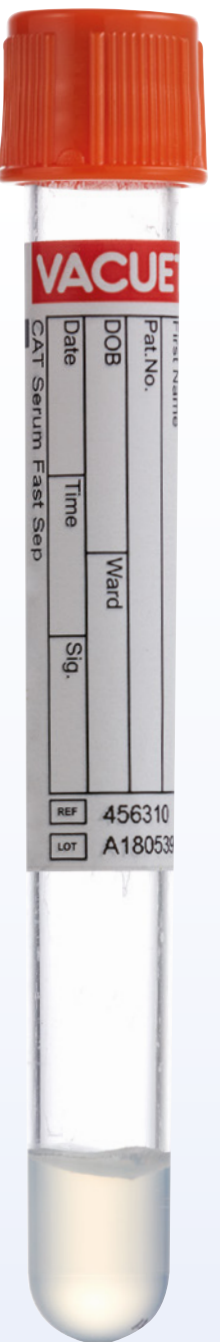

Centrifugazione Consigliata

Greiner Bio-One consiglia le seguenti condizioni di centrifugazione per siero:

5 min a 3000g
10 min a 1800g
20°C

Piena coagulazione IN SOLI 5 MINUTI

INIZIO DEL TRATTAMENTO NECESSARIO PIÙ VELOCE

La provetta **VACUETTE®** CAT per siero veloce riduce radicalmente il processo preanalitico, grazie alla coagulazione del campione prelevato in soli 5 minuti.



Scheda Prodotto

Prodotto Nu.	Vol. Nom.	Colore Tappo	Colore Anello	Dimensioni Provetta	Descrizione	Packaging	
						Interno	Esterno
VACUETTE® CAT siero veloce con separatore - tappo a pressione (pull cap)							
454591	3.5ml	Arancione	Giallo	13 x 75	CAT Siero Veloce con separatore	50 pcs.	1200 pcs.
456310	5ml	Arancione	Giallo	13 x 100	CAT Siero Veloce con separatore	50 pcs.	1200 pcs.

Referenze:

- 1 A seconda delle condizioni di centrifugazione usate
- 2 Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. World Health Organization. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2, 2002.