

# CELLSTAR® Zellkultur Multiwell Platten


## (6, 12, 24, 48 Well Format)

Greiner Bio-One bietet Multiwell Platten im 6, 12, 24, und 48 Well-Format an. Das Kaminform-Design, in Kombination mit den Kondensationsringen im Deckel, reduziert effizient das Risiko von Kreuzkontaminationen und setzt die Verdunstung aus den Wells herab. Alle Platten sind untereinander stapelbar, sowohl mit als auch ohne Deckel. Durch das besondere Design der Platten wird auch bei aufeinander gestapelten Platten ein schneller Temperaturexaustausch über die gesamte Bodenfläche jeder einzelnen Platte ermöglicht. Die Standardisierung von Tiefe, Durchmesser und Anordnung der Wells vereinfacht manuelles und automatisiertes Arbeiten, sowie die Verwendung gängiger Membran-Insertsysteme. Alle Platten haben eine aufgedruckte Lot-Nummer und sind sowohl pyrogen- als auch DNase-/RNase-frei.

Plattenformat	6 Well	12 Well	24 Well	48 Well
Wachstumsfläche [cm <sup>2</sup> ]	9,6 je Well	3,9 je Well	1,9 je Well	1,0 je Well
Arbeitsvolumen [ml]	2 - 5 je Well	2 - 4 je Well	0,5 - 1,5 je Well	0,5 - 1 je Well

### Key Facts

- Zellkulturbehandelt (TC), steril
- Abdeckplatte für optimalen Gasaustausch bei geringer Verdunstung
- Kaminformdesign der Wells
- Alphanumerische Codierung
- Schriftfeld und Lot-Nr. auf jeder Platte
- Exzellente Stapelbarkeit aller Platten
- Länge x Breite: 127,76 x 85,48 mm

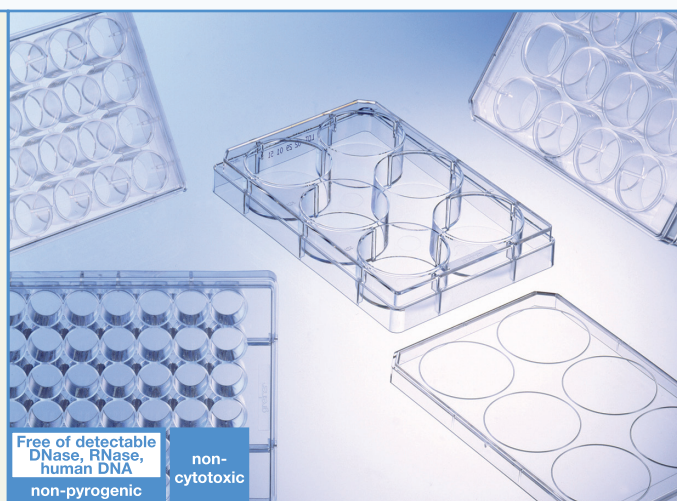

### Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton
657 160	6 Well Multiwell Platte, für adhärenzte Zellkulturen, TC, mit Deckel, steril	1	100
665 180	12 Well Multiwell Platte, für adhärenzte Zellkulturen, TC, mit Deckel, steril	1	100
662 160	24 Well Multiwell Platte, für adhärenzte Zellkulturen, TC, mit Deckel, steril	1	100
677 180	48 Well Multiwell Platte, für adhärenzte Zellkulturen, TC, mit Deckel, steril	1	100
657 185	6 Well Multiwell Platte, für Suspensionskulturen, mit Deckel, steril	1	100
665 102	12 Well Multiwell Platte, für Suspensionskulturen, mit Deckel, steril	1	100
662 102	24 Well Multiwell Platte, für Suspensionskulturen, mit Deckel, steril	1	100
677 102	48 Well Multiwell Platte, für Suspensionskulturen, mit Deckel, steril	1	100